

Манипулатор за матка

Манипулатор за матката

Номера на артикулите

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Безопасност и отговорност

Преди да използвате уреда, моля
- прочетете и спазвайте инструкциите за употреба.
- Дръжте ги на видно място за по-нататъшна употреба.

RUDOLF Medical не носи отговорност за последствията от неправилна употреба, подготовка и поддръжка. В тези случаи гаранцията се анулира.

Показания

Инструментът е предназначен за употреба в гинекологията и се въвежда вагинално. Използва се за позициониране на матката за следващата процедура.

Само по лекарско предписание

Да се използва само от квалифицирани специалисти.
Противопоказания
Инструментът не е предназначен за употреба върху централната нервна или кръвоносната система.

Риск от инфекция

- Подгответе инструмента преди употреба.
- Подгответе инструмента, преди да го върнете на производителя.


Риск от нараняване

- Използвайте само оригинални аксесоари или съвместими аксесоари от други производители.
- Не използвайте и не ремонтирайте повредени инструменти.

Съдържание на доставката

- След разопаковането проверете всички части, за да се уверите, че няма транспортни повреди.
- При наличие на повреди, моля, свържете се с производителя.
- В комплекта са включени шест адаптера, всеки с различен диаметър, дължина или дизайн.

- 1 4-квадратна пръчка
- 2 Адаптер
- 3 Заклучващ механизъм за адаптера
- 4 Конус
- 5 Тръба за изплакване
- 6 Дръжка
- 7 Част на дръжката
- 8 LL връзка
- 9 Държач за плот
- 10 Скоба
- 11 Плъзгач

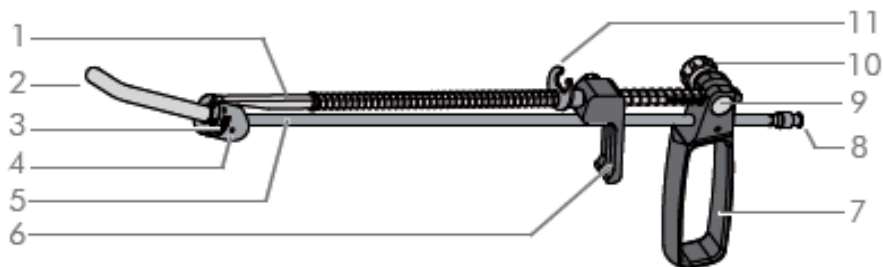

- Поставете O-пръстена на края на тръбата за промиване.
- Поставете тръбата за промиване в конуса и я сгънете нагоре.

Описание на продукта

Адаптер с въртящ се конус позволява позиционирането на матката за процедурата. Този конус може да се движи нагоре и надолу с помощта на този адаптер.

Адаптерите с перфорации позволяват също така извършването на аспирация и промиване по време на процедурата.

Технически данни

Условия за съхранение и транспорт


Описание	Стойност
Температура	-30°C – +40°C
Относителна влажност	≤90 %
Атмосферно налягане	700–1200 hPa

Срок на експлоатация
≤1000 цикъла и ≤2 години


Монтаж и демонтаж на уреда

5.1 Сглобяване на уреда

- Размерът на адаптера се определя непосредствено преди операцията.

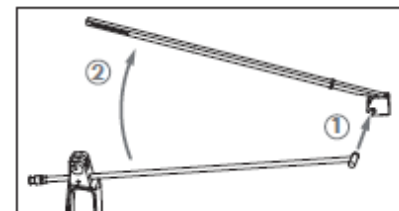


- Поставете дългата пружина, след това плъзгача и накрая дръжката върху квадратната пръчка.
- Нагласете отворите в квадратната пръчка и дръжката.
- Поставете винта от дръжката и го затегнете.
- Поставете късата пружина върху квадратната пръчка и натиснете към дръжката, докато квадратната пръчка се побере в водача на дръжката.

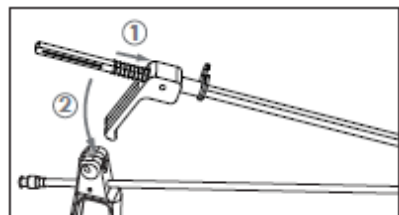


- Поставете винта на скобата в дръжката и го завийте към опората.

5.2 Разглобяване на инструмента


- Отворете заключването на адаптера и го извадете.

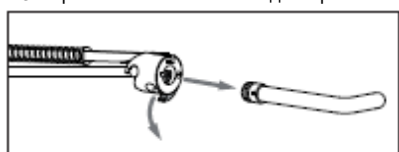


- Освободете винта на скобата и избутайте дръжката на брояча.

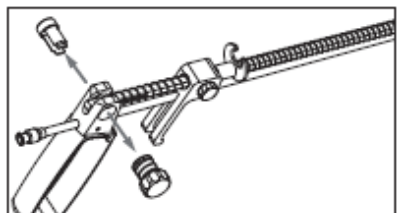


- Разхлабете винтовете на дръжката.

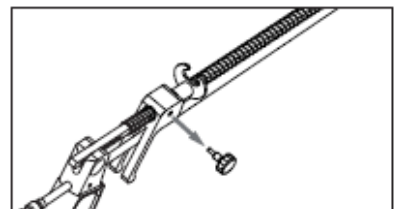

- Натиснете пружината към дръжката и сгънете квадратната пръчка.

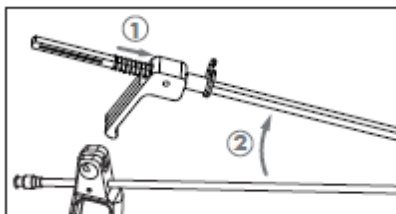

- Извадете пружините, дръжката и плъзгача.

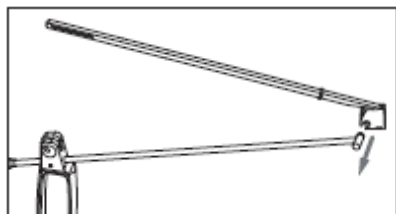

- Извадете O-пръстена в края на тръбата за изплакване.

Приложете

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от инфекция от нестерилни инструменти.

- Подгответе преди употреба.
- Поставете адаптер с необходимата дължина в конуса.
- Ако е необходимо, свържете LL връзката с апарат за промиване/аспирация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от нараняване от ъгловия резбован терминал.

- Не държите резбования терминал под ъгъл, когато го въвеждате в шийката на матката.
- Поставете инструмента в шийката на матката.
- Отпуснете леко винта на скобата.
- Адаптерът може да се движи отстрани настрана.
- Поставете адаптера в желаната позиция с помощта на дръжката.
- Поставете матката.
- Въведете кукавидната пинсета.
- Преместете плъзгача към опората за палеца на кукавидната пинсета и закачете опората за палеца.
- Извършете процедурата.

Подготовка

- Инструментът трябва да бъде разглобен преди подготовката.

Вижте раздел „5.2 Разглобяване на инструмента“. *Моля, спазвайте също така нашата обща информация за грижата, поддръжката и почистването DOK#0301!*

Съхранение

Моля, вижте отделните инструкции за подготовка DOK#0301 за подробна информация относно съхранението и грижите.

Изхвърляне

Ценните суровини могат да бъдат използвани повторно, ако се изхвърлят по екологичен начин.



Изхвърлете продукта по екологичен начин, като следвате указанията на болницата.

Символи и обяснения

	Внимание! Неспазването на предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
	Следвайте инструкциите за употреба!
REF	Номер на поръчката
	Номер на партидата
	Производител:
	Маркировка CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Германия
Тел. +49 7463 9956-0
Факс +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com