

Manipulátor dělohy

Manipulátor dělohy

Číslo položek

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Bezpečnost a odpovědnost

Před použitím přístroje si prosím

- přečtěte si a dodržujte návod k použití.
- Uchovejte je na dobře viditelném místě pro pozdější použití.

Společnost RUDOLF Medical nenese žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití, přípravy a údržby. V těchto případech zaniká záruka.

Indikace

Nástroj je určen k použití v gynekologii a zavádí se vaginálně. Používá se k polohování dělohy pro následující zákrok.

Pouze na lékařský předpis

Pouze pro použití kvalifikovanými odborníky.

Kontraindikace

Tento nástroj není určen k použití na centrální nervový systém nebo oběhový systém.

Riziko infekce

- Připravte před použitím.
- Připravte nástroj před vrácením výrobcí.


Nebezpečí poranění

- Používejte pouze originální příslušenství nebo kompatibilní příslušenství od jiných výrobců.
- Nepoužívejte ani neopravujte poškozené přístroje.

Obsah dodávky

- Po vybalení zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo k poškození při přepravě.
- V případě poškození kontaktujte výrobce.
- Součástí sady je šest adaptérů, každý s jiným průměrem, délkou nebo provedením.

- 1 4-čtvercová tyč
- 2 Adaptér
- 3 Zámek adaptéru
- 4 Kužel
- 5 Oplachovací trubice
- 6 Rukojeť
- 7 Rukojeť
- 8 LL spoj
- 9 Držák pultu
- 10 Upínací šroub
- 11 Posuvník

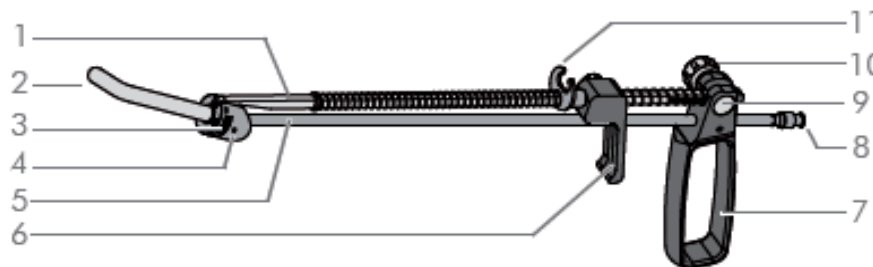

Popis produktu

Adaptér s otočným kuželem umožňuje polohování dělohy pro zákrok. Tento kužel lze pomocí adaptéru posouvat nahoru a dolů.

Adaptéry s otvory také umožňují provádět odsávání a proplachování během zákroku.

Technické údaje

Podmínky skladování a přepravy

Popis	Hodnota
Teplota	-30 °C – +40 °C
Relativní vlhkost	≤90 %
Atmosférický tlak	700–1200 hPa


Životnost

≤1000 cyklů a ≤2 roky


Montáž a demontáž přístroje

5.1 Montáž přístroje

- Velikost adaptéru se stanoví přímo před operací.
- Nasadte O-kroužek na konec proplachovací trubičky.
- Vložte proplachovací trubici do kužele a ohněte ji nahoru.

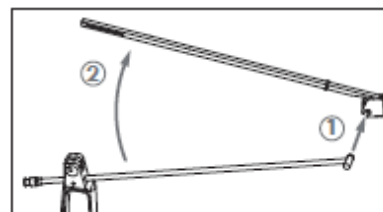


- Na čtvercovou tyč nasadte dlouhou pružinu, poté posuvník a nakonec rukojeť.
- Vyrovnajte otvory v čtvercové tyči a rukojeti.
- Zasuňte šroub z rukojeti a utáhněte.
- Nasuňte krátkou pružinu na čtvercovou tyč a zatlačte proti rukojeti, dokud čtvercová tyč nezapadne do vedení rukojeti.

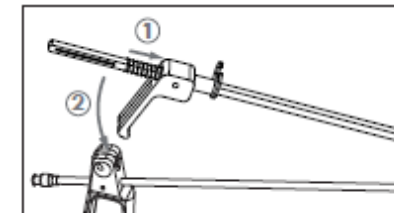


- Vložte upínací šroub do rukojeti a přišroubujte jej k protilehlému držáku.

5.2 Demontáž přístroje


- Odemkněte zámek adaptéru a vyjměte adaptér.

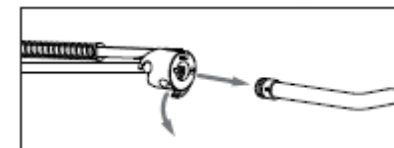


- Uvolněte upínací šroub a vytlačte protilehlý držák.

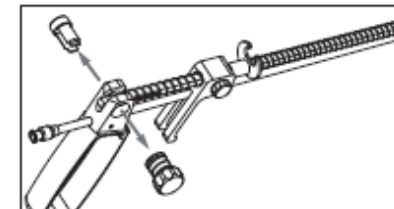


- Povolte šrouby na rukojeti.

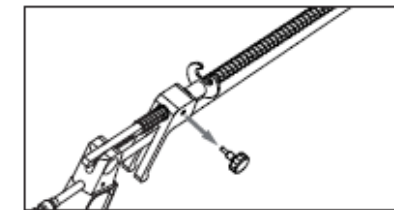

- Zatlačte pružinu proti rukojeti a sklopte čtvercovou tyč.

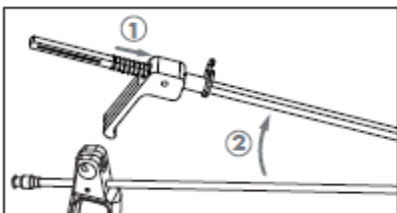

- Vyměňte pružiny, rukojeť a posuvník.

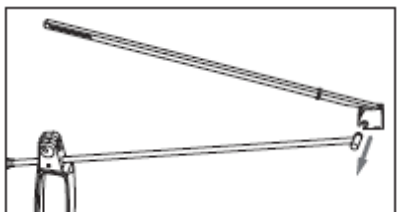

- Vyměňte O-kroužek na konci proplachovací trubice.

Použijte

VAROVÁNÍ

Riziko infekce způsobené nesterilními nástroji.

- Připravte před použitím.
- Nasuňte do zúžení adaptér požadované délky.
- V případě potřeby připojte LL konektor k proplachovací/odsávací jednotce.

VAROVÁNÍ

Riziko poranění způsobené zahnutým závitovým koncem.

- Při zavádění do děložního čípku nedržte závitový konec pod úhlem.
- Zavádějte nástroj do děložního čípku.
- Mírně povolte upínací šroub.
- Adaptér lze posouvat ze strany na stranu.
- Pomocí rukojeti nastavte polohu adaptéru podle potřeby.
- Uvedte dělohu do správné polohy.
- Zaveďte háčkovité kleště.
- Posuňte posuvník k opěrce pro palec háčkových kleští a zahákněte opěrku pro palec.
- Proveďte zákrok.

Příprava

- Před přípravou je nutné nástroj rozebrat.

Viz kapitola „5.2 Demontáž nástroje“.

Dodržujte také naše obecné informace o péči, údržbě a čištění DOK#0301!

Skladování

Podrobné informace o skladování a péči naleznete v samostatném návodu na přípravu DOK#0301.

Likvidace

Cenné suroviny lze znovu použít, pokud jsou likvidovány ekologickým způsobem.



Produkt likvidujte ekologickým způsobem v souladu s pokyny nemocnice.

Symbyly a vysvětlivky

	Upozornění! Nedodržení varování a bezpečnostních opatření může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
	Dodržujte návod k použití!
REF	Objednací číslo
	Číslo šarže
	Výrobce:
	Značka CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Německo
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com