

D0302 / Rev.C / DCR01769

Livmodermanipulator

Varenumre

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Sikkerhed og ansvar

- Før instrumentet tages i brug, skal du
- læse og følge brugsanvisningen.
 - Opbevar den synligt til senere brug.

RUDOLF Medical påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af forkert brug, klargøring og vedligeholdelse. I disse tilfælde bortfalder garantien.

Indikation

Instrumentet er beregnet til brug i gynækologi og indføres vaginalt. Det bruges til at placere livmoderen til den efterfølgende procedure.

Kun på recept

Må kun anvendes af kvalificerede specialister.

Kontraindikation

Instrumentet er ikke beregnet til brug på centralnervesystemet eller kredsløbssystemet.

Risiko for infektion

- Forbered instrumentet før brug.
- Forbered instrumentet, inden det returneres til producenten.


Risiko for skade

- Brug kun originalt tilbehør eller kompatibelt tilbehør fra andre producenter.
- Brug eller reparer ikke beskadigede instrumenter.

Leveringsomfang

- Kontroller alle dele for transportskader efter udpakning.
- Hvis der er skader, bedes du kontakte producenten.
- Sættet indeholder seks adaptere, hver med en anden diameter, længde eller udformning.

- 1 4-kantet stang
- 2 Adapter
- 3 Adapterlås
- 4 Konus
- 5 Skylrør
- 6 Håndtag
- 7 Håndtagsdel
- 8 LL-tilslutning
- 9 Bordholder
- 10 Klemmeskrue
- 11 Skyder

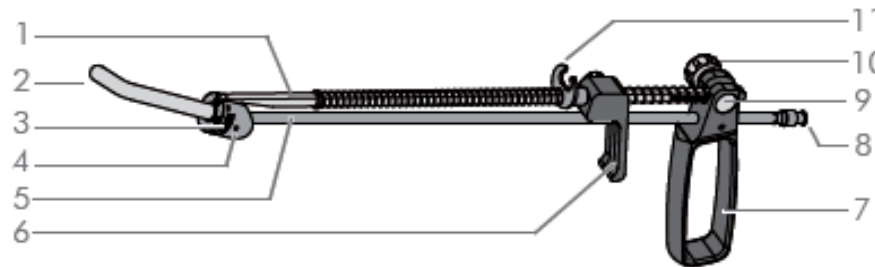

Produktbeskrivelse

En adapter med en drejelig konisk del gør det muligt at placere livmoderen korrekt indgrebet. Denne koniske del kan bevæges op og ned ved hjælp af denne adapter.

Adaptore med perforeringer gør det også muligt at udføre sugning og skylning under proceduren.

Tekniske data

Opbevarings- og transportbetingelser


Beskrivelse	Værdi
Temperatur	-30 °C – +40 °C
Relativ luftfugtighed	≤90 %
Atmosfærisk tryk	700–1200 hPa

Produktlevetid
≤1000 cyklusser og ≤2 år


Montering og demontering af instrumentet

5.1 Montering af instrumentet

- Adapterens størrelse fastlægges umiddelbart før operationen.
- Sæt O-ringen på enden af skylleslangen.
- Indsæt skylningsslangen i konussen, og fold den op.

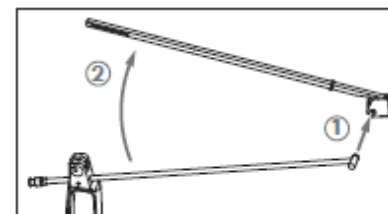


- Monter den lange fjeder, derefter skyderen og derefter håndtaget på den firkantede stang.
- Juster hullerne i den firkantede stang og håndtaget.
- Indsæt skruen fra håndtaget, og stram den.
- Sæt den korte fjeder over den firkantede stang, og skub mod håndtaget, indtil den firkantede stang passer ind i håndtagsdelens føring.

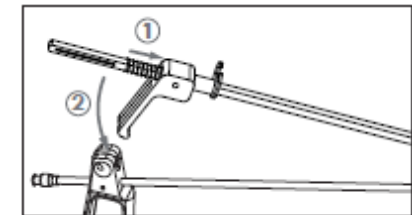


- Indsæt klemmeskruen i håndtagsstykket og skru den fast til modholderen.

5.2 Adskillelse af instrumentet


- Åbn adapterlåsen, og fjern adapteren.

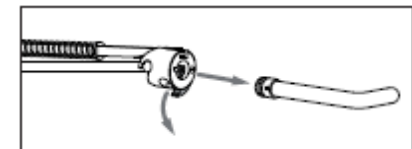


- Løsn klemmeskruen, og skub modholderen ud.

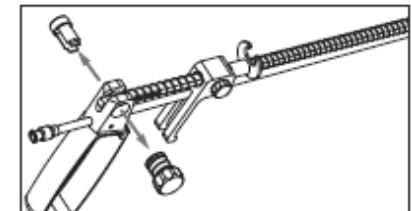


- Løsn skruerne på håndtaget.

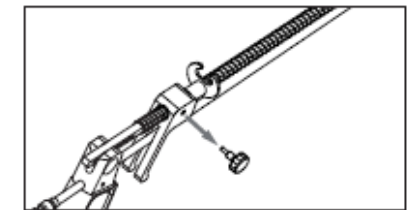

- Skub fjederen mod håndtaget, og fold den firkantede stang op.

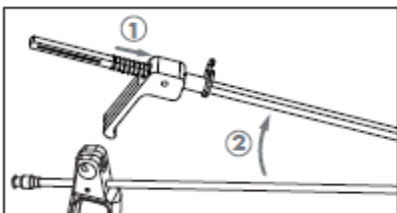

- Fjern fjedrene, håndtaget og skyderen.

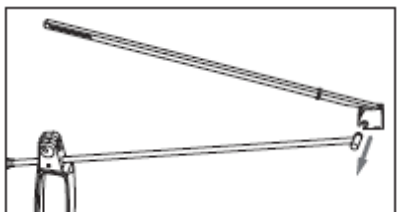

- Fjern O-ringene i enden af skylle-røret.

Anvend

ADVARSEL

Risiko for infektion fra ikke-sterile instrumenter.

- Forbered før brug.
- Sæt en adapter i den ønskede længde på konussen.
- Tilslut om nødvendigt LL-tilslutningen til en skylle-/sugeenhed.

ADVARSEL

Risiko for skade fra den vinklede gevindterminal.

- Hold ikke den gevindskårne terminal i en vinkel, når den føres ind i livmoderhalsen.
- Indfør instrumentet i livmoderhalsen.
- Løsn klemmeskruen en smule.
- Adapteren kan bevæges fra side til side.
- Placer adapteren efter behov ved hjælp af håndtaget.
- Placer livmoderen.
- Indfør den krogformede tang.
- Flyt skyderen til tommelfingerstøtten på den krogformede tang, og sæt krogen fast i tommelfingerstøtten.
- Udfør proceduren.

Klargøring

- Instrumentet skal skilles ad før klargøring.

Se afsnit "5.2 Adskillelse af instrumentet".

Overhold også vores generelle oplysninger om pleje, vedligeholdelse og rengøring DOK#0301!

Opbevaring

Se de separate klargøringsinstruktioner DOK#0301 for detaljerede oplysninger om opbevaring og pleje.

Bortskaffelse

Værdifulde råmaterialer kan genbruges, hvis de bortskaffes på en miljøvenlig måde.



Bortskaf produktet på en miljøvenlig måde i henhold til hospitalets retningslinjer.

Symboler og forklaringer

	Advarsel! Manglende overholdelse af advarsler og forholdsregler kan medføre død eller alvorlig personskade.
	Følg brugsanvisningen!
REF	Bestillingsnummer
	Partinummer
	Producent:
	CE-mærke



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland
Tlf. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com