

Χειριστής μήτρας

Χειριστής μήτρας

Αριθμοί είδους

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Ασφάλεια και ευθύνη

Πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο, παρακαλούμε
- διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε εμφανές σημείο για μελλοντική χρήση.

Η RUDOLF Medical δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες λανθασμένης χρήσης, προετοιμασίας και φροντίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγγύηση ακυρώνεται.

Ενδείξεις

Το όργανο προορίζεται για χρήση στη γυναικολογία και εισάγεται κολπικά. Χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της μήτρας για την ακόλουθη διαδικασία.

Μόνο με ιατρική συνταγή

Να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένους ειδικούς.

Αντενδείξεις

Το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση στο κεντρικό νευρικό ή κυκλοφορικό σύστημα.

Κίνδυνος μόλυνσης

- Προετοιμάστε το πριν από τη χρήση.
- Προετοιμάστε το εργαλείο πριν το επιστρέψετε στον κατασκευαστή.


Κίνδυνος τραυματισμού

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα ή συμβατά εξαρτήματα άλλων εταιρειών.
- Μην χρησιμοποιείτε ή επισκευάζετε κατεστραμμένα όργανα.


Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές από τη μεταφορά μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Το σετ περιλαμβάνει έξι προσαρμογείς, ο καθένας με διαφορετική διάμετρο, μήκος ή σχεδιασμό.

- 1 Ράβδος 4 τετραγώνων
- 2 Προσαρμογέας
- 3 Κλειδωμα προσαρμογέα
- 4 Κώνος
- 5 Σωλήνας έκπλυσης
- 6 Λαβή
- 7 Τμήμα λαβής
- 8 Σύνδεση LL
- 9 Βάση πάγκου
- 10 Βίδα σύσφιξης
- 11 Ρυθμιστής

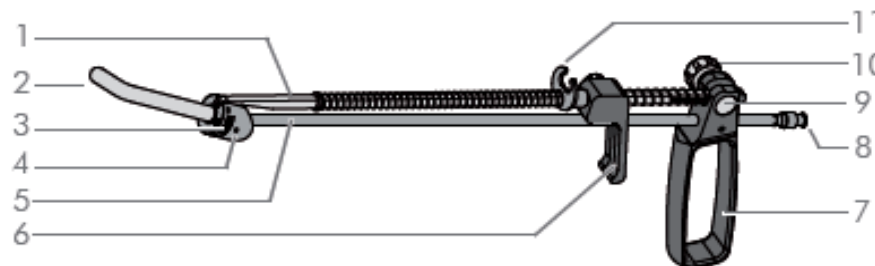


- Εισάγετε τον σωλήνα έκπλυσης στο κωνικό τμήμα και αναδιπλώστε τον.

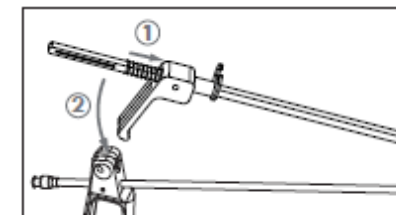


- Εισάγετε τη βίδα σύσφιξης στο τμήμα της λαβής και βιδώστε την στον αντίθετο στήριγμα.

5.2 Αποσυναρμολόγηση του οργάνου


- Ανοίξτε το κλειδωμα του προσαρμογέα και αφαιρέστε τον προσαρμογέα.

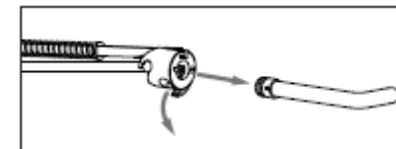

- Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης και στρώστε προς τα έξω τη βάση στήριξης.

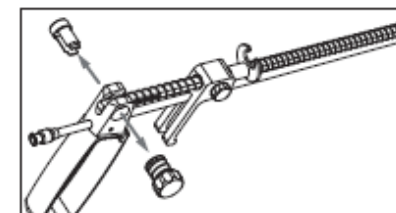

- Χαλαρώστε τις βίδες στη λαβή.

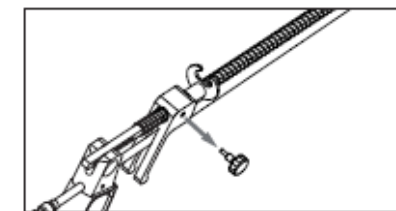

- Πιέστε το ελατήριο προς τη λαβή και αναδιπλώστε την τετράγωνη ράβδο.

Περιγραφή προϊόντος

Ένας προσαρμογέας με περιστρεφόμενο κώνο επιτρέπει την τοποθέτηση της μήτρας για τη διαδικασία. Ο κώνος αυτός μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας αυτόν τον προσαρμογέα.

Οι προσαρμογείς με οπές επιτρέπουν επίσης την αναρρόφηση και την έκπλυση κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς

Περιγραφή	Τιμή
Θερμοκρασία	-30 °C – +40 °C
Σχετική υγρασία	≤90 %
Ατμοσφαιρική πίεση	700–1200 hPa


Διάρκεια ζωής προϊόντος

≤1000 κύκλοι και ≤2 έτη


Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του οργάνου

5.1 Συναρμολόγηση του οργάνου


- Το μέγεθος του προσαρμογέα καθορίζεται απευθείας πριν από την επέμβαση.
- Τοποθετήστε τον δακτύλιο Ο στο άκρο του σωλήνα έκπλυσης.

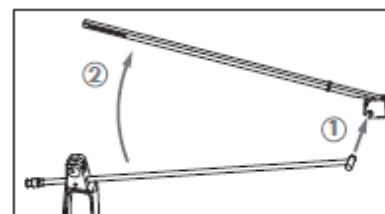

- Τοποθετήστε το μακρύ ελατήριο, στη συνέχεια το ρυθμιστικό και μετά τη λαβή πάνω στην τετράγωνη ράβδο.
- Ευθυγραμμίστε τις οπές στην τετράγωνη ράβδο και στη λαβή.
- Εισάγετε τη βίδα από τη λαβή και σφίξτε.
- Τοποθετήστε το κοντό ελατήριο πάνω από την τετράγωνη ράβδο και πιέστε προς τη λαβή μέχρι η τετράγωνη ράβδος να ταιριάζει στον οδηγό του τμήματος της λαβής.

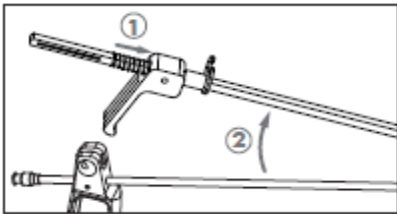

- Αφαιρέστε τα ελατήρια, τη λαβή και το ρυθμιστικό.

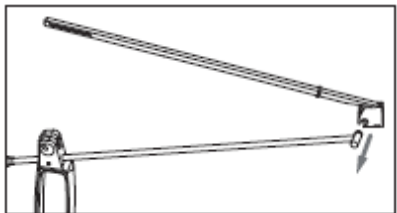

- Αφαιρέστε τον δακτύλιο O στο άκρο του σωλήνα έκπλυσης.

Εφαρμογή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης από μη αποστειρωμένα εργαλεία.

- Προετοιμάστε πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε έναν προσαρμογέα του απαιτούμενου μήκους στο κωνικό τμήμα.
- Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη σύνδεση LL με μονάδα έκπλυσης/αναρρόφησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από το γωνιακό σπειροειδές άκρο.

- Μην κρατάτε το σπειροειδές άκρο υπό γωνία κατά την εισαγωγή του στον τράχηλο.
- Εισάγετε το εργαλείο στον τράχηλο.
- Χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα σύσφιξης.
- Ο προσαρμογέας μπορεί να μετακινηθεί από τη μία πλευρά στην άλλη.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα όπως απαιτείται χρησιμοποιώντας τη λαβή.
- Τοποθετήστε τη μήτρα.
- Εισάγετε τη λαβίδα με γάντζο.
- Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς το στήριγμα του αντίχειρα της γάντζωτης λαβίδας και γαντζώστε το στήριγμα του αντίχειρα.
- Εκτελέστε τη διαδικασία.

Προετοιμασία

- Το εργαλείο πρέπει να αποσυναρμολογηθεί πριν από την προετοιμασία.

Βλ. ενότητα «5.2 Αποσυναρμολόγηση εργαλείου».
Παρακαλούμε επίσης να τηρείτε τις γενικές πληροφορίες μας σχετικά με φροντίδα, συντήρηση και καθαρισμό DOK#0301!

Αποθήκευση

Ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες προετοιμασίας DOK#0301 για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και τη φροντίδα.

Απόρριψη

Οι πολύτιμες πρώτες ύλες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν απορριφθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Απορρίψτε το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσοκομείου.

Σύμβολα και επεξηγήσεις

	Προσοχή! Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης!
REF	Αριθμός παραγγελίας
	Αριθμός παρτίδας
	Κατασκευαστής:
	Σήμα CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Γερμανία
Τηλ. +49 7463 9956-0
Φαξ +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com