

Manipulador uterino

**Manipulador uterino**

**Números de artículo**

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

**Seguridad y responsabilidad**

Antes de utilizar el instrumento,

- leer y seguir las instrucciones de uso.
- Manténgalas en un lugar visible para su uso posterior.

RUDOLF Medical no se hace responsable de las consecuencias de un uso, preparación y mantenimiento incorrectos. En estos casos, la garantía quedará invalidada.

**Indicación**

El instrumento está destinado a su uso en ginecología y se introduce por vía vaginal. Se utiliza para posicionar el útero de cara a la siguiente intervención.

**Solo con receta**

Solo debe ser utilizado por especialistas cualificados.

**Contraindicaciones**

El instrumento no está indicado para su uso en el sistema nervioso central ni en el sistema circulatorio.

**Riesgo de infección**

- Preparar antes de su uso.
- Prepare el instrumento antes de devolverlo al fabricante.


**Riesgo de lesiones**

- Utilice únicamente accesorios originales o accesorios compatibles de otras empresas.
- No utilice ni repare instrumentos dañados.

**Contenido del envío**

- Compruebe todas las piezas para asegurarse de que no haya daños de transporte tras desembalar.
- Si hay algún daño, póngase en contacto con el fabricante.
- El juego incluye seis adaptadores, cada uno con un diámetro, una longitud o un diseño diferente.

- 1 Varilla cuadrada de 4
- 2 Adaptador
- 3 Bloqueo del adaptador
- 4 Cono
- 5 Tubo de enjuague
- 6 Mango
- 7 Pieza del mango
- 8 Conexión LL
- 9 Soporte de mostrador
- 10 Tornillo de sujeción
- 11 Deslizador

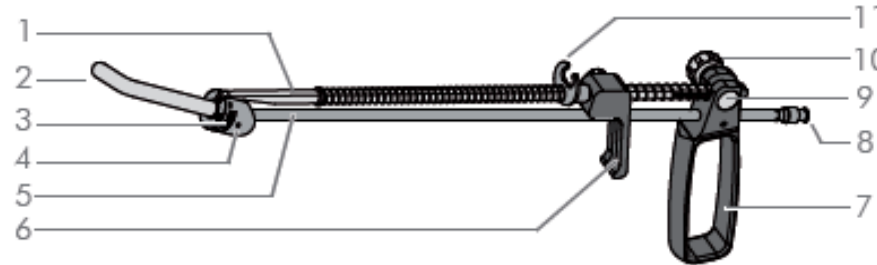

**Descripción del producto**

Un adaptador con un cono pivotante permite colocar el útero en la posición adecuada para la intervención. Este cono se puede mover hacia arriba y hacia abajo utilizando este adaptador.

Los adaptadores con perforaciones también permiten realizar la succión y el lavado durante el procedimiento.

**Datos técnicos**

**Condiciones de almacenamiento y transporte**


Descripción	Valor
Temperatura	-30 °C – +40 °C
Humedad relativa	≤90 %
Presión atmosférica	700–1200 hPa

Vida útil del producto  
≤1000 ciclos y ≤2 años


**Montaje y desmontaje del instrumento**

**5.1 Montaje del instrumento**

- El tamaño del adaptador se determina directamente antes de la intervención.
- Coloque la junta tórica en el extremo del tubo de irrigación.
- Inserte el tubo de irrigación en el cono y dóblelo hacia arriba.

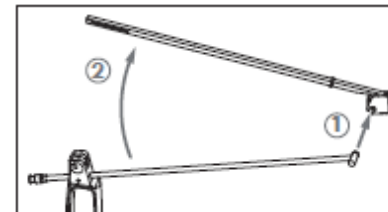


- Coloque el resorte largo, luego el deslizador y, a continuación, el mango en la varilla cuadrada.
- Alinee los orificios de la varilla cuadrada y el mango.
- Inserte el tornillo desde el mango y apriete.
- Coloque el resorte corto sobre la varilla cuadrada y empuja contra el mango hasta que la varilla cuadrada encaje en la guía de la pieza del mango.

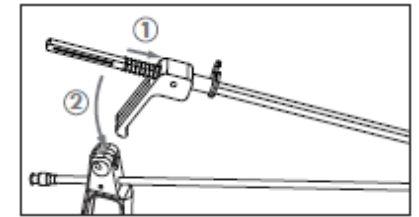


- Inserte el tornillo de sujeción en la pieza del mango y atorníllelo al soporte de apoyo.

**5.2 Desmontaje del instrumento**


- Abra el bloqueo del adaptador y retire el adaptador.

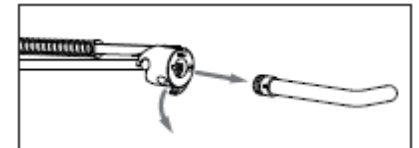


- Suelte el tornillo de sujeción y empuje hacia fuera el soporte del contador.

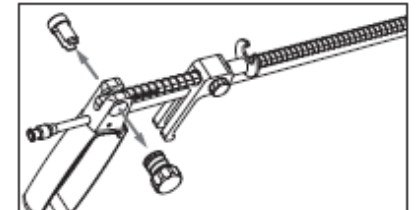


- Afloje los tornillos del mango.

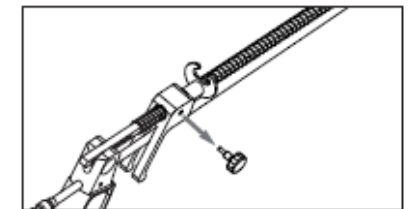

- Empuje el resorte contra el mango y pliegue hacia arriba la varilla cuadrada.

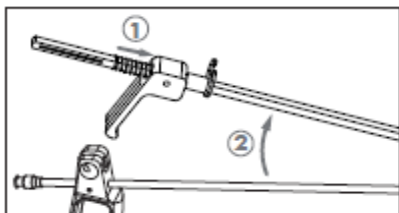

- Retire los resortes, el mango y el deslizador.

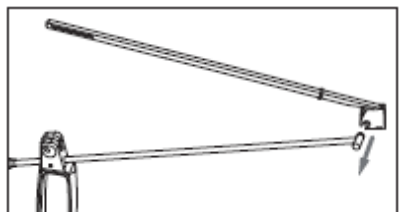

- Retire la junta tórica situada en el extremo del tubo de enjuague.

**Aplicar**  
**ADVERTENCIA**

Riesgo de infección por instrumentos no esterilizados.

- Prepárelo antes de su uso.
- Coloque un adaptador de la longitud necesaria en el cono.
- Si es necesario, conecte la conexión LL a una unidad de irrigación/succión.

**ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones por el terminal roscado en ángulo.

- No sujete el terminal roscado en ángulo al introducirlo en el cuello uterino.
- Introduzca el instrumento en el cuello uterino.
- Afloje ligeramente el tornillo de sujeción.
- El adaptador se puede mover de lado a lado.
- Coloque el adaptador como sea necesario utilizando el mango.
- Coloque el útero.
- Introduzca las pinzas con gancho.
- Desplace el deslizador hasta el reposapulgares de la pinza en gancho y enganche el reposapulgares.
- Realice el procedimiento.

**Preparación**

- El instrumento debe desmontarse antes de su preparación.

Véase la sección «5.2 Desmontaje del instrumento». *Tenga en cuenta también nuestra información general sobre cuidado, mantenimiento y limpieza DOK#0301!*

**Almacenamiento**

Consulte las instrucciones de preparación separadas DOK#0301 para obtener información detallada sobre el almacenamiento y el cuidado.

**Eliminación**

Las materias primas valiosas pueden reutilizarse si se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente.



Elimine el producto de forma respetuosa con el medio ambiente siguiendo las directrices del hospital.

**Símbolos y explicaciones**

	¡Precaución! El incumplimiento de las advertencias y precauciones puede provocar la muerte o lesiones graves.
	Siga las instrucciones de uso.
<b>REF</b>	Número de pedido
	Número de lote
	Fabricante:
	Marca CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Alemania  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com