

**cKohdun manipulaattori**

**Tuotenumerot**

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

**Turvallisuus ja vastuu**

Ennen laitteen käyttöä

- käyttöohjeet huolellisesti läpi ja noudata niitä.
- Säilytä ohjeet näkyvällä paikalla myöhempää käyttöä varten.

RUDOLF Medical ei ota vastuuta virheellisen käytön, valmistelun tai hoidon seurauksista. Näissä tapauksissa takuu raukeaa.

**Käyttöaihe**

Laitte on tarkoitettu gynekologiseen käyttöön ja se asetetaan emättimeen. Sitä käytetään kohdun asemoimiseen seuraavaa toimenpidettä varten.

**Vain lääkärin määräyksestä**

Vain pätevien asiantuntijoiden käytettäväksi.

**Vasta-aiheet**

Välinettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi keskushermostossa tai verenkiertoelimistössä.

**Infektioriski**

- Valmistele ennen käyttöä.
- Valmistele instrumentti ennen sen palauttamista valmistajalle.


**Loukkaantumisaara**

- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita tai muiden valmistajien yhteensopivia lisävarusteita.
- Älä käytä tai korjaa vaurioituneita instrumentteja.

**Toimitus sisältää**

- Tarkista kaikki osat pakkauksen avaamisen jälkeen varmistaaksesi, ettei kuljetusvaurioita ole.
- Jos tuotteessa on vaurioita, ota yhteyttä valmistajaan.
- Sarjaan kuuluu kuusi sovitinta, joista jokaisella on erilainen halkaisija, pituus tai muoto.

- 1 4-neliöinen tanko
- 2 Sovitin
- 3 Sovitinlukko
- 4 Kartio
- 5 Huuhteluputki
- 6 Kahva
- 7 Kahvan osa
- 8 LL-liitos
- 9 Laskurin pidike
- 10 Kiinnitysruuvi
- 11 Liukukappale

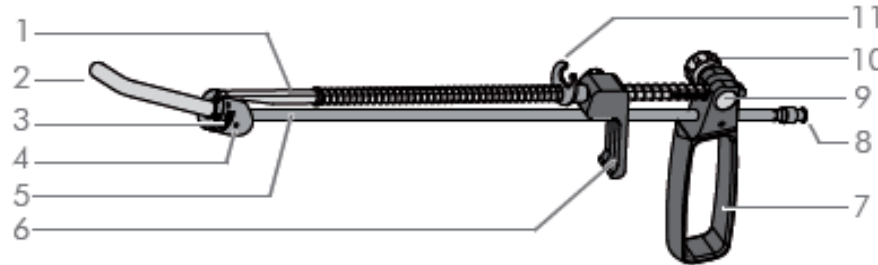

**Tuotekuvaus**

Kääntyvällä kartiolla varustetun sovitimen avulla kohtu voidaan asettaa toimenpiteen kannalta oikeaan asentoon. Tätä kartiota voidaan liikuttaa ylös ja alas tämän sovitimen avulla.

Rei'itetyillä sovitimilla voidaan myös suorittaa imu ja huuhtelu toimenpiteen aikana.

**Tekniset tiedot**

**Säilytys- ja kuljetusolosuhteet**


Kuvaus	Arvo
Lämpötila	-30 °C – +40 °C
Suhteellinen kosteus	≤90 %
Ilmanpaine	700–1200 hPa

Tuotteen käyttöikä  
≤1000 sykliä ja ≤2 vuotta

**Laitteen kokoaminen ja purkaminen**


**5.1 Laitteen kokoaminen**

- Sovittimen koko määritetään suoraan ennen leikkausta.
- Asenna O-rengas huuhteluputken päähän.
- Työnnä huuhteluputki kartioon ja taita se ylös.

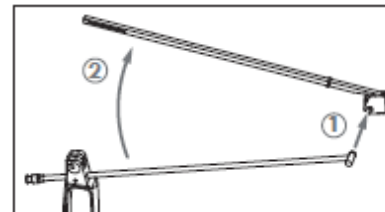

- Asenna pitkä jousi, sitten liukukappale ja lopuksi kahva neliömäiseen tankoon.
- Kohdista neliömäisen tangon ja kahvan reiät.
- Aseta ruuvi kahvasta ja kiristä.
- Aseta lyhyt jousi neliömäisen tangon päälle ja paina kahvaa vasten, kunnes neliömäinen tanko asettuu kahvan ohjaimeen.


**Kohdun manipulaattori**

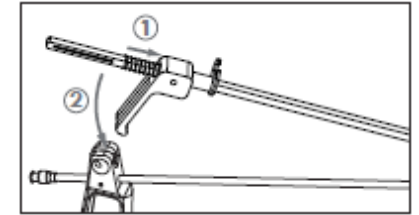


- Aseta kiinnitysruuvi kahvaan ja kierrä se vastapidikkeeseen.

**5.2 Laitteen purkaminen**


- Avaa sovitimen lukitus ja irrota sovitin.

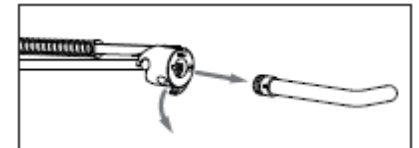


- Löysää kiinnitysruuvia ja työnnä vastapidike ulos.

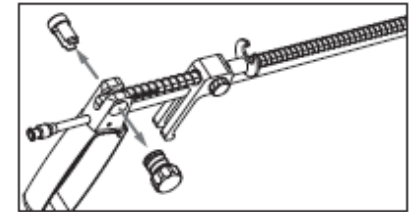


- Löysää kahvan ruuvit.

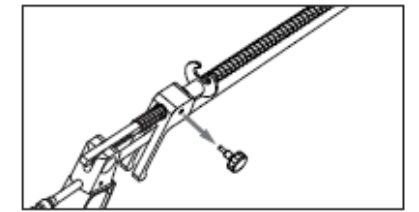

- Työnnä jousi kahvaa vasten ja taita neliömäinen tanko ylös.

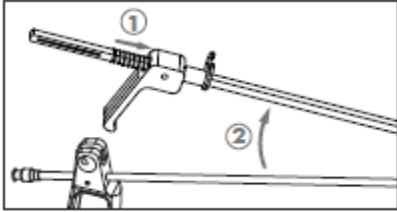

- Poista jouset, kahva ja liukukappale.

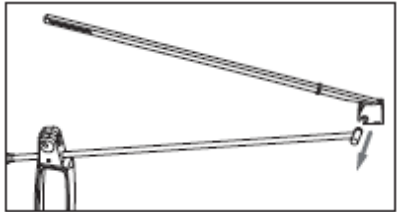

- Poista huuhteluputken päässä oleva O-renkas.

**Käyttö**

**VAROITUS**

Epästeriilien instrumenttien aiheuttama infektoriski.

- Valmistele ennen käyttöä.
- Asenna tarvittavan pituinen sovitin kartioon.
- Liitä tarvittaessa LL-liitin huuhtelu-/imuyksikköön.

**VAROITUS**

Vamman vaara kulmikkaasta kierteitetystä pääteosasta.

- Älä pidä kierteitettyä päätettä vinossa asennettaessa sitä kohdunkaulaan.
- Työnnä instrumentti kohdunkaulaan.
- Löysää kiinnitysruuvia hieman.
- Sovitinta voidaan liikuttaa sivulta toiselle.
- Aseta sovitin haluttuun asentoon kahvan avulla.
- Aseta kohtu paikalleen.
- Vie koukkupihdit paikalleen.
- Siirrä liukukappale koukullisen pihdin peukalotukeen ja kiinnitä se peukalotukeen.
- Suorita toimenpide.

**Valmistelu**

- Instrumentti on purettava ennen valmistelua.

Katso kohta "5.2 Instrumentin purkaminen".

*Noudata myös yleisiä ohjeitamme*

*hoidosta, huollosta ja puhdistuksesta DOK#0301!*

**Säilytys**

*Katso erilliset valmisteluohjeet DOK#0301 saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja säilytyksestä ja hoidosta.*

**Hävittäminen**

Arvokkaat raaka-aineet voidaan käyttää uudelleen, jos ne hävitetään ympäristöä säästäen.



Hävitä tuote ympäristöystävällisesti sairaalan ohjeiden mukaisesti.

**Symbolit ja selitykset**

	Varoitus! Varoitusten ja varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
	Noudata käyttöohjeita!
<b>REF</b>	Tilausnumero
	Eränumero
	Valmistaja:
	CE-merkintä

