

D0302 / Rév. C / DCR01769

**Manipulateur utérin**

**Références**

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

**Sécurité et responsabilité**

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez

- lire et suivre le mode d'emploi.
- Conservez-le à un endroit bien visible pour une utilisation ultérieure.

RUDOLF Medical décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une utilisation, d'une préparation ou d'un entretien incorrects. Dans ces cas, la garantie est annulée.

**Indication**

Cet instrument est destiné à un usage gynécologique et s'introduit par voie vaginale. Il sert à positionner l'utérus en vue de l'intervention suivante.

**Sur ordonnance uniquement**

À utiliser uniquement par des spécialistes qualifiés.

**Contre-indication**

Cet instrument n'est pas destiné à être utilisé sur le système nerveux central ou le système circulatoire.

**Risque d'infection**

- Préparez l'instrument avant utilisation.
- Préparez l'instrument avant de le renvoyer au fabricant.


**Risque de blessure**

- N'utilisez que des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles provenant d'autres fabricants.
- N'utilisez pas et ne réparez pas les instruments endommagés.

**Contenu de la livraison**

- Vérifiez toutes les pièces après le déballage pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages dus au transport.
- En cas de dommage, veuillez contacter le fabricant.
- Le kit comprend six adaptateurs, chacun avec un diamètre, une longueur ou une conception différente.

- 1 Tige carrée de 4
- 2 Adaptateur
- 3 Verrouillage de l'adaptateur
- 4 Cône
- 5 Tube de rinçage
- 6 Poignée
- 7 Pièce de poignée
- 8 Raccordement LL
- 9 Support de comptoir
- 10 Vis de serrage
- 11 Curseur

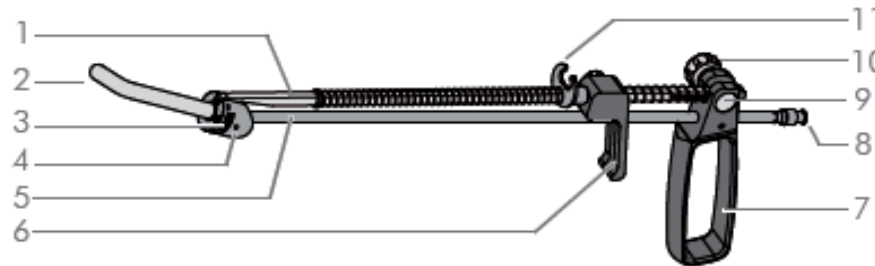

**Description du produit**

Un adaptateur muni d'un cône pivotant permet de positionner l'utérus pour l'intervention. Ce cône peut être déplacé vers le haut et vers le bas à l'aide de cet adaptateur.

Les adaptateurs perforés permettent également d'effectuer une aspiration et un rinçage pendant l'intervention.

**Caractéristiques techniques**

**Conditions de stockage et de transport**


Description	Valeur
Température	-30 °C à +40 °C
Humidité relative	≤ 90 %
Pression atmosphérique	700–1200 hPa

Durée de vie du produit  
≤ 1 000 cycles et ≤ 2 ans


**Montage et démontage de l'instrument**

**5.1 Montage de l'instrument**

- La taille de l'adaptateur est déterminée directement avant l'intervention.
- Placez le joint torique à l'extrémité du tube de rinçage.
- Insérez le tube de rinçage dans le cône et repliez-le.

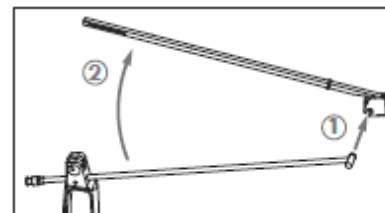


- Placez le long ressort, puis le curseur et enfin la poignée sur la tige carrée.
- Alignez les trous de la tige carrée et de la poignée.
- Insérez la vis depuis la poignée et serrez-la.
- Placez le ressort court sur la tige carrée et appuyez contre la poignée jusqu'à ce que la tige carrée s'insère dans le guide de la poignée.

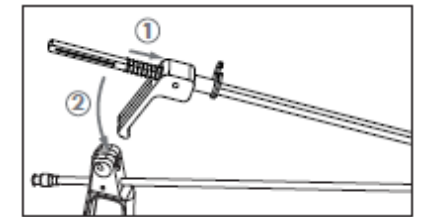


- Insérez la vis de serrage dans la poignée et vissez-la au contre-support.

**5.2 Démontage de l'instrument**


- Ouvrez le verrou de l'adaptateur et retirez l'adaptateur.

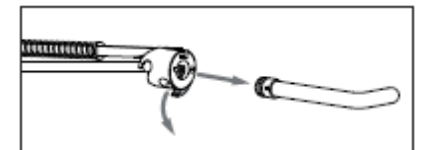


- Desserrez la vis de serrage et retirez le contre-support.

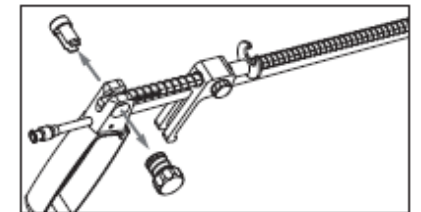


- Desserrez les vis de la poignée.

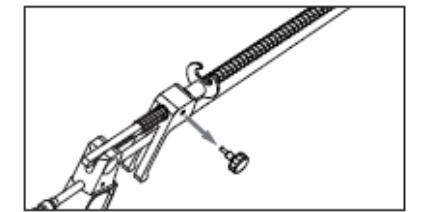

- Poussez le ressort contre la poignée et relevez la tige carrée.

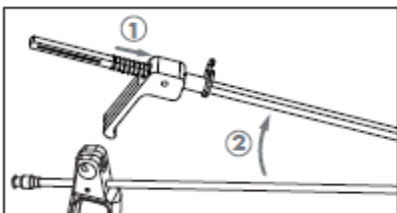

- Retirez les ressorts, la poignée et le curseur.

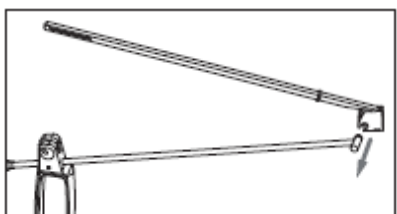

- Retirez le joint torique situé à l'extrémité du tube de rinçage.

**Appliquer**

**AVERTISSEMENT**

Risque d'infection lié à des instruments non stériles.

- Préparez-le avant utilisation.
- Insérez un adaptateur de la longueur requise dans le cône.
- Si nécessaire, raccorder le raccord LL à une unité de rinçage/aspiration.

**AVERTISSEMENT**

Risque de blessure lié à l'embout fileté coudé.

- Ne pas tenir l'embout fileté en position inclinée lors de son introduction dans le col de l'utérus.
- Insérez l'instrument dans le col de l'utérus.
- Desserrez légèrement la vis de serrage.
- L'adaptateur peut être déplacé d'un côté à l'autre.
- Positionnez l'adaptateur comme souhaité à l'aide de la poignée.
- Positionnez l'utérus.
- Introduisez la pince à crochet.
- Déplacez le curseur vers le repose-pouce de la pince à crochet et accrochez le repose-pouce.
- Effectuez l'intervention.

**Préparation**

- L'instrument doit être démonté avant la préparation.

Voir la section « 5.2 Démontage de l'instrument ».  
Veuillez également respecter nos informations générales sur l'entretien, maintenance et nettoyage DOK#0301 !

**Stockage**

Veuillez vous reporter aux instructions de préparation séparées DOK#0301 pour obtenir des informations détaillées sur le stockage et l'entretien.

**Élimination**

Les matières premières de valeur peuvent être réutilisées si elles sont éliminées de manière écologique.



Éliminez le produit de manière écologique en suivant les directives de l'hôpital.

**Symboles et explications**

	Attention ! Le non-respect des avertissements et des précautions peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	Suivez le mode d'emploi !
<b>REF</b>	Numéro de commande
	Numéro de lot
	Fabricant :
	Marquage CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Allemagne  
Tél. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com