

Legstýring

Vörunúmer

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Öryggi og ábyrgð

- Áður en tækið er notað, vinsamlegast
- lestu og fylgdu leiðbeiningunum um notkun.
- Geymið þannig að auðvelt sé að finna hann síðar.

RUDOLF Medical ber enga ábyrgð á afleiðingum rangrar notkunar, undirbúnings og umönnunar. Í slíkum tilvikum fellur ábyrgðin niður.

Viðeigandi notkun

Tækið er ætlað til notkunar í kvennasjúkdómafræði og er sett inn í leggöng. Það er notað til að staðsetja legið fyrir eftirtalda aðgerð.

Aðeins ávísunarlyf

Aðeins ætlað til notkunar af hæfum sérfræðingum.

Móta-bending

Tækið er ekki ætlað til notkunar á miðtaugakerfinu eða blóðrásarkerfinu.

Sýkingarhætta

- Undirbúa fyrir notkun.
- Undirbúa tækið áður en það er sent aftur til framleiðanda.


Áhætta á meiðslum

- Notaðu eingöngu upprunalega aukahluti eða samhæfa aukahluti frá öðrum framleiðendum.
- Ekki nota né gera við skemmd tæki.

Afhendingarsvið

- Skoðið alla hluti til að ganga úr skugga um að engin flutningsskemmd sé eftir að hafa pakkað upp.
- Ef skemmdir eru, vinsamlegast hafðu samband við framleiðandann.
- Sex millistykki fylgja settinu, hvert með mismunandi þvermál, lengd eða hönnun.

- 1 4-Fjórhyrnd stangir
- 2 Miðlari
- 3 Læsing á millistykki
- 4 Keila
- 5 Skola-rör
- 6 Hönd
- 7 Handfangshluti
- 8 LL tenging
- 9 Vöruborðshaldari
- 10 Festiskruða
- 11 Sleði

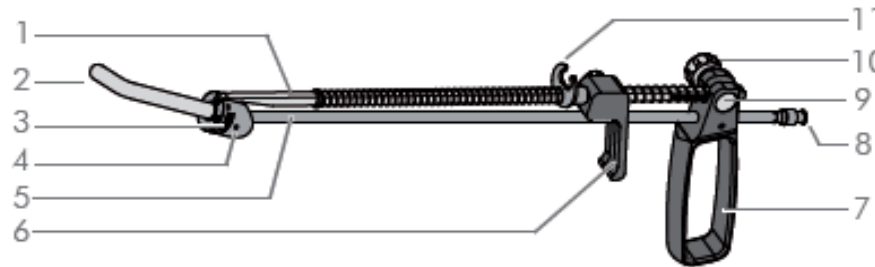

Vörulýsing

Aðlögunartæki með snúningskeilu gerir kleift að staðsetja legið fyrir aðgerðina. Þessa keilu er hægt að færa upp og niður með þessu tæki.

Aðlög með götum gera einnig kleift að framkvæma sogun og skolon á meðan á aðgerðinni stendur.

Tæknilegir gögn

Geymslu- og flutningsskilyrði


Lýsing	Gildi
Hitastig	-30°C – +40°C
Hlutfallsleg raki	≤90 %
Loftþrýstingur	700–1200 hPa

Lífserill vöru
≤1000 hringrásir og ≤2 ár


Samsetning og sundurliðun mælitækis

5.1 Samsetning mælisins

- Stærð millistykkisins er ákveðin beint fyrir aðgerð.
- Settu O-hringinn á endann á skolrórinu.
- Settu skolpípuna í þrængingu og brjóttu upp.

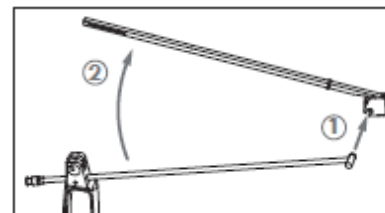


- Settu langa gorminn, síðan renninginn og að lokum handfangið á ferningsstöngina.
- Réttu holurnar í ferningslaga stanginni og handfanginu.
- Settu skrúfuna úr handfanginu og herðið hana.
- Settu stutta gorminn yfir ferningsstangann og ýttu honum að handfanginu þar til ferningsstanginn fer inn í leiðarluta handfangsins.

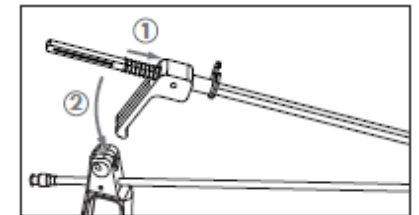


- Settu festiskruuna í handfangshlutinn og skrúfaðu hana í mótstykkið.

5.2 Sundrun tækisins


- Opnaðu festingu millistykkisins og fjarlægðu millistykkið.

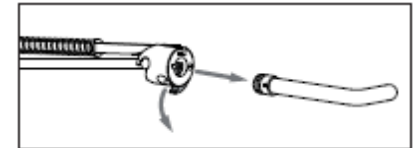


- Losaðu festiskruuna og ýttu mælikerfinu út.

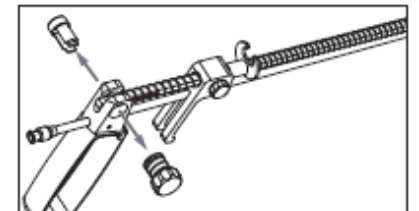


- Losaðu skrúfurnar á handfanginu.

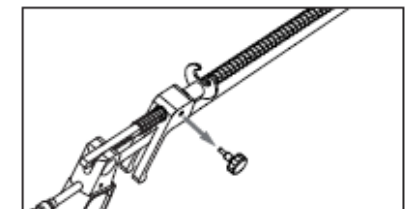

- Ýttu gorminum að handfanginu og brjóttu ferningslaga stangann upp.

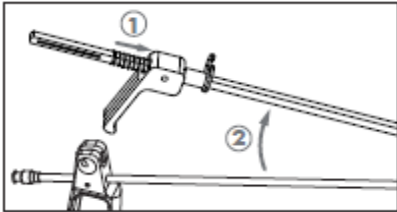

- Taktu út fjöðurnar, handfangið og renna.

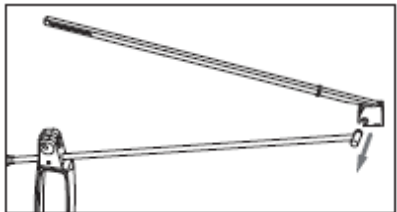

- Fjarlægjið O-hringinn á endanum á skolrörunu.

Beittu

VIÐVÖRUN

Hætta á sýkingu vegna ósteríflra tækja.

- Undirbúa fyrir notkun.
- Settu aðlaga af nauðsynlegri lengd í taperinn.
- Ef þörf krefur, tengið LL-tenginguna við skola-/sogeiningu.

VIÐVÖRUN

Áhætta á meiðslum vegna hallalegs þráðenda.

- Ekki halda snúningsenda á ská þegar hann er settur inn í leghálsinn.
- Settu tækið inn í leghálsinn.
- Losaðu festiskruuna aðeins.
- Aðlaga má færa til hliðar.
- Stilla millistykkið eftir þörfum með handfanginu.
- Stilla legið.
- Settu inn krókotta tangana.
- Færðu rennarann að þumbaranum á krókotta gripinu og festu krókinn í þumbarann.
- Framkvæmdu aðgerðina.

Undirbúningur

- Tækið þarf að taka sundur áður en undirbúningur hefst.

Sjá kafla "5.2 Sundrun tækisins".

Vinsamlegast fylgdu einnig almennum upplýsingum okkar um umönnun, viðhald og hreinsun DOK#0301!

Geymsla

Vinsamlegast vísaðu í sérstakar undirbúningsleiðbeiningar DOK#0301 fyrir nánari upplýsingar um geymslu og umönnun.

Útfelling

Verðmæt hráefni má endurnýta ef þeim er fargað á umhverfisvænan hátt.



Farga vörinni á umhverfisvænan hátt í samræmi við leiðbeiningar sjúkrahússins.

Tákn og skýringar

	Varúð! Vanræksla á viðvörnum og varúðarráðstöfunum getur leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.
	Fylgdu leiðbeiningunum!
REF	Þöntunarnúmer
	Lotunúmer
	Framleiðandi:
	CE-merki



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Þýskaland
Símar +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com