

D0302 / Rev.C / DCR01769

Manipolatore uterino

Codici articolo

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Sicurezza e responsabilità

Prima di utilizzare lo strumento,

- leggere e seguire le istruzioni per l'uso.
- Conservarle in un luogo ben visibile per un uso futuro.

RUDOLF Medical non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di un uso, una preparazione e una manutenzione non corretti. In questi casi, la garanzia decade.

Indicazioni

Lo strumento è destinato all'uso in ginecologia e viene introdotto per via vaginale. Viene utilizzato per posizionare l'utero in vista della procedura successiva.

Solo su prescrizione medica

Da utilizzare esclusivamente da parte di specialisti qualificati.

Controindicazioni

Lo strumento non è destinato all'uso sul sistema nervoso centrale o circolatorio.

Rischio di infezione

- Preparare prima dell'uso.
- Preparare lo strumento prima di restituirlo al produttore.


Rischio di lesioni

- Utilizzare esclusivamente accessori originali o accessori compatibili di altre aziende.
- Non utilizzare né riparare strumenti danneggiati.

Contenuto della confezione

- Dopo aver disimballato il prodotto, controllare tutte le parti per assicurarsi che non vi siano danni da trasporto.
- In caso di danni, contattare il produttore.
- Il set include sei adattatori, ciascuno con diametro, lunghezza o design diversi.

- 1 asta quadrata da 4
- 2 Adattatore
- 3 Blocco adattatore
- 4 Cono
- 5 Tubo di risciacquo
- 6 Manico
- 7 Pezzo della maniglia
- 8 Collegamento LL
- 9 Supporto per bancone
- 10 Vite di serraggio
- 11 Cursore

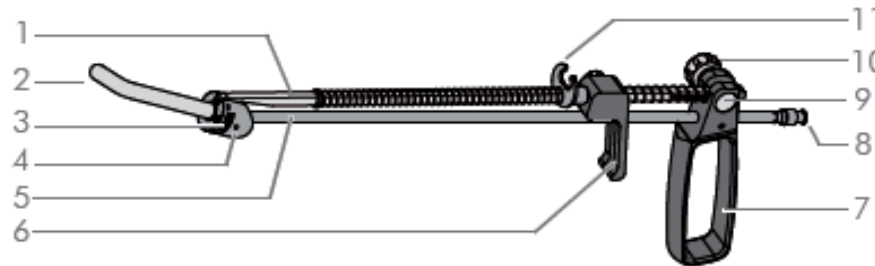

Descrizione del prodotto

Un adattatore con un cono girevole consente di posizionare l'utero per la procedura. Questo cono può essere spostato verso l'alto e verso il basso utilizzando l'adattatore.

Gli adattatori con fori consentono inoltre di effettuare l'aspirazione e il lavaggio durante la procedura.

Dati tecnici

Condizioni di conservazione e trasporto


Descrizione	Valore
Temperatura	-30 °C – +40 °C
Umidità relativa	≤90 %
Pressione atmosferica	700–1200 hPa

Durata del prodotto
≤1000 cicli e ≤2 anni


Montaggio e smontaggio dello strumento

5.1 Montaggio dello strumento

- Le dimensioni dell'adattatore vengono stabilite direttamente prima dell'intervento.
- Montare l'O-ring sull'estremità del tubo di lavaggio.
- Inserire il tubo di lavaggio nel cono e ripiegarlo verso l'alto.

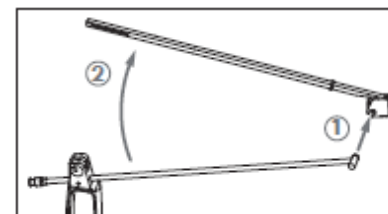


- Montare la molla lunga, poi il cursore e infine l'impugnatura sull'asta quadrata.
- Allineare i fori presenti sull'asta quadrata e sull'impugnatura.
- Inserire la vite dalla maniglia e serrarla.
- Inserire la molla corta sull'asta quadrata e spingere contro la maniglia finché l'asta quadrata non si inserisce nella guida del pezzo della maniglia.

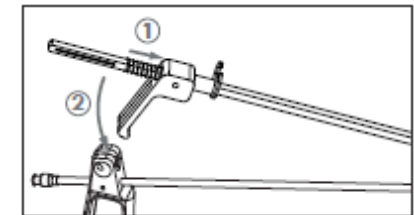


- Inserire la vite di serraggio nell'impugnatura e avvitare al supporto di contrasto.

5.2 Smontaggio dello strumento


- Aprire il blocco dell'adattatore e rimuovere l'adattatore.

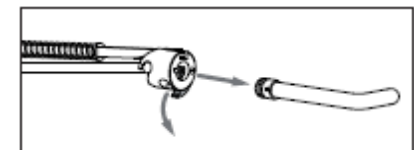


- Allentare la vite di serraggio e spingere fuori il supporto del contatore.

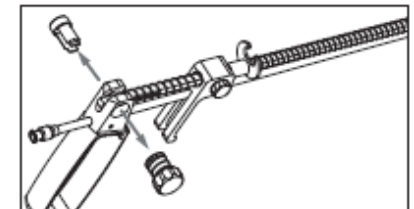


- Allentare le viti sull'impugnatura.

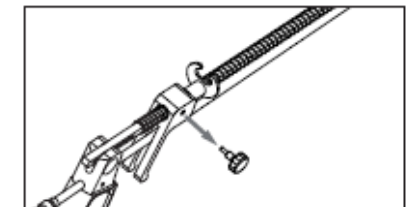

- Spingere la molla contro l'impugnatura e ripiegare l'asta quadrata.

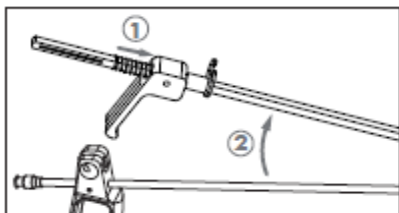

- Rimuovere le molle, l'impugnatura e il cursore.

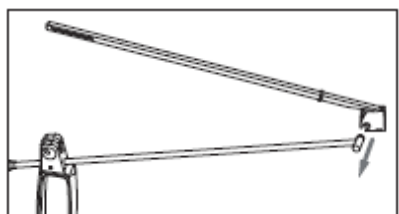

- Rimuovere l'O-ring all'estremità del tubo di risciacquo.

Applicare

AVVERTENZA

Rischio di infezione da strumenti non sterili.

- Preparare prima dell'uso.
- Inserire un adattatore della lunghezza richiesta nel cono.
- Se necessario, collegare il raccordo LL a un'unità di lavaggio/aspirazione.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni causate dal terminale filettato angolato.

- Non tenere il terminale filettato inclinato durante l'introduzione nella cervice.
- Inserire lo strumento nella cervice.
- Allentare leggermente la vite di serraggio.
- L'adattatore può essere spostato da un lato all'altro.
- Posizionare l'adattatore come richiesto utilizzando la maniglia.
- Posizionare l'utero.
- Introdurre la pinza ad uncino.
- Spostare il cursore verso il poggiapollice della pinza ad uncino e agganciare il poggiapollice.
- Eseguire la procedura.

Preparazione

- Lo strumento deve essere smontato prima della preparazione.

Vedere la sezione "5.2 Smontaggio dello strumento".

Si prega inoltre di osservare le nostre informazioni generali su cura, manutenzione e pulizia DOK#0301!

Conservazione

Per informazioni dettagliate sulla conservazione e la cura, fare riferimento alle istruzioni di preparazione separate DOK#0301.

Smaltimento

Le preziose materie prime possono essere riutilizzate se smaltite in modo ecocompatibile.



Smaltire il prodotto in modo ecocompatibile seguendo le linee guida dell'ospedale.

Simboli e spiegazioni

	Attenzione! La mancata osservanza delle avvertenze e delle precauzioni può causare la morte o gravi lesioni.
	Seguire le istruzioni per l'uso!
REF	Numero d'ordine
LOT	Numero di lotto
	Produttore:
CE	Marchio CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germania
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com