

### Gimdos manipulatorius

#### Gimdos manipulatorius

#### Prekės numeriai

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

#### Sauga ir atsakomybė

Prieš naudodami prietaisą, prašome

- perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijų.
- Laikykite jas gerai matomoje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti vėliau.

„RUDOLF MEDICAL“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamo naudojimo, paruošimo ir priežiūros pasekmes. Tokiais atvejais garantija netenka galios.

#### Indikacijos

Prietaisas skirtas naudoti ginekologijoje ir įvedamas į makštį. Jis naudojamas gimdos padėčiai nustatyti prieš atliekant tolesnę procedūrą.

#### Tik pagal receptą

Naudoti tik kvalifikuotiems specialistams.

#### Kontraindikacijos

Prietaisas nėra skirtas naudoti centrinei nervų ar kraujotakos sistemai.

#### Infekcijos rizika

- Prieš naudojimą paruošti.
- Prieš grąžinant gamintojui, paruoškite prietaisą.


#### Sužalojimo pavojus

- Naudokite tik originalius priedus arba suderinamus kitų gamintojų priedus.
- Nenaudokite ir neremontuokite pažeistų prietaisų.

#### Pristatymo apimtis

- Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo metu padarytų pažeidimų.
- Jei yra pažeidimų, kreipkitės į gamintoją.
- Komplekte yra šeši adapteriai, kurių kiekvieno skersmuo, ilgis ar konstrukcija skiriasi.

- 1 4-Kvadratinė strypas
- 2 Adapteris
- 3 Adapterio fiksatorius
- 4 Kūgis
- 5 Praskaldymo vamzdelis
- 6 Rankena
- 7 Rankenos dalis
- 8 LL jungtis
- 9 Skaitiklio laikiklis
- 10 Fiksavimo varžtas
- 11 Slydimo elementas

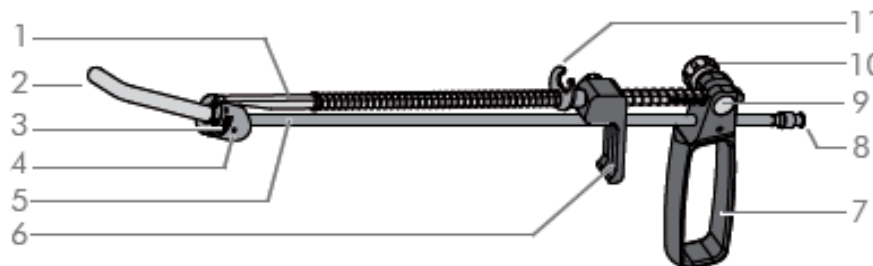

#### Produkto aprašymas

Adapteris su pasukamu kūgiu leidžia nustatyti gimdos padėtį procedūrai. Šį kūgį galima judinti aukštyn ir žemyn naudojant šį adapterį.

Adapteriai su perforacijomis taip pat leidžia procedūros metu atlikti siurbimą ir skalavimą.

#### Techniniai duomenys

##### Laikymo ir transportavimo sąlygos


Aprašymas	Vertė
Temperatūra	-30 °C – +40 °C
Santykinis drėgnumas	≤90 %
Atmosferos slėgis	700–1200 hPa

Produkto tarnavimo laikas  
≤1000 ciklų ir ≤2 metai

#### Prietaiso surinkimas ir išardymas

##### 5.1 Prietaiso surinkimas


- Adapterio dydis nustatomas tiesiogiai prieš operaciją.
- Uždenkite O-žiedą ant skalavimo vamzdelio galo.
- Įkiškite skalavimo vamzdelį į kūginę dalį ir sulenkite.

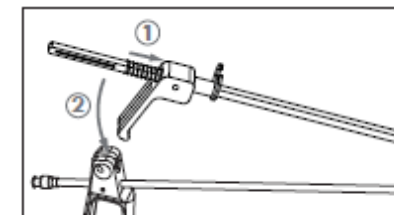


- Įkiškite fiksavimo varžtą į rankenos dalį ir prisukite prie atraminio laikiklio.

##### 5.2 Prietaiso išardymas


- Atidarykite adapterio fiksatorių ir nuimkite adapterį.

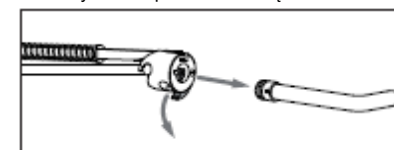


- Atlaisvinkite fiksavimo varžtą ir išstumkite laikiklį.

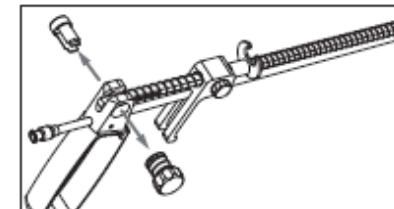


- Atlaisvinkite rankenos varžtus.

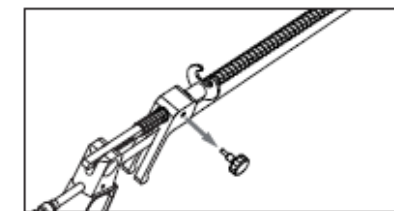

- Paspauskite spyruoklę prie rankenos ir sulenkite stačiakampę strypą.

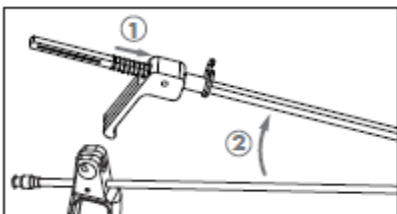

- Nuimkite spyruokles, rankeną ir slankiklį.

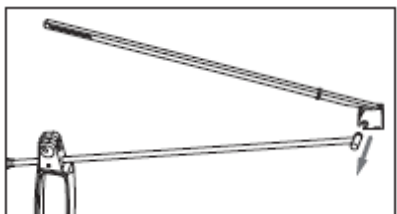

- Nuimkite O-žiedą nuo skalavimo vamzdžio galo.

#### **Taikymas** **ISPĖJIMAS**

Infekcijos pavojus dėl nesterilių instrumentų.

- Paruoškite prieš naudojimą.
- Įdėkite reikiamo ilgio adapterį į kūginę jungtį.
- Jei reikia, prijunkite LL jungtį prie skalavimo/siurbimo įrenginio.

#### **ISPĖJIMAS**

Sužeidimo pavojus dėl kampuoto srieginio galo.

- Įvedant į gimdos kaklelį, nelaikykite srieginio galo pasvirusiu.
- Įveskite instrumentą į gimdos kaklelį.
- Siek tiek atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
- Adapterį galima judinti iš vienos pusės į kitą.
- Naudodami rankenėlę, nustatykite adapterio padėtį pagal poreikį.
- Nustatykite gimdos padėtį.
- Įveskite kablukines žnyples.
- Pajudinkite slankiklį link kablų žnyplių nykščio atramos ir užkabinkite nykščio atramą.
- Atlikite procedūrą.

#### **Paruošimas**

- Prieš paruošimą instrumentą reikia išardyti.

Žr. skyrių „5.2 Prietaiso išardymas“.

Taip pat prašome laikytis mūsų bendrosios informacijos apie priežiūrą, techninę priežiūrą ir valymą DOK#0301!

#### **Laikymas**

Išsamią informaciją apie laikymą ir priežiūrą rasite atskirose paruošimo instrukcijose DOK#0301.

#### **Šalinimas**

Vertingos žaliavos gali būti pakartotinai panaudotos, jei šalinamos aplinkai nekenkiant.



Šį produktą šalinama aplinkai nekenkiant, laikantis ligoninės gairių.

#### **Simboliai ir paaiškinimai**

	Įspėjimas! Nesilaikant įspėjimų ir atsargumo priemonių, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.
	Laikykitės naudojimo instrukcijų!
<b>REF</b>	Užsakymo numeris
	Partijos numeris
	Gamintojas:
	CE ženklas



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Vokietija  
Tel. +49 7463 9956-0  
Faksas +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com