

Dzemes manipulators

Preču numuri

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Drošība un atbildība

Pirms instrumenta lietošanas, lūdzu

- izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas.
- Saglabājiet to redzamā vietā turpmākai lietošanai.

RUDOLF Medical neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās nepareizas lietošanas, sagatavošanas vai kopšanas dēļ. Šādos gadījumos garantija zaudē spēku.

Indikācijas

Instrumenti ir paredzēti lietošanai ginekoloģijā un tiek ievadīti maksī. To izmanto, lai novietotu dzemdi turpmākajai procedūrai.

Tikai pēc ārsta norādījuma

Lietot tikai kvalificētiem speciālistiem.

Kontrindikācijas

Instrumentu nav paredzēts lietot uz centrālās nervu sistēmas vai asinsrites sistēmas.

Infekcijas risks

- Sagatavojiet pirms lietošanas.
- Sagatavojiet instrumentu pirms nosūtīšanas atpakaļ ražotājam.


Traumas risks

- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus vai citu ražotāju saderīgos piederumus.
- Nelietojiet un nelabojiet bojātus instrumentus.

Piegādes apjoms

- Pēc izpakošanas pārbaudiet visas detaļas, lai pārliecinātos, ka nav transportēšanas bojājumu.
- Ja ir bojājumi, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.
- Komplektā ir iekļauti seši adapteri, katram no tiem ir atšķirīgs diametrs, garums vai dizains.

- 1 4-Kvadrātveida stienis
- 2 Adapteris
- 3 Adaptera fiksators
- 4 Konuss
- 5 Skalošanas caurule
- 6 Rokturis
- 7 Rokturis
- 8 LL savienojums
- 9 Liekuma turētājs
- 10 Skavas skrūve
- 11 Slīdnis

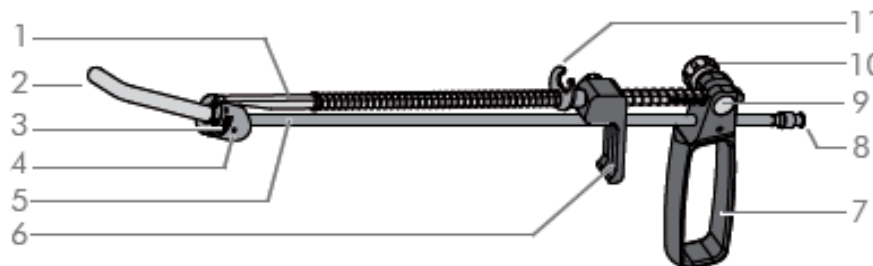

Produkta apraksts

Adapteris ar pagriežamu konusveida uzgali ļauj novietot dzemdi procedūras veikšanai. Šo konusveida uzgali var pārvietot uz augšu un uz leju, izmantojot šo adapteri.

Adapteri ar perforācijām ļauj procedūras laikā veikt arī aspirāciju un skalošanu.

Tehniskie dati

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Apraksts	Vērtība
Temperatūra	-30 °C – +40 °C
Relatīvais mitrums	≤90 %
Atmosfēras spiediens	700–1200 hPa


Produkta kalpošanas ilgums

≤1000 cikli un ≤2 gadi

Instrumenta montāža un demontāža


5.1 Ierīces montāža

- Adaptera izmērs tiek noteikts tieši pirms operācijas.
- Uzlieciet O-gredzenu uz skalošanas caurules gala.
- Ievietojiet skalošanas cauruli konusā un salieciet uz augšu.

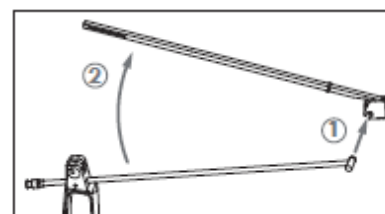

- Uzstādiet garo atsperi, pēc tam slīdni un rokturi uz kvadrātveida stieņa.
- Saskaņojiet caurumus kvadrātveida stienī un rokturī.
- Ievietojiet skrūvi no roktura un pievelciet.
- Uzlieciet īso atsperi uz kvadrātveida stieņa un piespiediet pret rokturi, līdz kvadrātveida stienis ievietojas roktura detaļas vadā.


Dzemes manipulators

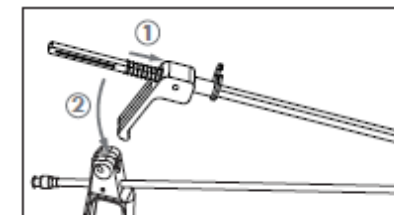


- Ievietojiet skavas skrūvi roktura daļā un pieskrūvējiet to pret turētāju.

5.2 Instrumenta izjaukšana


- Atveriet adaptera fiksatoru un noņemiet adapteri.

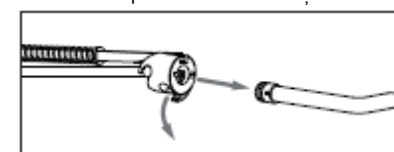


- Atbrīvojiet skavas skrūvi un izspiediet skaitītāja turētāju.

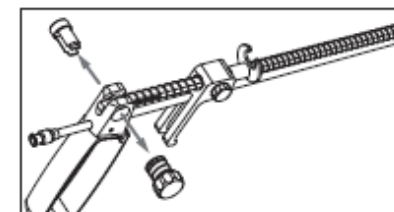


- Atbrīvojiet skrūves uz roktura.

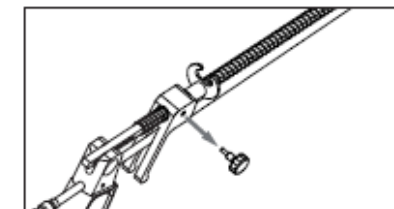

- Piespiediet atsperi pret rokturi un salieciet kvadrātveida stieni.

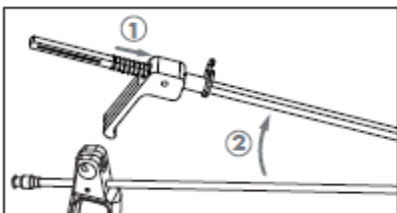

- Noņemiet atsperes, rokturi un slīdni.

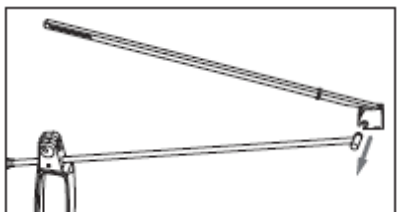

- Noņemiet O-gredzenu skalošanas caurules galā.

Piemērojiēt
BRĪDINĀJUMS

Infekcijas risks no nesteriliem instrumentiem.

- Sagatavojiet pirms lietošanas.
- Ievietojiet konusa daļā vajadzīgā garuma adapteri.
- Ja nepieciešams, savienojiet LL savienojumu ar skalošanas/atsūkšanas iekārtu.

BRĪDINĀJUMS

Traumu risks no leņķveida vītņotā uzgala.

- Ievietojot vītņoto uzgali dzemdē, neturiet to leņķī.
- Ievietojiet instrumentu dzemdes kaklā.
- Nedaudz atbrīvojiet skavas skrūvi.
- Adapteri var pārvietot no vienas puses uz otru.
- Iestādiet adapteri vajadzīgajā pozīcijā, izmantojot rokturi.
- Nostipriniet dzemdi.
- Ievietojiet āķveida pinceti.
- Pārvietojiet slīderi uz āķveida pincetes īkšķa atbalsta un uzkārstiet to uz īkšķa atbalsta.
- Veiciet procedūru.

Sagatavošana

- Pirms sagatavošanas instruments ir jāizjauc.

Skatīt sadaļu „5.2 Instrumenta izjaukšana”.
Lūdzu, ievērojiet arī mūsu vispārīgo informāciju par kopšanu, apkopi un tīrīšanu DOK#0301!

Uzglabāšana

Sīkaku informāciju par uzglabāšanu un kopšanu skatiet atsevišķajās sagatavošanas instrukcijās DOK#0301.

Utilizācija

Vērtīgās izejvielas var tikt atkārtoti izmantotas, ja tās tiek iznīcinātas videi draudzīgā veidā.



Produktu izmetiet videi draudzīgā veidā, ievērojot slimnīcas vadlīnijas.

Simboli un paskaidrojumi

	Uzmanību! Brīdinājumu un piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus.
	Ievērojiet lietošanas instrukcijas!
REF	Pasūtījuma numurs
	Partijas numurs
	Ražotājs:
	CE marķējums



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Vācija
Tālrunis: +49 7463 9956-0
Fakss: +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com