

Baarmoedermanipulator

Artikelnummers

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Veiligheid en verantwoordelijkheid

Lees en volg de gebruiksaanwijzing voordat u het instrument gebruikt

- de gebruiksaanwijzing lezen en opvolgen.
- Bewaar deze op een duidelijk zichtbare plaats voor later gebruik.

RUDOLF Medical aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik, onjuiste voorbereiding en onjuist onderhoud. In deze gevallen vervalt de garantie.

Indicatie

Het instrument is bedoeld voor gebruik in de gynaecologie en wordt vaginaal ingebracht. Het wordt gebruikt om de baarmoeder in de juiste positie te brengen voor de volgende ingreep.

Alleen op recept

Alleen te gebruiken door gekwalificeerde specialisten.

Contra-indicatie

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik op het centrale zenuwstelsel of de bloedsomloop.

Risico op infectie

- Maak het instrument klaar voor gebruik.
- Risico op infectie


Risico op letsel

- Gebruik uitsluitend originele accessoires of compatibele accessoires van andere fabrikanten.
- Gebruik of repareer geen beschadigde instrumenten.

Leveringsomvang

- Controleer alle onderdelen na het uitpakken op transportschade.
- Neem bij schade contact op met de fabrikant.
- De set bevat zes adapters, elk met een andere diameter, lengte of vorm.

- 1 4-Kantstang
- 2 Adapter
- 3 Adaptervergrendeling
- 4 Kegel
- 5 Spoelbuis
- 6 Handgreep
- 7 Handgreep
- 8 LL-aansluiting
- 9 Tafelhouder
- 10 Klembout
- 11 Schuif

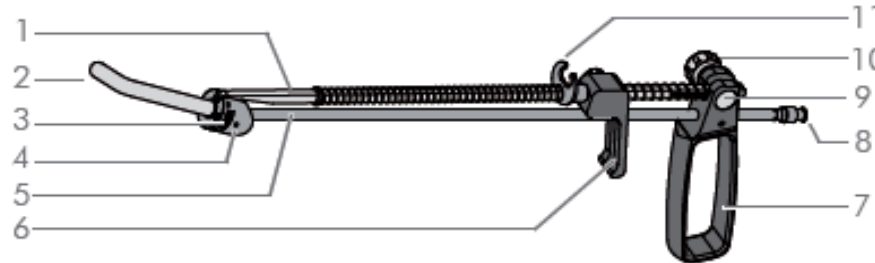

Productbeschrijving

Met een adapter met een draaibare conus kan de baarmoeder in de juiste positie worden gebracht voor de ingreep. Deze conus kan met behulp van deze adapter op en neer worden bewogen.

Adapters met perforaties maken het ook mogelijk om tijdens de ingreep af te zuigen en te spoelen.

Technische gegevens

Opslag- en transportvoorwaarden


Beschrijving	Waarde
Temperatuur	-30 °C – +40 °C
Relatieve vochtigheid	≤90 %
Luchtdruk	700–1200 hPa

Levensduur
≤1000 cycli en ≤2 jaar

Montage en demontage van het instrument


5.1 Montage van het instrument

- De maat van de adapter wordt direct vóór de ingreep bepaald.
- Plaats de O-ring op het uiteinde van de spoelslang.
- Steek de spoelslang in de conus en vouw deze omhoog.

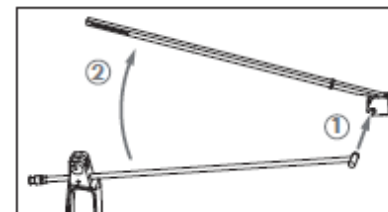

- Plaats de lange veer, vervolgens de schuif en daarna de handgreep op de vierkante staaf.
- Lijn de gaten in de vierkante staaf en de handgreep uit.
- Steek de schroef vanaf de handgreep erin en draai deze vast.
- Plaats de korte veer over de vierkante staaf en druk tegen de handgreep totdat de vierkante staaf in de geleider van het handgreepstuk past.


Baarmoedermanipulator

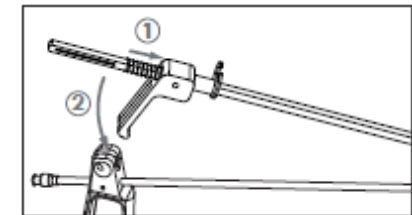


- Steek de klemschroef in het handvat en schroef deze vast aan de tegenhouder.

5.2 Demontage van het instrument


- Open de vergrendeling van de adapter en verwijder de adapter.

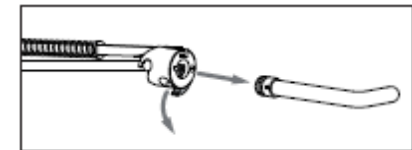


- Maak de klemschroef los en duw de tegenhouder naar buiten.

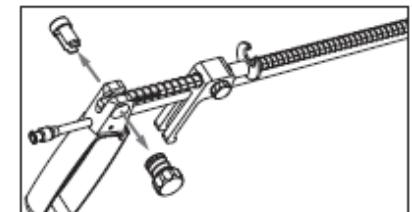


- Draai de schroeven op de handgreep los.

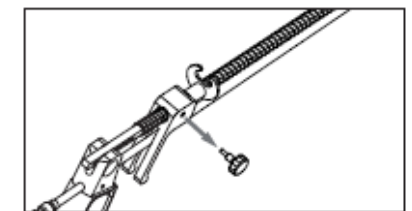

- Druk de veer tegen de handgreep en klap de vierkante staaf omhoog.

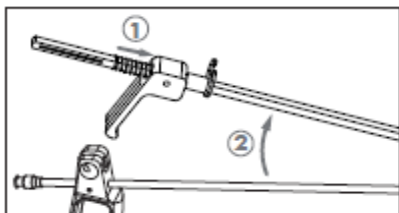

- Verwijder de veren, de handgreep en de schuif.

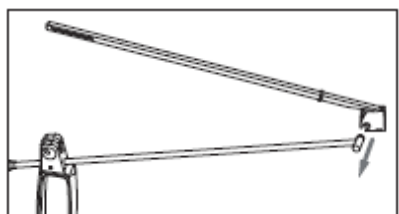

- Verwijder de O-ring aan het uiteinde van de spoel slang.

Toepassen

WAARSCHUWING

Risico op infectie door niet-steriele instrumenten.

- Bereid voor gebruik voor.
- Plaats een adapter van de vereiste lengte in de conus.
- Sluit indien nodig de LL-aansluiting aan op een spoel-/afzuigunit.

WAARSCHUWING

Risico op letsel door de gebogen schroefdraadterminal.

- Houd de schroefdraadaansluiting niet schuin wanneer u deze in de baarmoederhals inbrengt.
- Breng het instrument in de baarmoederhals in.
- Draai de klemschroef iets los.
- De adapter kan heen en weer worden bewogen.
- Plaats de adapter zoals gewenst met behulp van de handgreep.
- Breng de baarmoeder in positie.
- Breng de haakpincet in.
- Verplaats de schuif naar de duimsteun van de haakpincet en haak de duimsteun vast.
- Voer de procedure uit.

Vorbereitung

- Het instrument moet vóór de voorbereiding worden gedemonteerd.

Zie paragraaf "5.2 Demontage van het instrument".

Neem ook onze algemene informatie over verzorging, onderhoud en reiniging DOK#0301!

Opslag

Raadpleeg de aparte bereidingsinstructies DOK#0301 voor gedetailleerde informatie over opslag en onderhoud.

Afvalverwerking

Waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt als ze op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.



Voer het product op milieuvriendelijke wijze af volgens de richtlijnen van het ziekenhuis.

Symbolen en uitleg

	Let op! Het niet opvolgen van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
	Volg de gebruiksaanwijzing!
REF	Bestelnummer
	Productnummer
	Fabrikant:
	CE-markering



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Duitsland
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com