

Livmormanipulator

Livmormanipulator

Varenummer

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Sikkerhet og ansvar

- Før du bruker instrumentet, må du
- les og følg bruksanvisningen.
 - Oppbevar den på et synlig sted for senere bruk.

RUDOLF Medical påtar seg intet ansvar for konsekvensene av feil bruk, klargjøring og vedlikehold. I slike tilfeller bortfaller garantien.

Indikasjon

Instrumentet er beregnet for bruk i gynekologi og føres inn vaginalt. Det brukes til å posisjonere livmoren for den påfølgende prosedyren.

Kun på resept

Skal kun brukes av kvalifiserte spesialister.

Kontraindikasjon

Instrumentet er ikke beregnet for bruk på sentralnervesystemet eller sirkulasjonssystemet.

Risiko for infeksjon

- Forbered før bruk.
- Klargjør instrumentet før det returneres til produsenten.


Risiko for skade

- Bruk kun originalt tilbehør eller kompatibelt tilbehør fra andre produsenter.
- Ikke bruk eller reparer skadede instrumenter.

Leveringsomfang

- Kontroller alle delene for å sikre at det ikke er transportskader etter utpakking.
- Hvis det er skader, vennligst kontakt produsenten.
- Sett inn inneholder seks adaptere, hver med forskjellig diameter, lengde eller utforming.

- 1 4-kantet stang
- 2 Adapter
- 3 Adapterlås
- 4 Kjegle
- 5 Skyllleslange
- 6 Håndtak
- 7 Håndtak
- 8 LL-tilkobling
- 9 Benkeplateholder
- 10 Klemmeskrue
- 11 Glidebryter

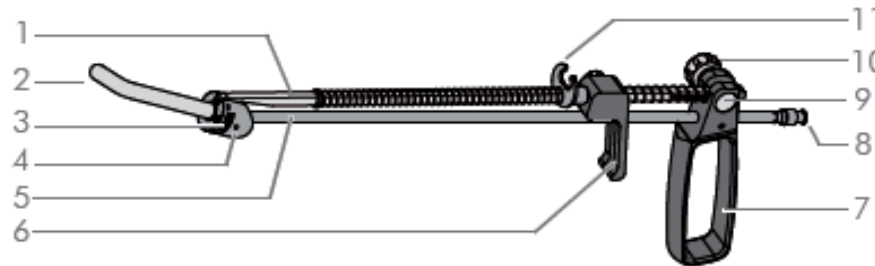

Produktbeskrivelse

En adapter med en svingbar konisk del gjør det mulig å plassere livmoren for inngrepet. Denne koniske delen kan bevegges opp og ned ved hjelp av denne adapteren.

Adaptere med perforeringer gjør det også mulig å utføre suging og skylling under inngrepet.

Tekniske data

Oppbevarings- og transportbetingelser


Beskrivelse	Verdi
Temperatur	-30 °C – +40 °C
Relativ luftfuktighet	≤90 %
Atmosfærisk trykk	700–1200 hPa

Produktlevetid
≤1000 sykluser og ≤2 år


Montering og demontering av instrumentet

5.1 Montering av instrumentet

- Adapterens størrelse fastsettes direkte før operasjonen.
- Sett O-ringen på enden av skylleslangen.
- Sett skylle-slangen inn i konen og brett den opp.

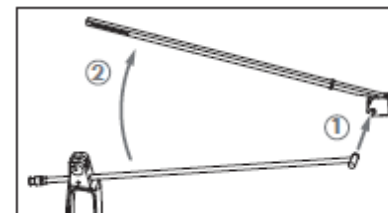


- Sett den lange fjæren, deretter glidebryteren og håndtaket på den firkantede stangen.
- Juster hullene i den firkantede stangen og håndtaket.
- Sett inn skruen fra håndtaket og stram til.
- Sett den korte fjæren over den firkantede stangen og skyv mot håndtaket til den firkantede stangen passer inn i føringen på håndtaket.

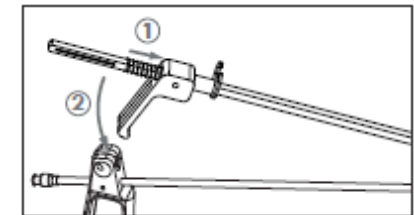


- Sett klemmeskruen inn i håndtaket og skru den fast til motholderen.

5.2 Demontering av instrumentet


- Åpne adapterlåsen og fjern adapteren.

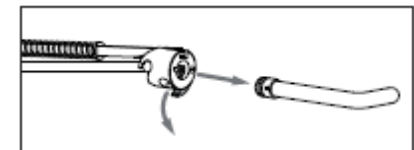


- Løsne klemmeskruen og skyv ut holderen.

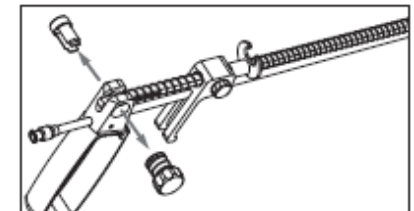


- Løsne skruene på håndtaket.

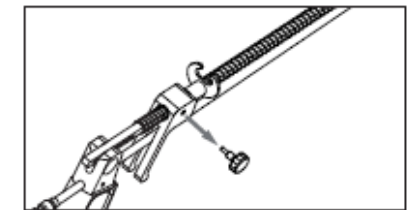

- Skyv fjæren mot håndtaket og brett opp den firkantede stangen.

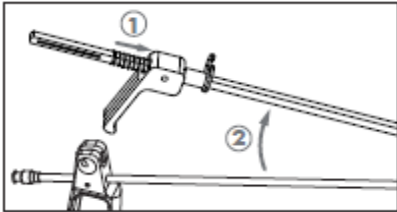

- Fjern fjærene, håndtaket og glidebryteren.

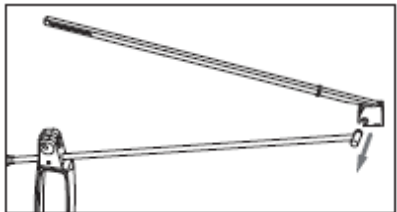

- Fjern O-ringene på enden av skylle-røret.

Påfør

ADVARSEL

Fare for infeksjon fra usterile instrumenter.

- Forbered før bruk.
- Sett en adapter med ønsket lengde inn i konen.
- Koble om nødvendig LL-tilkoblingen til en skylle-/sug-enhet.

ADVARSEL

Fare for skade fra vinklet gjenget terminal.

- Ikke hold den gjengede terminalen i en vinkel når den føres inn i livmorhalsen.
- Før instrumentet inn i livmorhalsen.
- Løsne klemmeskruen litt.
- Adapteren kan beveges fra side til side.
- Plasser adapteren som ønsket ved hjelp av håndtaket.
- Plasser livmoren.
- Før inn den krokete tangen.
- Flytt glidebryteren til tomme støtten på den krokete tangen og krok fast tomme støtten.
- Utfør inngrepet.

Klargjøring

- Instrumentet må demonteres før klargjøring.

Se avsnitt «5.2 Demontering av instrumentet».
Vennligst følg også vår generelle informasjon om pleie, vedlikehold og rengjøring DOK#0301!

Oppbevaring

Se de separate klargjøringsinstruksjonene DOK#0301 for detaljert informasjon om oppbevaring og vedlikehold.

Avhending

Verdifulle råvarer kan gjenbrukes hvis de avhendes på en miljøvennlig måte.



Kast produktet på en miljøvennlig måte i henhold til sykehusets retningslinjer.

Symboler og forklaringer

	Forsiktig! Manglende overholdelse av advarsler og forholdsregler kan føre til død eller alvorlig personskade.
	Følg bruksanvisningen!
REF	Bestillingsnummer
	Partinummer
	Produsent:
	CE-merke



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland
Tlf. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com