

## Manipulator macycy

### Manipulator macycy

#### Numery artykułów

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

#### Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Przed użyciem urządzenia należy

- przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi.
- Należy je przechowywać w widocznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

Firma RUDOLF Medical nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użytkowania, przygotowania i konserwacji. W takich przypadkach gwarancja traci ważność.

#### Wskazania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w ginekologii i wprowadza się je dopochwowo. Służy do ustawienia macycy w odpowiedniej pozycji przed zabiegiem.

#### Wyłącznie na receptę

Przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowanych specjalistów.

#### Przeciwwskazania

Instrument nie jest przeznaczony do stosowania w obrębie ośrodkowego układu nerwowego ani układu krążenia.

#### Ryzyko infekcji

- Przygotować przed użyciem.
- Przygotować instrument przed zwrotem do producenta.


#### Ryzyko urazu

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów innych producentów, które są z nimi kompatybilne.
- Nie używać ani nie naprawiać uszkodzonych przyrządów.

#### Zakres dostawy

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych.
- W przypadku uszkodzeń prosimy o kontakt z producentem.
- W zestawie znajduje się sześć adapterów, każdy o innej średnicy, długości lub konstrukcji.

- 1 Pręt 4-kątny
- 2 Przelotka
- 3 Zatrask adaptera
- 4 Stożek
- 5 Rurka do płukania
- 6 Uchwyt
- 7 Element uchwyty
- 8 Połączenie LL
- 9 Uchwyt blatu
- 10 Śruba zaciskowa
- 11 Suwak

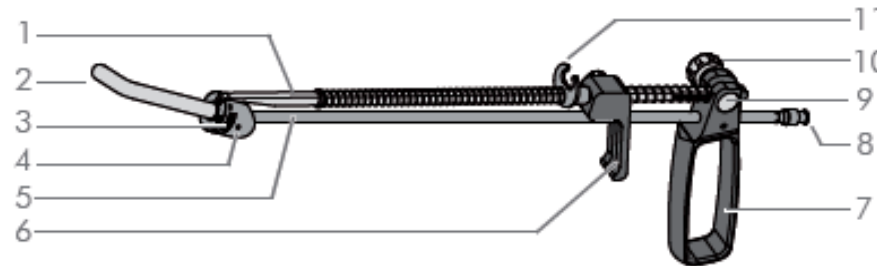

#### Opis produktu

Adapter z obrotowym stożkiem umożliwia ustawienie macycy w pozycji odpowiedniej do zabiegu. Za pomocą tego adaptera stożek można przesuwając w górę i w dół.

Adaptory z otworami umożliwiają również odsysanie i płukanie podczas zabiegu.

#### Dane techniczne

##### Warunki przechowywania i transportu


Opis	Wartość
Temperatura	-30°C – +40°C
Wilgotność względna	≤90 %
Ciśnienie atmosferyczne	700–1200 hPa

Żywność produktu  
≤1000 cykli i ≤2 lata


#### Montaż i demontaż przyrządu

##### 5.1 Montaż przyrządu

- Rozmiar adaptera ustala się bezpośrednio przed zabiegiem.
- Założyć pierścień uszczelniający na koniec rurki do płukania.
- Włożyć rurkę płuczącą do stożka i złożyć.

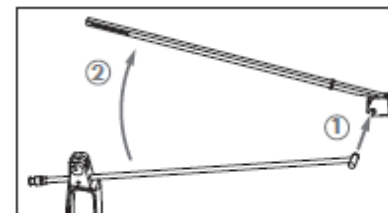


- Na kwadratowy pręt założyć długą sprężynę, następnie suwak, a na końcu uchwyt.
- Wyrównać otwory w pręcie kwadratowym i uchwycie.
- Wkręcić śrubę od strony uchwyty i dokręcić.
- Założyć krótką sprężynę na pręt kwadratowy i docisnąć do uchwyty, aż pręt kwadratowy wpasuje się w prowadnicę elementu uchwyty.

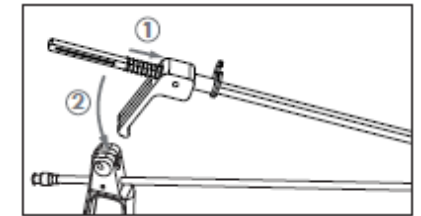


- Włożyć śrubę zaciskową do uchwyty i przykręcić do uchwyty przeciwnego.

##### 5.2 Demontaż przyrządu


- Otworzyć blokadę adaptera i wyjąć adapter.

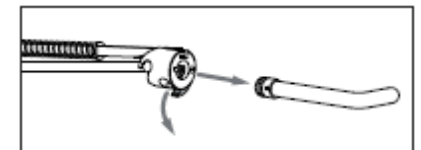


- Poluzować śrubę zaciskową i wysunąć uchwyt licznika.

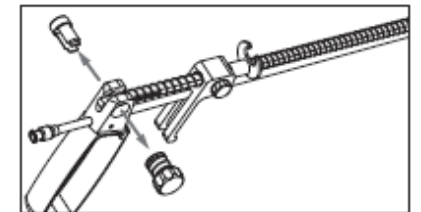


- Poluzować śruby na uchwycie.

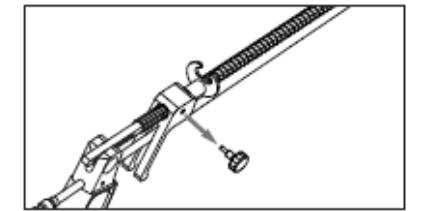

- Wcisnąć sprężynę w kierunku uchwyty i odchylić pręt kwadratowy do góry.

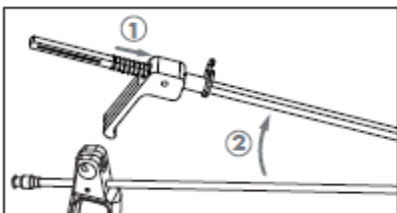

- Wyjmij sprężyny, uchwyt i suwak.

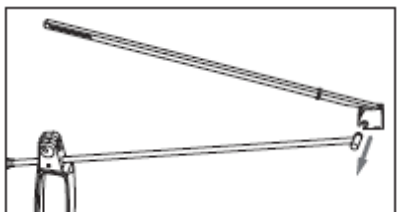

- Zdejmij pierścień uszczelniający (O-ring) na końcu rurki płuczącej.

**Zastosowanie**

**OSTRZEŻENIE**

Ryzyko zakażenia spowodowane niesterylnymi narzędziami.

- Przygotować przed użyciem.
- Włożyć adapter o wymaganej długości do stożka.
- W razie potrzeby podłączyć przyłącze LL do urządzenia do płukania/odsysania.

**OSTRZEŻENIE**

Ryzyko urazu spowodowanego zakrzywioną końcówką gwintowaną.

- Nie należy trzymać końcówki gwintowanej pod kątem podczas wprowadzania jej do szyjki macicy.
- Wprowadzić instrument do szyjki macicy.
- Nieznacznie poluzować śrubę zaciskową.
- Adapter można przesuwac na boki.
- Ustawić adapter w odpowiedniej pozycji za pomocą uchwytu.
- Ustawić macicę.
- Wprowadź kleszcze z haczykiem.
- Przesuń suwak do podpórki na kciuk kleszczyków z haczykiem i zaczeć o nią.
- Przeprowadzić zabieg.

**Przygotowanie**

- Przed przygotowaniem instrument należy zdemontować.

Patrz rozdział „5.2 Demontaż instrumentu”.  
Należy również przestrzegać naszych ogólnych informacji dotyczących pielęgnacji, konserwacji i czyszczenia DOK#0301!

**Przechowywanie**

Szczegółowe informacje na temat przechowywania i pielęgnacji znajdują się w oddzielnej instrukcji przygotowania DOK#0301.

**Utylizacja**

Cenne surowce można ponownie wykorzystać, jeśli zostaną zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.



Produkt należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z wytycznymi szpitala.

**Symbole i objaśnienia**

	Uwaga! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
	Należy przestrzegać instrukcji użytkowania!
<b>REF</b>	Numer zamówienia
	Numer partii
	Producent:
	Znak CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Niemcy  
Tel. +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com