

D0302 / Rev.C / DCR01769

**Manipulador uterino**

**Números de artigo**

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

**Segurança e responsabilidade**

- Antes de utilizar o instrumento, por favor
- ler e seguir as instruções de utilização.
  - Mantenha-as em local visível para utilização futura.

A RUDOLF Medical não se responsabiliza pelas consequências de uma utilização, preparação e manutenção incorretas. Nestes casos, a garantia é invalidada.

**Indicação**

O instrumento destina-se a utilização em ginecologia e é introduzido por via vaginal. É utilizado para posicionar o útero para o procedimento seguinte.

**Apenas com receita médica**

A utilizar apenas por especialistas qualificados.

**Contraindicação**

O instrumento não se destina a ser utilizado no sistema nervoso central ou no sistema circulatório.

**Risco de infeção**

- Prepare antes de utilizar.
- Prepare o instrumento antes de o devolver ao fabricante.


**Risco de lesão**

- Utilize apenas acessórios originais ou acessórios compatíveis de outras empresas.
- Não utilize nem repare instrumentos danificados.

**Conteúdo da embalagem**

- Verifique todas as peças para garantir que não há danos de transporte após a desembalagem.
- Se houver danos, contacte o fabricante.
- O conjunto inclui seis adaptadores, cada um com um diâmetro, comprimento ou design diferente.

- 1 Haste quadrada de 4
- 2 Adaptador
- 3 Trava do adaptador
- 4 Cone
- 5 Tubo de enxaguamento
- 6 Pega
- 7 Peça da pega
- 8 Ligaçao LL
- 9 Suporte do balcão
- 10 Parafuso de fixação
- 11 Corrediça

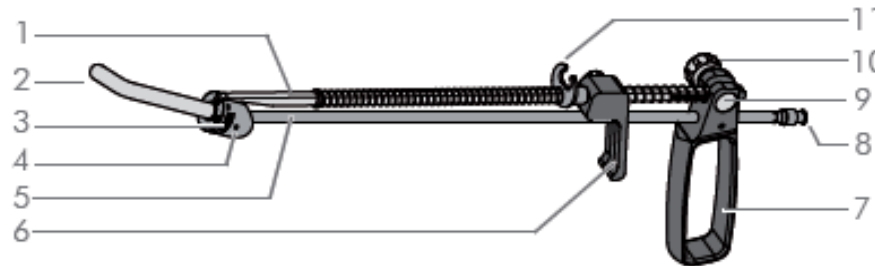

**Descrição do produto**

Um adaptador com um cone articulado permite posicionar o útero para o procedimento. Este cone pode ser movido para cima e para baixo utilizando este adaptador.

Os adaptadores com perfurações também permitem a realização de sucção e lavagem durante o procedimento.

**Dados técnicos**

**Condições de armazenamento e transporte**

Descrição	Valor
Temperatura	-30 °C – +40 °C
Humidade relativa	≤90 %
Pressão atmosférica	700–1200 hPa


Vida útil do produto  
≤1000 ciclos e ≤2 anos

**Montagem e desmontagem do instrumento**

**5.1 Montagem do instrumento**

- O tamanho do adaptador é determinado diretamente no pré-operatório.
- Coloque o anel de vedação na extremidade do tubo de lavagem.
- Insira o tubo de lavagem no cone e dobre-o para cima.


**Manipulador uterino**

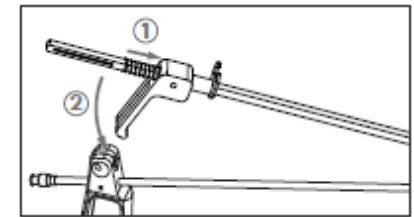


- Insira o parafuso de fixação na peça da pega e aparafuse-o ao suporte de apoio.

**5.2 Desmontagem do instrumento**


- Abra o bloqueio do adaptador e retire o adaptador.

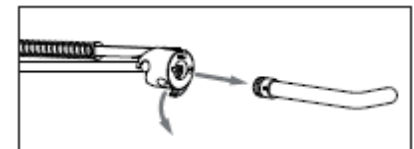


- Desaperte o parafuso de fixação e empurre o suporte do contador para fora.

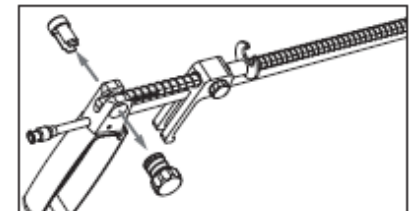


- Desaperte os parafusos da pega.

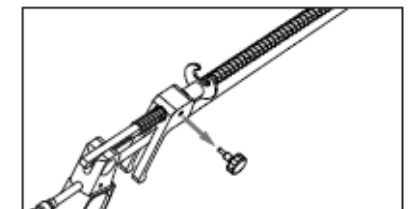

- Empurre a mola contra a pega e dobre a haste quadrada para cima.

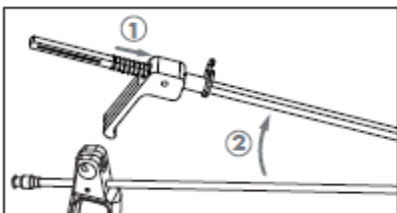

- Retire as molas, a pega e o cursor.

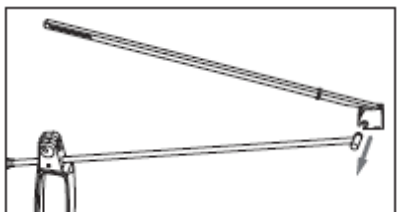

- Retire o anel de vedação na extremidade do tubo de enxaguamento.

**Aplicar**

**AVISO**

Risco de infecção devido a instrumentos não esterilizados.

- Prepare antes de usar.
- Encaixe um adaptador com o comprimento necessário no cono.
- Se necessário, ligue a conexão LL a uma unidade de lavagem/aspiração.

**AVISO**

Risco de lesão devido ao terminal roscado angular.

- Não segure o terminal roscado em ângulo ao introduzi-lo no colo do útero.
- Insira o instrumento na cérvix.
- Desaperte ligeiramente o parafuso de fixação.
- O adaptador pode ser movido de um lado para o outro.
- Posicione o adaptador conforme necessário utilizando a pega.
- Posicione o útero.
- Introduza a pinça com gancho.
- Deslize o cursor até ao apoio para o polegar da pinça em gancho e engate o apoio para o polegar.
- Realize o procedimento.

**Preparação**

- O instrumento deve ser desmontado antes da preparação.

Consulte a secção «5.2 Desmontagem do instrumento». Consulte também as nossas informações gerais sobre cuidados, manutenção e limpeza DOK#0301!

**Armazenamento**

Consulte as instruções de preparação separadas DOK#0301 para obter informações detalhadas sobre armazenamento e cuidados.

**Eliminação**

As matérias-primas valiosas podem ser reutilizadas se forem eliminadas de forma ecológica.



Elimine o produto de forma ecológica, seguindo as diretrizes do hospital.

**Símbolos e explicações**

	Atenção! O não cumprimento das advertências e precauções pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	Siga as instruções de utilização!
<b>REF</b>	Número de encomenda
	Número de lote
	Fabricante:
	Marcação CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Alemanha  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com