

Manipulator uterin

Numere de articol

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Siguranță și responsabilitate

Înainte de a utiliza instrumentul, vă rugăm
- citiți și respectați instrucțiunile de utilizare.
- Păstrați-le la vedere pentru utilizare ulterioară.

RUDOLF Medical nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele utilizării, pregătirii și întreținerii incorecte. În aceste cazuri, garanția este invalidată.

Indicații

Instrumentul este destinat utilizării în ginecologie și se introduce vaginal. Se utilizează pentru poziționarea uterului în vederea procedurii următoare.

Numai pe bază de rețetă

A se utiliza numai de către specialiști calificați.

Contraindicații

Instrumentul nu este destinat utilizării pe sistemul nervos central sau circulator.

Risc de infecție

- Pregătiți instrumentul înainte de utilizare.
- Pregătiți instrumentul înainte de a-l returna producătorului.


Risc de rănire

- Utilizați numai accesoriile originale sau accesoriile compatibile de la alte companii.
- Nu utilizați și nu reparați instrumentele deteriorate.

Conținutul livrării

- După despachetare, verificați toate piesele pentru a vă asigura că nu există deteriorări cauzate de transport.
- În cazul în care există deteriorări, vă rugăm să contactați producătorul.
- Setul include șase adaptoare, fiecare cu un diametru, o lungime sau un design diferit.

- 1 Tijă pătrată de 4
- 2 Adaptor
- 3 Blocare adaptor
- 4 Con
- 5 Tub de clătire
- 6 Mâner
- 7 Piesa mânerului
- 8 Conexiune LL
- 9 Suport blat
- 10 Șurub de prindere
- 11 Cursor

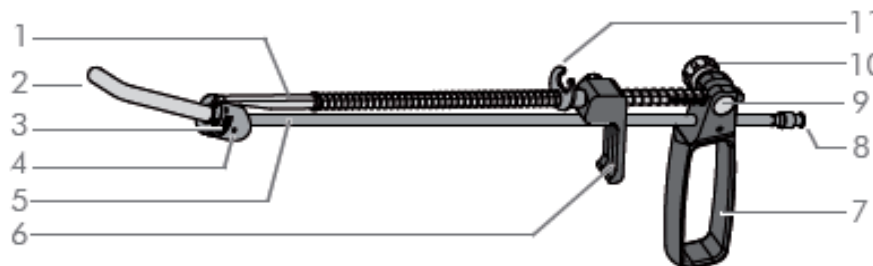

Descrierea produsului

Un adaptor cu un con pivotant permite poziționarea uterului pentru procedură. Acest con poate fi deplasat în sus și în jos folosind acest adaptor.

Adaptorii cu perforații permit, de asemenea, efectuarea aspirației și clătirii în timpul procedurii.

Date tehnice

Condiții de depozitare și transport


Descriere	Valoare
Temperatură	-30 °C – +40 °C
Umiditate relativă	≤90 %
Presiune atmosferică	700–1200 hPa

Durata de viață a produsului
≤1000 de cicluri și ≤2 ani

Asamblarea și dezasamblarea instrumentului


5.1 Asamblarea instrumentului

- Dimensiunea adaptorului se stabilește direct înainte de operație.
- Puneți inelul O-ring pe capătul tubului de clătire.
- Introduceți tubul de clătire în con și pliați-l în sus.

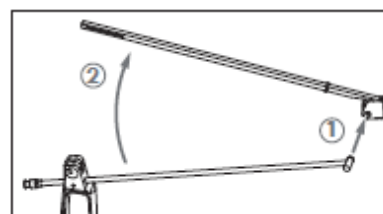

- Montați arcul lung, apoi glisorul și mânerul pe tija pătrată.
- Aliniați orificiile din tija pătrată și mâner.
- Introduceți șurubul din mâner și strângeți-l.
- Puneți arcul scurt peste tija pătrată și împingeți împotriva mânerului până când tija pătrată se potrivește în ghidajul piesei mânerului.


Manipulator uterin

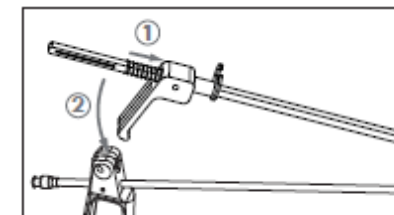


- Introduceți șurubul de prindere în mâner și înșurubați-l în suportul de fixare.

5.2 Demontarea instrumentului


- Deschideți blocarea adaptorului și scoateți adaptorul.

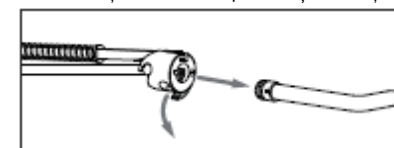


- Eliberați șurubul de prindere și împingeți suportul contorului spre exterior.

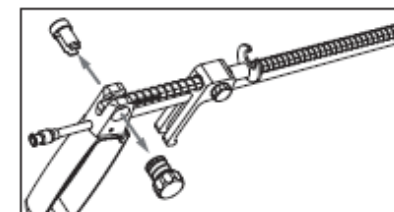


- Slăbiți șuruburile de pe mâner.

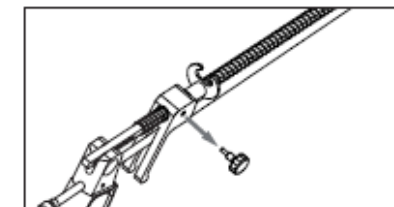

- Împingeți arcul împotriva mânerului și pliați tija pătrată.

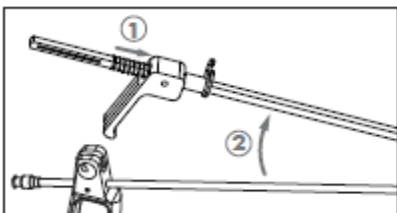

- Scoateți arcurile, mânerul și glisorul.

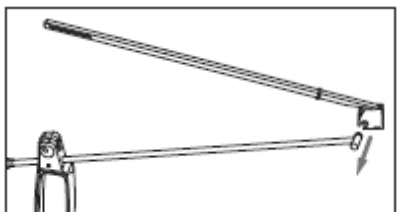

- Scoateți inelul O de la capătul tubului de clătire.

Aplicați

AVERTISMENT

Risc de infecție din cauza instrumentelor nesterilizate.

- Pregătiți înainte de utilizare.
- Montați un adaptor de lungimea necesară în con.
- Dacă este necesar, conectați racordul LL la o unitate de clătire/aspirație.

AVERTISMENT

Risc de rănire din cauza terminalului filetat unghiular.

- Nu țineți capătul filetat înclinat atunci când îl introduceți în colul uterin.
- Introduceți instrumentul în colul uterin.
- Slăbiți ușor șurubul de prindere.
- Adaptorul poate fi deplasat dintr-o parte în alta.
- Poziționați adaptorul după cum este necesar, folosind mânerul.
- Poziționați uterul.
- Introduceți forcepsul cu cârlig.
- Deplasați glisorul către suportul pentru degetul mare al forcepsului cu cârlig și agățați suportul pentru degetul mare.
- Efectuați procedura.

Pregătire

- Instrumentul trebuie dezasamblat înainte de pregătire.

Consultați secțiunea „5.2 Demontarea instrumentului”.

Vă rugăm să respectați, de asemenea, informațiile noastre generale privind îngrijire, întreținere și curățare DOK#0301!

Depozitare

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de pregătire separate DOK#0301 pentru informații detaliate privind depozitarea și îngrijirea.

Eliminare

Materiile prime valoroase pot fi reutilizate dacă sunt eliminate într-un mod ecologic.



Eliminați produsul într-un mod ecologic, respectând liniile directoare ale spitalului.

Simboluri și explicații

	Atenție! Nerespectarea avertismentelor și a măsurilor de precauție poate duce la deces sau la vătămări grave.
	Respectați instrucțiunile de utilizare!
REF	Număr de comandă
	Număr de lot
	Producător:
	Marcaj CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germania
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com