

D0302 / Rev.C / DCR01769

Livmodermanipulator

Artikelnummer

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Säkerhet och ansvar

Innan du använder instrumentet, vänligen

- läs och följ bruksanvisningen.
- Förvara den på en väl synlig plats för senare bruk.

RUDOLF Medical tar inget ansvar för konsekvenserna av felaktig användning, förberedelse och skötsel. I dessa fall upphör garantin att gälla.

Indikation

Instrumentet är avsett för användning inom gynekologi och förs in vaginalt. Det används för att positionera livmodern inför följande ingrepp.

Endast på recept

Får endast användas av kvalificerade specialister.

Kontraindikation

Instrumentet är inte avsett för användning på centrala nervsystemet eller cirkulationssystemet.

Infektionsrisk

- Förbered före användning.
- Förbered instrumentet innan det returneras till tillverkaren.


Risk för skada

- Använd endast originaltillbehör eller kompatibla tillbehör från andra tillverkare.
- Använd eller reparera inte skadade instrument.

Leverans

- Kontrollera alla delar för att säkerställa att inga transportskador uppstått efter uppackningen.
- Vid skador, kontakta tillverkaren.
- Satsen innehåller sex adaptrar, var och en med olika diameter, längd eller utformning.

- 1 4-kantig stång
- 2 Adapter
- 3 Adapterlås
- 4 Kon
- 5 Sköljrör
- 6 Handtag
- 7 Handtagsdel
- 8 LL-anslutning
- 9 Bänkskivshållare
- 10 Klämskruv
- 11 Skjutreglage

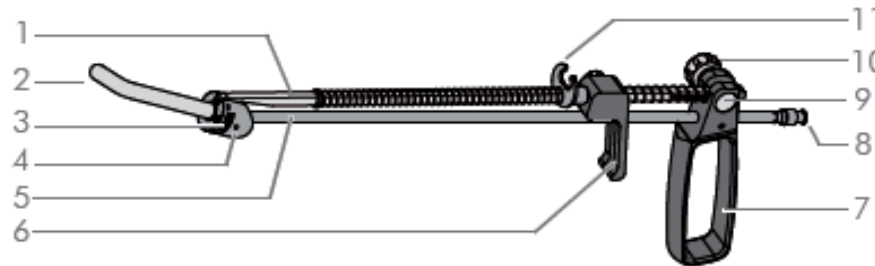

Produktbeskrivning

En adapter med en svängbar kon gör det möjligt att positionera livmodern inför ingreppet. Denna kon kan förflyttas uppåt och nedåt med hjälp av denna adapter.

Adaptrar med perforeringar möjliggör även sugning och sköljning under ingreppet.

Tekniska data


Förvarings- och transportförhållanden	
Beskrivning	Värde
Temperatur	-30 °C – +40 °C
Relativ luftfuktighet	≤90 %
Atmosfärstryck	700–1200 hPa

Produktens livslängd
≤1000 cykler och ≤2 år


Montering och demontering av instrumentet

5.1 Montering av instrumentet

- Adapterns storlek fastställs direkt före ingreppet.
- Sätt på O-ringen på änden av sköljslangen.
- För in sköljslangen i konen och vik upp den.

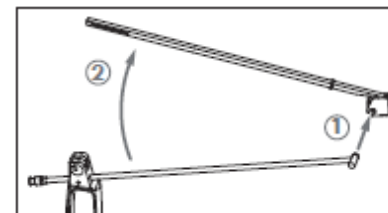


- Sätt den långa fjädern, sedan skjutreglaget och därefter handtaget på den fyrkantiga stängen.
- Rikta in hålen i den fyrkantiga stängen och handtaget.
- Sätt i skruven från handtaget och dra åt.
- Sätt den korta fjädern över fyrkantsstången och tryck mot handtaget tills fyrkantsstången passar in i handtagets styrning.

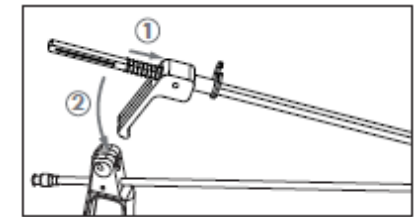


- Sätt in klämskraven i handtaget och skruva fast den i mothållaren.

5.2 Demontering av instrumentet


- Öppna adapterlåset och ta bort adaptern.

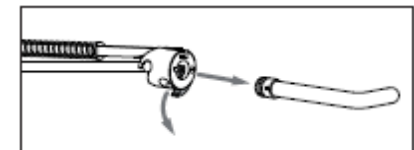


- Lossa klämskraven och tryck ut hållaren.

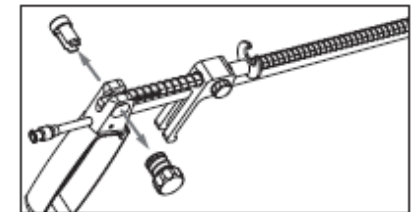


- Lossa skruvarna på handtaget.

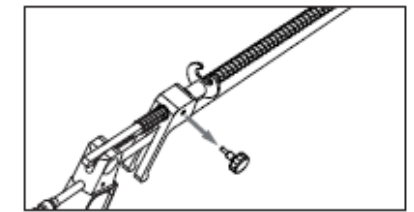

- Tryck fjädern mot handtaget och fäll upp den fyrkantiga stängen.

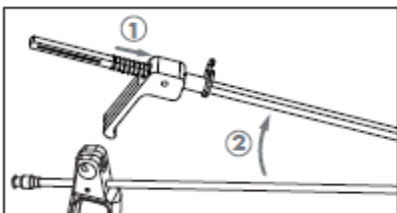

- Ta bort fjädrarna, handtaget och skjutreglaget.

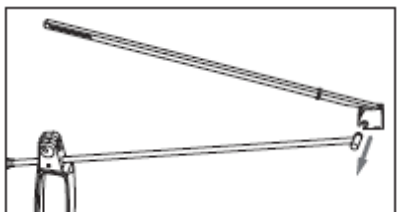

- Ta bort O-ringen i änden av sköjlröret.

Använd

VARNING

Risk för infektion från osterila instrument.

- Förbered före användning.
- Sätt en adapter med önskad längd i konan.
- Anslut vid behov LL-anslutningen till en sköj- /sugenhet.

VARNING

Risk för skada från vinklad gängad terminal.

- Håll inte den gängade terminalen i vinkel när du för in den i livmoderhalsen.
- För in instrumentet i livmoderhalsen.
- Lossa klämskruven något.
- Adaptern kan föras från sida till sida.
- Placera adaptern efter behov med hjälp av handtaget.
- Placera livmodern.
- För in den krokförsedda pincetten.
- För skjutreglaget till tumstödet på den krokförsedda pincetten och haka fast tumstödet.
- Utför ingreppet.

Förberedelse

- Instrumentet måste demonteras före förberedelse.

Se avsnitt "5.2 Demontering av instrumentet".
Observera även vår allmänna information om skötsel, underhåll och rengöring DOK#0301!

Förvaring

Se de separata förberedelseinstruktionerna DOK#0301 för detaljerad information om förvaring och skötsel.

Avfallshantering

Värdefulla råvaror kan återanvändas om de kasseras på ett miljövänligt sätt.



Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt sjukhusets riktlinjer.

Symboler och förklaringar

	Varning! Om varningar och försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
	Följ bruksanvisningen!
REF	Beställningsnummer
	Partinummer
	Tillverkare:
	CE-märkning



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com