

Rahim manipülatörü

Rahim manipülatörü

Ürün numaraları

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Güvenlik ve sorumluluk

Cihazı kullanmadan önce lütfen

- kullanım talimatlarını okuyun ve uygulayın.
- Daha sonra kullanmak üzere göz önünde bulundurun.

RUDOLF Medical, yanlış kullanım, hazırlık ve bakımın sonuçları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durumlarda garanti geçersiz hale gelir.

Endikasyon

Cihaz jinekoloji alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve vajinal yolla yerleştirilir. Aşağıdaki işlem için rahmi konumlandırmak amacıyla kullanılır.

Sadece reçete ile

Sadece kalifiye uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

Kontrendikasyon

Bu alet, merkezi sinir sistemi veya dolaşım sistemi üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Enfeksiyon riski

- Kullanmadan önce hazırlayın.
- Üreticiye iade etmeden önce cihazı hazırlayın.


Yaralanma riski

- Yalnızca orijinal aksesuarları veya diğer firmaların uyumlu aksesuarlarını kullanın.
- Hasarlı cihazları kullanmayın veya onarmayın.

Teslimat kapsamı

- Paketi açtıktan sonra tüm parçaları kontrol ederek nakliye sırasında hasar görmediğinden emin olun.
- Hasar varsa lütfen üreticiyle iletişime geçin.
- Sette, her biri farklı çap, uzunluk veya tasarıma sahip altı adet adaptör bulunmaktadır.

- 1 4-Kare çubuk
- 2 Adaptör
- 3 Adaptör kilidi
- 4 Konik
- 5 Durulama borusu
- 6 Tutamak
- 7 Sap parçası
- 8 LL bağlantısı
- 9 Tezgah tutucu
- 10 Kelepçe vidası
- 11 Kayan parça

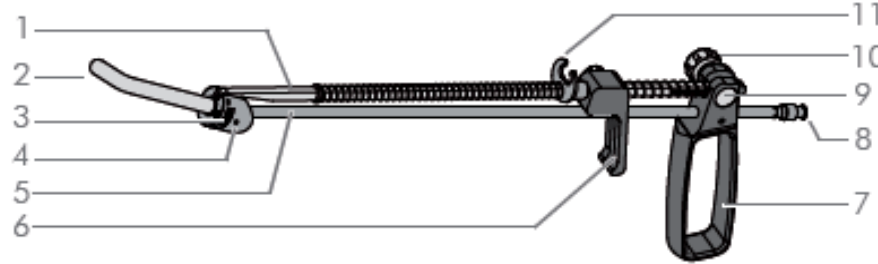

Ürün açıklaması

Döner konik uçlu bir adaptör, prosedür için rahmin konumlandırılmasını sağlar. Bu konik uç, bu adaptör kullanılarak yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir.

Delikli adaptörler ayrıca işlem sırasında emme ve durulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Teknik veriler

Saklama ve taşıma koşulları


Açıklama	Değer
Sıcaklık	-30°C – +40°C
Bağıl nem	≤90 %
Atmosferik basınç	700–1200 hPa

Ürün ömrü
≤1000 döngü ve ≤2 yıl


Cihazın montajı ve demontajı

5.1 Cihaz montajı

- Adaptörün boyutu ameliyat öncesinde doğrudan belirlenir.
- O-ringi durulama tüpünün ucuna takın.
- Yıkama tüpünü konik parçaya yerleştirin ve yukarı doğru katlayın.

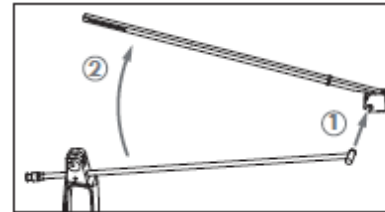


- Uzun yayı, ardından kaydırıcıyı ve son olarak da tutamağı kare çubuğa takın.
- Kare çubuk ve tutamağın üzerindeki delikleri hizalayın.
- Vidayı tutamaktan sokun ve sıkın.
- Kısa yayı kare çubuğun üzerine takın ve kare çubuk, tutamak parçasının kılavuzuna oturana kadar tutamağa doğru itin.

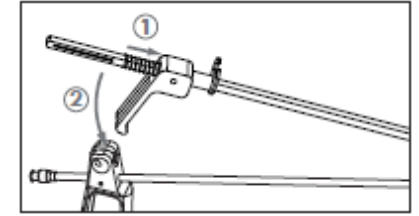


- Kelepçe vidasını tutamak parçasına yerleştirin ve karşı tutucuya vidalayın.

5.2 Cihazın sökülmesi


- Adaptör kilidini açın ve adaptörü çıkarın.

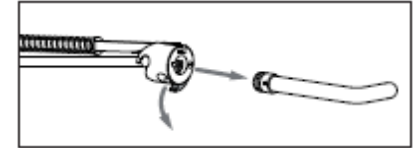


- Kelepçe vidasını gevşetin ve sayaç tutucusunu dışarı itin.

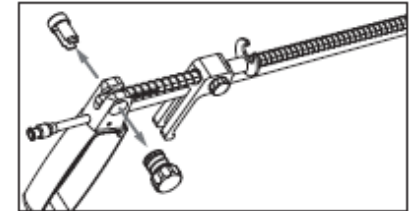


- Tutamağın üzerindeki vidaları gevşetin.

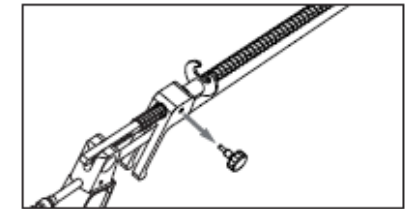

- Yayı tutamağa doğru itin ve kare çubuğu yukarı doğru katlayın.

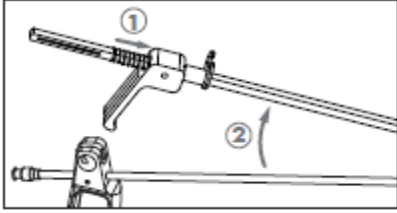

- Yayları, tutamağı ve kaydırıcıyı çıkarın.

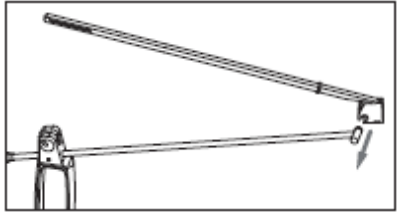

- Durulama borusunun ucundaki O-ringi çıkarın.

Uygulama**UYARI**

Steril olmayan aletlerden kaynaklanan enfeksiyon riski.

- Kullanmadan önce hazırlayın.
- Gerekli uzunluktaki bir adaptörü konik parçaya takın.
- Gerekirse, LL bağlantısını bir durulama/emme ünitesine bağlayın.

UYARI

Açılı dişli uçtan kaynaklanan yaralanma riski.

- Dişli ucu servikse sokarken açılı tutmayın.
- Aleti servikse yerleştirin.
- Kelepçe vidasını biraz gevşetin.
- Adaptör bir yandan diğer yana hareket ettirilebilir.
- Kolu kullanarak adaptörü gerektiği gibi konumlandırın.
- Rahmi konumlandırın.
- Kancalı forseps'i yerleştirin.
- Kaydırıcıyı kancalı forsepsin başparmak dayanağına doğru hareket ettirin ve başparmak dayanağını kancalayın.
- İşlemi gerçekleştirin.

Hazırlık

- Hazırlık öncesinde aletin sökülmesi gerekir.

"5.2 Aletin sökülmesi" bölümüne bakınız.

Lütfen ayrıca bakım, onarım ve temizlik DOK#0301!

Saklama

Depolama ve bakımla ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen ayrı hazırlık talimatları DOK#0301'e bakın.

İmha

Değerli hammaddeler, çevreye duyarlı bir şekilde imha edildiğinde yeniden kullanılabilir.



Ürünü, hastanenin yönergelerine uygun olarak çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edin.

Semboller ve açıklamalar

	Dikkat! Uyarı ve önlemlere uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	Kullanım Talimatlarını izleyin!
REF	Sipariş numarası
	Parti numarası
	Üretici:
	CE işareti

