


Uterusmanipulator nach Cohen

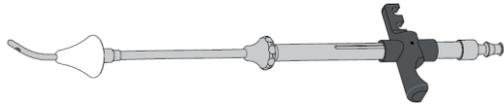

Artikelnummern:

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Sicherheit und Verantwortung

Bevor Sie das Instrument benutzen
 ▶ Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.
 ▶ Bewahren Sie diese für späteren Gebrauch an einer gut sichtbaren Stelle auf.
 RUDOLF Medical übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch unsachgemäße Aufbereitung und Pflege. In diesen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

Indikation

Das Instrument ist für den Einsatz in der Gynäkologie vorgesehen und wird vaginal eingeführt. Es dient dem Einbringen von Kontrastmitteln und dem Positionieren des Uterus für den nachfolgenden Eingriff.

Kontraindikation

Das Instrument ist nicht für die Anwendung am zentralen Nerven- und Kreislaufsystem vorgesehen.

Infektionsgefahr

- ▶ Vor dem Gebrauch aufbereiten.
- ▶ Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.


Verletzungsgefahr

- ▶ Nur original Zubehör verwenden.
- ▶ Beschädigte Instrumente nicht verwenden und nicht reparieren.

Lieferumfang

- ▶ Nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden prüfen.
 - ▶ Bei Beanstandungen Hersteller kontaktieren.
- ↗ Herstelleradresse siehe letzte Seite

ⓘ Bei Bestellung des Sets werden zwei Adapter mitgeliefert. Diese unterscheiden sich in ihrer Größe.
Produktbeschreibung
 Mit Hilfe des Adapters kann die Gebärmutter für den Eingriff positioniert werden. Zudem ermöglicht die Lochperforation am Konusrohr des Adapters das Einbringen von Kontrastmittel zur Diagnose. Über den Konus wird der Gebärmutterhals abgedichtet.

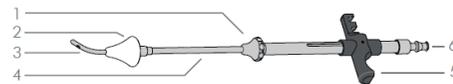

- 1 Rändelmutter
- 2 Adapter
- 3 Adapter mit Lochperforation
- 4 Innenschaft
- 5 Griff
- 6 LL-Anschluss

Technische Daten


Lager- und Transportbedingungen
 ▶ Instrument nur mit angemessenem Schutz transportieren und lagern.

Produktlebensdauer
 ≤1000 Zyklen und ≤2 Jahre


Instrument zusammenbauen und zerlegen

Instrument zusammenbauen
 ⓘ Die Größe des Adapters wird unmittelbar vor der OP, in Abhängigkeit von der Größe des Gebärmutterhalses bestimmt.

- ▶ Feder auf den Innenschaft aufziehen.

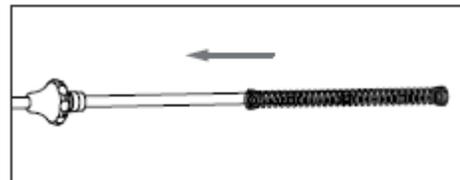


- ▶ Außenschaft aufziehen und mit Rändelmutter verschrauben.

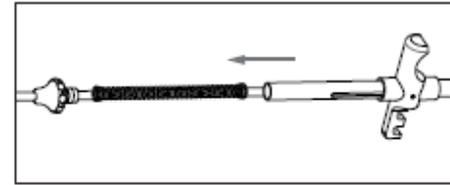


Instrument zerlegen

- ▶ Adapter durch eine leichte Drehbewegung entnehmen.

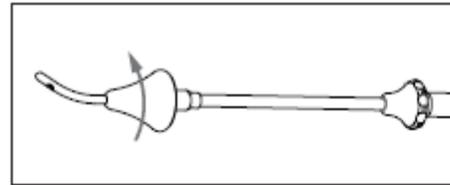

- ▶ Rändelmutter lösen und Außenschaft mit Feder herausziehen.

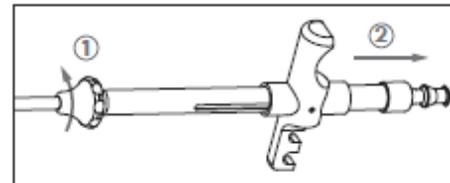


Anwenden


WARNUNG

Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
 ▲ Instrument vor dem Gebrauch aufbereiten.
 ▶ Adapter in Abhängigkeit von der Größe des Gebärmutterhalses bestimmen.
 ▶ Adapter einsetzen und festdrehen.


Uterusmanipulator Cohen

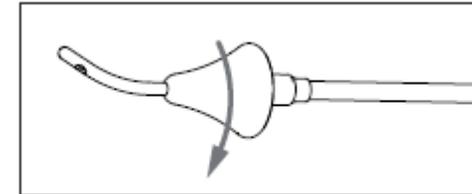

- ▶ Rändelmutter etwas lösen und Innenschaft in die richtige Position drehen, sodass er mit der Spitze des Adapters in einer Linie liegt.

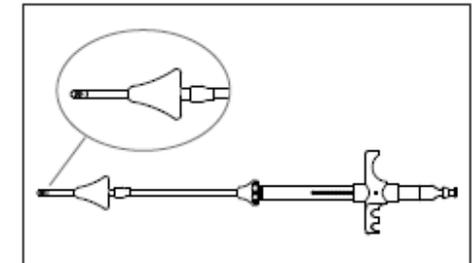

- ▶ Spritze mit Kontrastmittel an den LL-Anschluss anschließen.
- ▶ Instrument in den Muttermund einführen.
- ▶ Adapter in die gewünschte Position bringen und Gebärmutter positionieren.
- ▶ Hakenzange einführen und Gebärmutter vorsichtig

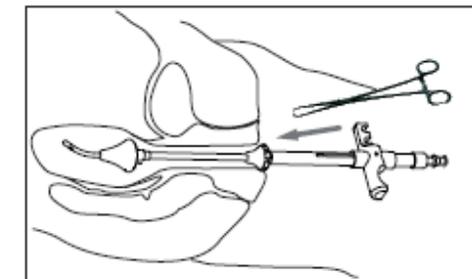

- fassen
- ▶ Daumenteil der Hakenzange in den Schieber eingehängen.
- ↳ Instrument sitzt fest.

- ▶ Kontrastmittel über die Spritze einbringen.
- ▶ Instrument aufbereiten.

Aufbereiten



Das Instrument muss vor der Aufbereitung zerlegt werden.

➤ Siehe Kapitel „Instrument zerlegen“

➤ Ausführliche Information zu Aufbereitung und Pflege finden Sie in der separaten Aufbereitungsanleitung DOK#301

Lagern

Ausführliche Informationen zu Lagerung und Pflege finden Sie in der separaten Aufbereitungsanleitung DOK#301

Entsorgen



Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Produkt nach den gültigen Krankenhausrichtlinien umweltgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise und Erläuterung von Symbolen

	Gebrauchsanweisung beachten
REF	Bestellnummer
	Unsteril
	Hersteller
	CE Kennzeichen



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com