


D0436 / Rev.D / DCR001770

Manipulátor dělohy podle Cohen

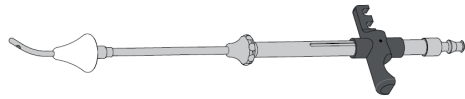

Čísla položek

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Bezpečnost a odpovědnost

Před použitím přístroje

- ▶ Přečtěte si a dodržujte návod k použití.
- ▶ Uchovejte tento návod na snadno viditelném místě, abyste se k němu mohli později vrátit.

Společnost RUDOLF Medical nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné přípravy a údržby.

V takových případech zaniká záruka.

Indikace

Tento nástroj je určen pro gynekologické aplikace a zavádí se vaginálně. Používá se k zavedení kontrastní látky a k fixaci dělohy v rámci přípravy na následný zákrok.

Kontraindikace

Tento nástroj není určen k použití na centrální nervový a oběhový systém.

Riziko infekce

- ▶ Připravte před použitím.
- ▶ Připravte nástroj před jeho vrácením výrobcí.

Riziko poranění

- ▶ Používejte pouze originální příslušenství
- ▶ Nepoužívejte poškozené přístroje a neprovádějte opravy

Obsah balení


- ▶ Po vybalení zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo k poškození během přepravy.
- ▶ V případě reklamace kontaktujte výrobce.

↗ Adresu výrobce najdete na poslední stránce.

ⓘ Pokud je objednána sada, jsou dodány dva adaptéry. Adaptéry mají dvě různé velikosti.

Popis výrobku

Pomocí adaptéru lze dělohu připravit do správné polohy pro zákrok. Otvory v kuželové trubici adaptéru navíc usnadňují instalaci kontrastní látky pro diagnostické účely. Kužel utěsňuje děložní hrdlo.

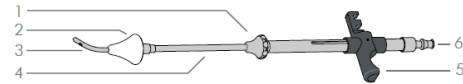

- 1 rýhovaná matice
- 2 Adaptér
- 3 Trubice adaptéru s perforací
- 4 Vnitřní plášť
- 5 Rukojeť
- 6 LL připojení

Technické údaje

Podmínky skladování a přepravy

- ▶ Přístroj přepravujte a skladujte pouze s odpovídající ochranou

Životnost výrobku


≤1000 cyklů a ≤2 roky

Montáž a demontáž přístroje


Montáž nástroje

ⓘ Velikost adaptéru se volí těsně před operací podle velikosti děložního čípku.

- ▶ Nasuňte pružinu na vnitřní plášť.

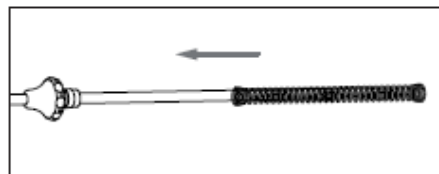


- ▶ Nasadte vnější plášť a přišroubujte jej k rýhované matici.

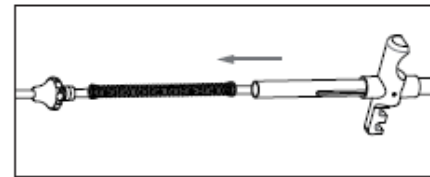


Demontáž nástroje

- ▶ Adaptér mírně otočte a sejměte.

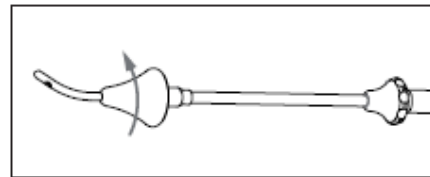

- ▶ Odšroubujte rýhovanou matici a vyjměte vnější dřík s pružinou.

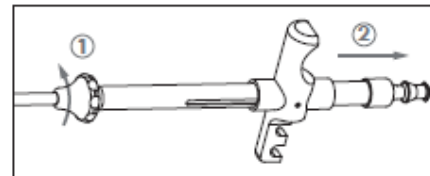


Použití

VAROVÁNÍ


Riziko infekce způsobené nesterilními nástroji.

- ▶ Připravte nástroj před použitím
- ▶ Vyberte adaptér podle velikosti děložního čípku.
- ▶ Nasadte adaptér a utáhněte jej.

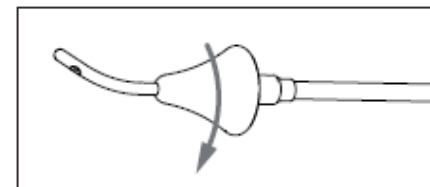


- ▶ Mírně povolte rýhovanou matici a otočte vnitřní plášť do správné polohy tak, aby byl zarovnan se špičkou adaptéru.

Manipulátor dělohy od Cohen

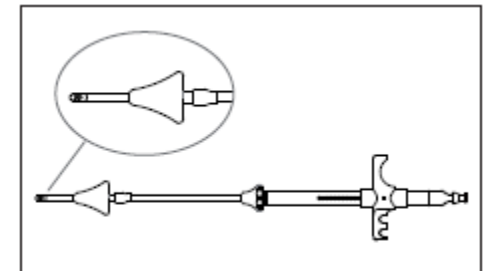

- ▶ Připojte injekční stříkačku s kontrastní látkou k přípojce LL.
- ▶ Zavádějte nástroj do cervikálního os.
- ▶ Umístěte adaptér podle potřeby a nastavte polohu dělohy
- ▶ Zaveďte tenaculum a opatrně uchopte dělohu.

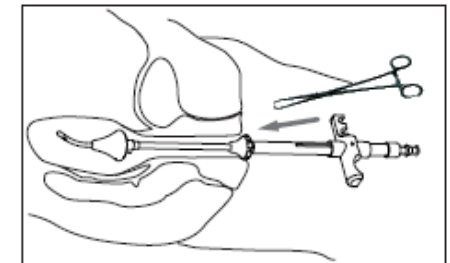

- ▶ Umístěte otvor pro prst na tenakulu do posuvníku.
- ↳ Přístroj je pevně upevněn.
- ▶ Vstříkněte kontrastní látku pomocí injekční stříkačky.
- ▶ Připravte nástroj.

Příprava

ⓘ

Před přípravou je nutné přístroj rozebrat.

↗ Viz kapitola „Demontáž přístroje“.

↗ Podrobné informace o přípravě a péči naleznete v samostatných Pokynech pro péči, údržbu a čištění DOK#301

Skladování

↗ Podrobné informace o skladování a péči naleznete v samostatných Pokynech pro péči, údržbu a čištění DOK#301



Likvidace

Ekologická likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin.



Zařízení zlikvidujte ekologickým způsobem v souladu s platnými nemocničními směnicemi.

Bezpečnostní informace a vysvětlení symbolů

	Dodržujte návod k použití
REF	Objednací číslo
	Nesterilní
	Výrobce
	Značka CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Německo
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com