


D0436 / Rev.D / DCR01770

Livmodermanipulator af Cohen

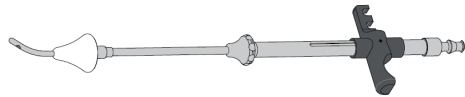

Varenumre

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Sikkerhed og ansvar

Før instrumentet tages i brug

- ▶ Læs og følg brugsanvisningen.
- ▶ Opbevar disse instruktioner et sted, hvor de er let synlige, så du kan slå op i dem senere.

RUDOLF Medical påtager sig intet ansvar for skader som følge af forkert brug eller forkert klargøring og pleje. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

Indikation

Dette instrument er beregnet til gynækologiske anvendelser og indføres vaginalt. Det anvendes til at indføre kontrastmidler og til at positionere livmoderen som forberedelse til det efterfølgende indgreb.

Kontraindikation

Dette instrument er ikke beregnet til brug på centralnervesystemet og kredsløbssystemet.

Risiko for infektion

- ▶ Forbered instrumentet før brug.
- ▶ Forbered instrumentet, inden det returneres til producenten.

Risiko for skade

- ▶ Brug kun originalt tilbehør
- ▶ Brug ikke beskadigede instrumenter, og foretag ikke reparationer

Leveringsomfang


- ▶ Efter udpakning skal alle dele kontrolleres for eventuelle transportskader.
- ▶ I tilfælde af reklamationer skal du kontakte producenten.

↗ Se sidste side for producentens adresse.

i Hvis sættet bestilles, medfølger der to adaptere. Adapterne er i to forskellige størrelser.

Produktbeskrivelse

Livmoderen kan placeres i position som forberedelse til indgrebet ved hjælp af adapteren. Desuden letter perforeringen på adapterens koniske rør indføring af kontrastvæske til diagnostiske formål. Konen forsejler livmoderhalsen.

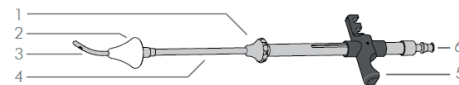

- 1 Rillet møtrik
- 2 Adapter
- 3 Adapterrør med perforering
- 4 Indre hylster
- 5 Håndtag
- 6 LL-tilslutning

Tekniske data

Opbevarings- og transportbetingelser

- ▶ Instrumentet må kun transporteres og opbevares med passende beskyttelse

Produktets levetid


≤1000 cyklusser og ≤2 år

Montering og demontering af instrumentet


Montering af instrumentet

i Adapterens størrelse vælges umiddelbart før operationen i henhold til livmoderhalsens størrelse.

- ▶ Monter fjederen på den indre kappe.

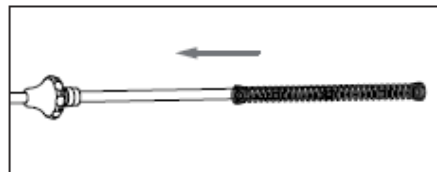


- ▶ Monter den ydre kappe, og skru den fast på den riflede møtrik.

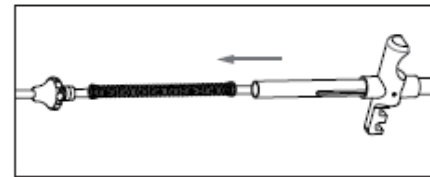


Demontering af instrumentet

- ▶ Drej adapteren let, og fjern den.

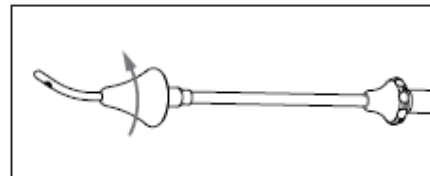

- ▶ Skru den riflede møtrik af, og tag den ydre skaft med fjederen ud.

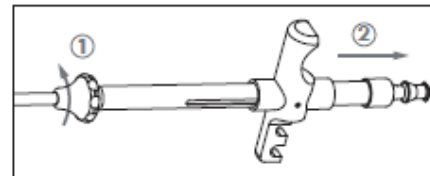


Anvendelse

ADVARSEL


Risiko for infektion fra ikke-sterile instrumenter.

- ▶ Forbered instrumentet før brug
- ▶ Vælg adapter i henhold til livmoderhalsens størrelse.
- ▶ Monter adapteren og stram den.

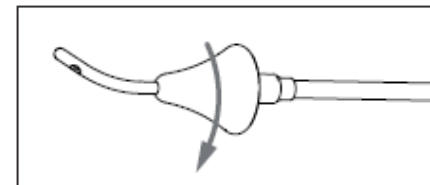


- ▶ Skru den riflede møtrik let ud, og drej den indre kappe til den korrekte position, så den flugter med adapterens spids.

Livmodermanipulator af Cohen

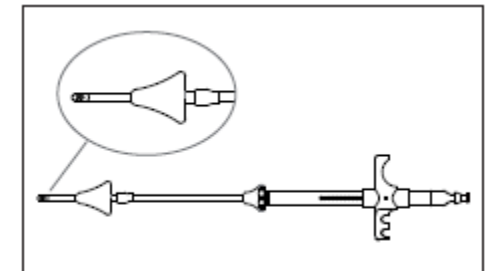

- ▶ Tilslut sprøjten med kontrastvæske til LL-tilslutningen.
- ▶ Indfør instrumentet i livmoderhalsåbningen.
- ▶ Placer adapteren efter behov, og placér livmoderen
- ▶ Indsæt tenaculum og tag forsigtigt fat i livmoderen.

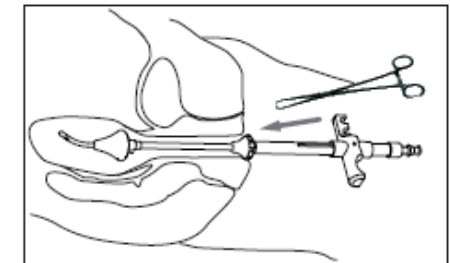

- ▶ Sæt tenaculumets fingerhul ind i skyderen.
- ↳ Instrumentet er fastgjort korrekt.
- ▶ Indfør kontrastmidlet via sprøjten.
- ▶ Forbered instrumentet.

Forberedelse

i

Instrumentet skal adskilles inden klargøring.
↗ Se afsnittet „Demontering af instrumentet“.
↗ Detaljerede oplysninger om klargøring og pleje findes i de separate retningslinjer for pleje, vedligeholdelse og rengøring DOK#301

Opbevaring

↗ Detaljerede oplysninger om opbevaring og pleje findes i de separate retningslinjer for pleje, vedligeholdelse og rengøring DOK#301

Bortskaffelse

Miljøvenlig bortskaffelse gør det muligt at genanvende værdifulde råmaterialer.



Bortskaf enheden på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med de gældende retningslinjer på hospitalet.

Sikkerhedsoplysninger og forklaring af symboler

	Følg brugsanvisningen
REF	Bestillingsnummer
	Ikke-sterilt
	Producent
	CE-mærke



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland
Tlf. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com