


D0436 / Rev. D / DCR01770

**Χειριστής μήτρας τύπου Cohen**

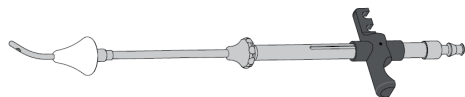

**Αριθμοί ειδους**

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

**Ασφάλεια και ευθύνη**

Πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο

- ▶ Διαβάστε και ακολουθήστε τις Οδηγίες Χρήσης.
- ▶ Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ένα μέρος όπου θα είναι εύκολα ορατές για μελλοντική αναφορά.

Η RUDOLF Medical δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένη προετοιμασία και φροντίδα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

**Ενδείξεις**

Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για γυναικολογικές εφαρμογές και εισάγεται κολπικά. Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μέσων αντίθεσης και για τη θέση της μήτρας κατά την προετοιμασία για την επακόλουθη επέμβαση.

**Αντενδείξεις**

Αυτό το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο κεντρικό νευρικό και κυκλοφορικό σύστημα.

**Κίνδυνος μόλυνσης**

- ▶ Προετοιμάστε το πριν από τη χρήση.
- ▶ Προετοιμάστε το εργαλείο πριν το επιστρέψετε στον κατασκευαστή.

**Κίνδυνος τραυματισμού**

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα όργανα και μην τα επισκευάζετε

**Περιεχόμενα συσκευασίας**


- ▶ Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
- ▶ Σε περίπτωση παραπόνων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

▶ Για τη διεύθυνση του κατασκευαστή, ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα.

**i** Εάν παραγγείλετε το σετ, παρέχονται δύο προσαρμογές. Οι προσαρμογές είναι δύο διαφορετικών μεγεθών.

**Περιγραφή προϊόντος**

Η μήτρα μπορεί να τοποθετηθεί σε θέση προετοιμασίας για την επέμβαση χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα. Επιπλέον, η οπή στον κωνικό σωλήνα του προσαρμογέα διευκολύνει την έγχυση σκιαγραφικού μέσου για διαγνωστικούς σκοπούς. Ο κώνος σφραγίζει τον τράχηλο.

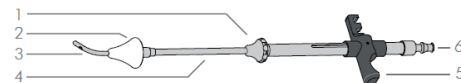

- 1 παξιμάδι με οδοντώσεις
- 2 Προσαρμογέας
- 3 Σωλήνας προσαρμογέα με διάτρηση
- 4 Εσωτερικός θάλαμος
- 5 Λαβή
- 6 Σύνδεση LL

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς

- ▶ Μεταφέρετε και αποθηκεύετε το όργανο μόνο με την κατάλληλη προστασία

**Διάρκεια ζωής προϊόντος**


≤1000 κύκλοι και ≤2 έτη

**Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του οργάνου**


**Συναρμολόγηση του εργαλείου**

**i** Το μέγεθος του προσαρμογέα επιλέγεται αμέσως πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με το μέγεθος του τραχήλου της μήτρας.

- ▶ Τοποθετήστε το ελατήριο στο εσωτερικό περίβλημα.

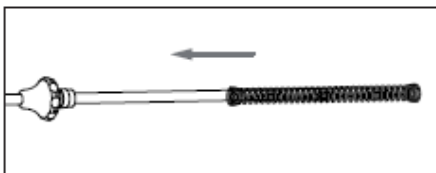


- ▶ Τοποθετήστε το εξωτερικό περίβλημα και βιδώστε το στο ραβδωτό παξιμάδι.

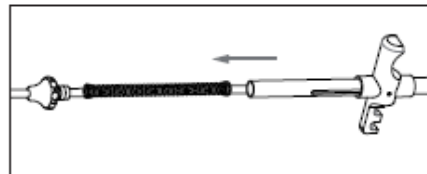


**Αποσυναρμολόγηση του εργαλείου**

- ▶ Περιστρέψτε ελαφρώς τον προσαρμογέα και αφαιρέστε τον.

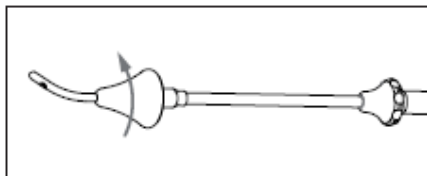


- ▶ Ξεβιδώστε το οδοντωτό παξιμάδι και βγάλτε τον εξωτερικό άξονα με το ελατήριο.

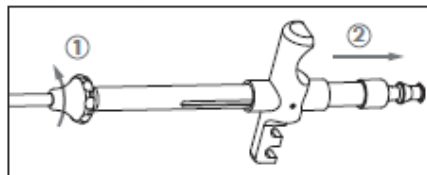


**Εφαρμογή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος μόλυνσης από μη αποστειρωμένα εργαλεία.


- ▶ Προετοιμάστε το εργαλείο πριν από τη χρήση
- ▶ Επιλέξτε τον προσαρμογέα ανάλογα με το μέγεθος του τραχήλου της μήτρας.
- ▶ Τοποθετήστε τον προσαρμογέα και σφίξτε τον.

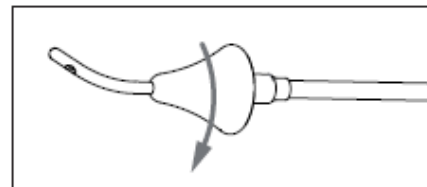

- ▶ Ξεβιδώστε ελαφρώς το οδοντωτό παξιμάδι και γυρίστε το εσωτερικό περίβλημα στη σωστή θέση, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με την άκρη του προσαρμογέα.

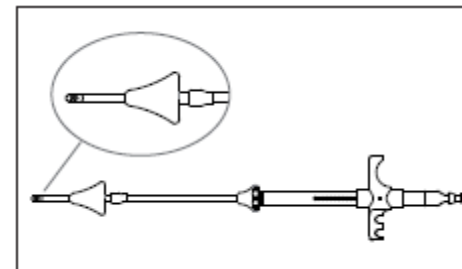

- ▶ Συνδέστε τη σύριγγα που περιέχει το μέσο αντίθεσης στη σύνδεση LL.
- ▶ Εισάγετε το εργαλείο στο τράχηλο.
- ▶ Τοποθετήστε τον προσαρμογέα όπως απαιτείται και τοποθετήστε τη μήτρα
- ▶ Εισάγετε το τενάκουλουμ και πιάστε προσεκτικά τη μήτρα.

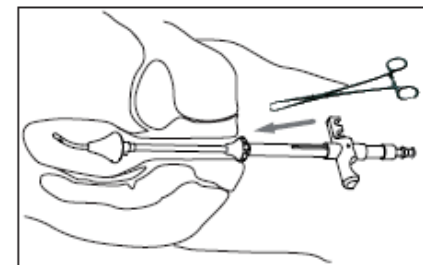

- ▶ Τοποθετήστε την οπή για το δάχτυλο του τενάκουλου στον ολισθητήρα.
- ↳ Το όργανο έχει τοποθετηθεί σταθερά.
- ▶ Εισάγετε το σκιαγραφικό μέσο μέσω της σύριγγας.
- ▶ Προετοιμάστε το εργαλείο.

**Προετοιμασία**

**i** Το εργαλείο πρέπει να αποσυναρμολογηθεί πριν από την προετοιμασία.

▶ Βλ. ενότητα «Αποσυναρμολόγηση του οργάνου».

▶ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία και τη φροντίδα μπορείτε να βρείτε στις

D0436 / Rev. D / DCR01770

## Μανιπουλάτορας μήτρας του Cohen

Ξεχωριστές Οδηγίες φροντίδας, συντήρησης και καθαρισμού DOK#301

### **Αποθήκευση**

7 Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και τη φροντίδα μπορείτε να βρείτε στις ξεχωριστές Οδηγίες φροντίδας, συντήρησης και καθαρισμού DOK#301





### **Απόρριψη**

Η περιβαλλοντικά ορθή απόρριψη επιτρέπει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών.



Απορρίψτε τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του νοσοκομείου.

### **Πληροφορίες ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων**

	Ακολουθήστε τις Οδηγίες χρήσης
<b>REF</b>	Αριθμός παραγγελίας
	Μη αποστειρωμένο
	Κατασκευαστής
	Σήμα CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Γερμανία  
Τηλ. +49 7463 9956-0  
Φαξ +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com