


Manipulador uterino de Cohen

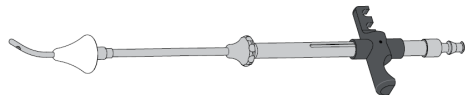

Números de referencia

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Seguridad y responsabilidad

Antes de utilizar el instrumento

- ▶ Lea y siga las instrucciones de uso.
- ▶ Guarde estas instrucciones en un lugar visible para poder consultarlas más adelante.

RUDOLF Medical no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado o de una preparación y cuidado incorrectos.

En tales casos, la garantía quedará anulada.

Indicación

Este instrumento está diseñado para aplicaciones ginecológicas y se inserta por vía vaginal. Se utiliza para introducir medios de contraste y para posicionar el útero como preparación para la intervención posterior.

Contraindicaciones

Este instrumento no está diseñado para su uso en el sistema nervioso central ni en el sistema circulatorio.

Riesgo de infección

- ▶ Prepárelo antes de su uso.
- ▶ Prepare el instrumento antes de devolverlo al fabricante.

Riesgo de lesiones

- ▶ Utilice únicamente accesorios originales
- ▶ No utilice instrumentos dañados y no los repare

Contenido del suministro


- ▶ Después de desembalar, compruebe que ninguna de las piezas haya sufrido daños durante el transporte.
- ▶ En caso de reclamaciones, póngase en contacto con el fabricante.

↗ Consulte la última página para ver la dirección del fabricante.

i Si se pide el juego, se suministran dos adaptadores. Los adaptadores son de dos tamaños diferentes.

Descripción del producto

El útero se puede colocar en posición para la intervención utilizando el adaptador. Además, la perforación en el tubo cónico del adaptador facilita la instilación de medios de contraste con fines diagnósticos. El cono sella el cuello uterino.

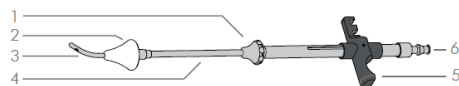

- 1 tuerca moleteada
- 2 Adaptador
- 3 Tubo adaptador con perforación
- 4 Vaina interna
- 5 Mango
- 6 Conexión LL

Datos técnicos

Condiciones de almacenamiento y transporte

- ▶ Transporte y almacene el instrumento únicamente con la protección adecuada

Vida útil del producto


≤1000 ciclos y ≤2 años

Montaje y desmontaje del instrumento


Montaje del instrumento

i El tamaño del adaptador se elige inmediatamente antes de la intervención, según el tamaño del cuello uterino.

- ▶ Colocar el resorte en la vaina interior.

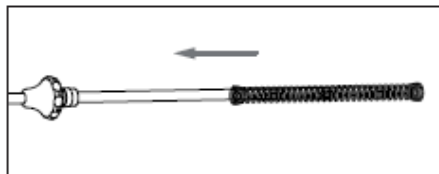


- ▶ Colocar la vaina exterior y atornillarla a la tuerca moleteada.

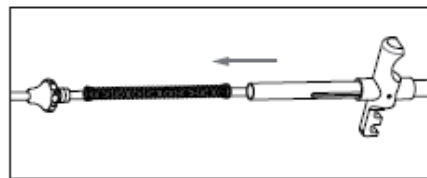


Desmontaje del instrumento

- ▶ Gire ligeramente el adaptador y retírelo.

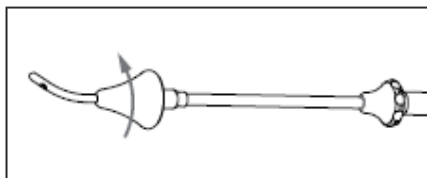

- ▶ Desenrosque la tuerca moleteada y extraiga el vástago exterior con el resorte.

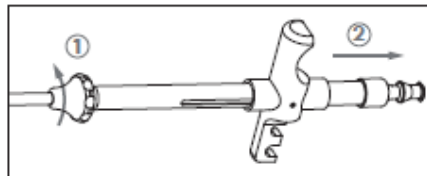


Aplicación

ADVERTENCIA


Riesgo de infección por instrumentos no estériles.

- ▶ Prepare el instrumento antes de su uso
- ▶ Elija el adaptador según el tamaño del cuello uterino.
- ▶ Coloque el adaptador y apriételo.

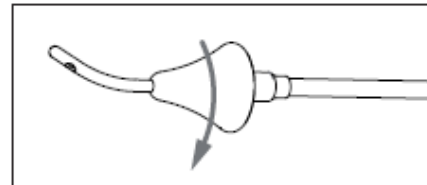


- ▶ Desenrosque ligeramente la tuerca moleteada y gire la vaina interna hasta la posición correcta, de modo que quede alineada con la punta del adaptador.

Manipulador uterino de Cohen

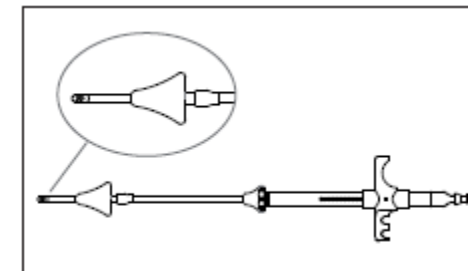

- ▶ Conecte la jeringa que contiene el medio de contraste a la conexión LL.
- ▶ Introduzca el instrumento en el orificio cervical.
- ▶ Coloque el adaptador según sea necesario y posicione el útero
- ▶ Inserte el tenáculo y sujete con cuidado el útero.

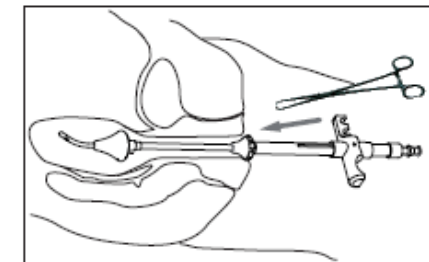

- ▶ Coloque el orificio para el dedo del tenáculo en el deslizador.
- ↳ El instrumento está bien colocado.
- ▶ Introduzca el medio de contraste mediante la jeringa.
- ▶ Prepare el instrumento.

Preparación

i

El instrumento debe desmontarse antes de la preparación.

↗ Véase la sección «Desmontaje del instrumento».
↗ Encontrará información detallada sobre la preparación y el cuidado en las Directrices para el cuidado, el mantenimiento y la limpieza DOK#301, disponibles por separado.

Almacenamiento

➤ Encontrará información detallada sobre el almacenamiento y el cuidado en las Directrices para el cuidado, el mantenimiento y la limpieza DOK#301

Eliminación

Una eliminación respetuosa con el medio ambiente permite reciclar materias primas valiosas.



Deseche el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con las directrices hospitalarias vigentes.

Información de seguridad y explicación de los símbolos

	Siga las instrucciones de uso
REF	Número de pedido
	No estéril
	Fabricante
	Marcado CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Alemania
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com