


D0436 / Rev.D / DCR01770

**Coheni emaka manipulaator**

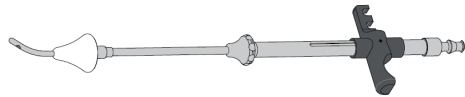

**Toote numbrid**

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

**Ohutus ja vastutus**

Enne seadme kasutamist

- ▶ Lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit.
- ▶ Hoidke käesolevad juhised kohas, kus need on hõlpsasti leitavad hilisemaks kasutamiseks.

RUDOLF Medical ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest või valest ettevalmistamisest ja hooldamisest. Sellistel juhtudel kaotab garantii kehtivuse.

**Näidustus**

See instrument on mõeldud günekoloogiliseks kasutamiseks ja viiakse sisse vaginaalselt. Seda kasutatakse kontrastainete manustamiseks ja emaka positsioneerimiseks järgneva protseduuri ettevalmistamisel.

**Vastunäidustused**

Seda instrumenti ei ole ette nähtud kasutamiseks kesknärvisüsteemis ega vereringesüsteemis.

**Infektsioonioht**

- ▶ Valmistage ette enne kasutamist.
- ▶ Valmistage instrument ette enne selle tagastamist tootjale.

**Vigastuste oht**

- ▶ Kasutage ainult originaalvarustust
- ▶ Ärge kasutage kahjustatud instrumente ega parandage neid


**Komplekt**

- ▶ Pärast lahtipakkimist kontrollige kõiki osi transpordi käigus tekkinud kahjustuste suhtes.
  - ▶ Kaebuste korral võtke ühendust tootjaga.
- ↗ Tootja aadress on esitatud viimasel lehel.

**i** Komplekti tellimisel on kaasas kaks adapterit. Adapterid on kahes eri suuruses.

**Toote kirjeldus**

Adapteri abil saab emaka paigutada protseduuri ettevalmistamiseks. Lisaks hõlbustab adapteri koonustu perforatsioon kontrastainete sisseviimist diagnostilistel eesmärkidel. Koonus sulgeb emakakaela.

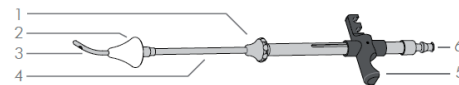

- 1 rihveldatud mutter
- 2 Adapter
- 3 Perforeeritud adaptertoru
- 4 Sisemine ümbris
- 5 Käepide
- 6 LL-ühendus

**Tehnilised andmed**

Hooldus- ja transporditingimused

- ▶ Transpordige ja ladustage instrumenti ainult sobiva kaitse all

**Toote eluiga**


≤1000 tsükli ja ≤2 aastat

**Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine**


**Seadme kokkupanek**

**i** Adapteri suurus valitakse vahetult enne operatsiooni vastavalt emakakaela suurusele.

- ▶ Paigaldage vedru sisemisse ümbrisesse.

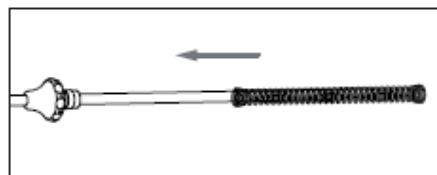


- ▶ Paigaldage välimine ümbris ja keerake see rihvelmutrile.

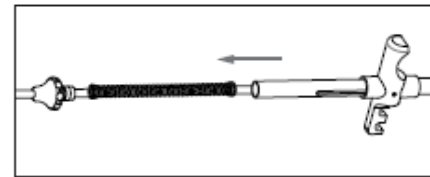


**Instrumenti lahtimonteerimine**

- ▶ Pöörake adapterit kergelt ja eemaldage see.

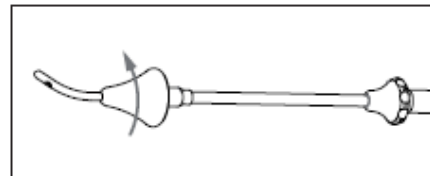

- ▶ Keerake rihvelmutrit lahti ja võtke välimine vars koos vedruga välja.

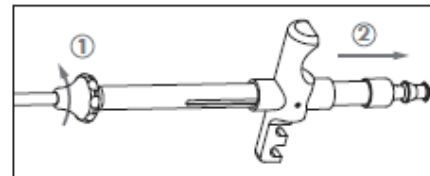


**Kasutamine**

**HOIATUS**


Mitte-steriilsete instrumentide kasutamisel on infektsioonioht.

- ▶ Valmistage instrument enne kasutamist ette
- ▶ Valige adapter vastavalt emakakaela suurusele.
- ▶ Paigaldage adapter ja pingutage see kinni.

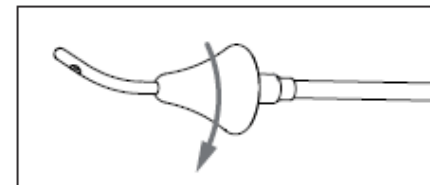


- ▶ Keerake rihvelmutrit veidi lahti ja pöörake sisemist ümbrist õigesse asendisse, nii et see oleks joondatud adapteri otsaga.

**Coheni emaka manipulaator**

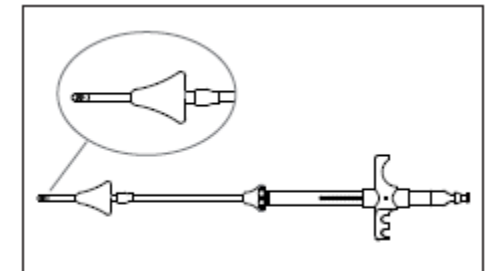

- ▶ Ühendage kontrastainet sisaldav süstla LL-ühendusega.
- ▶ Sisestage instrument emakakaela avausse.
- ▶ Asetage adapter vajalikku asendisse ja paigutage emakas
- ▶ Sisestage tenakulum ja haarake emakas ettevaatlikult kinni.

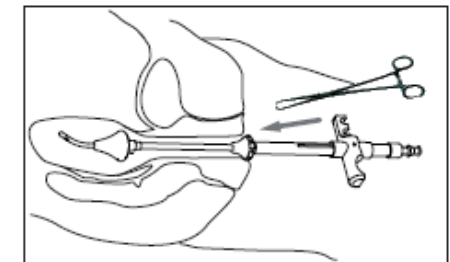

- ▶ Asetage tenakuli sõrmeauk liuguris.
- ↳ Seade on kindlalt paigaldatud.
- ▶ Süstige kontrastainet süstla abil.
- ▶ Valmistage instrument ette.

**Ettevalmistus**

**i**

Enne ettevalmistamist tuleb instrument lahti monteerida.  
 ↗ Vaadake jaotist „Seadme lahtivõtmine“.  
 ↗ Üksikasjalik teave ettevalmistamise ja hoolduse kohta on esitatud eraldi juhendis „Hooldus, hooldamine ja puhastamine DOK#301“

**Hooldamine**

↗ Täpsemat teavet ladustamise ja hoolduse kohta leiate eraldi juhendist „Hooldus, hooldus ja puhastamine DOK#301“

**Kõrvaldamine**

Keskkonnasõbralik kõrvaldamine võimaldab väärtuslikke tooraineid ringlusse võtta.



Kõrvaldage seade keskkonnasõbralikul viisil vastavalt kehtivatele haigla juhiste.

**Ohutusteave ja sümbolite selgitus**

	Järgige kasutusjuhendit
<b>REF</b>	Tellimisnumber
	Mitte-steriilne
	Tootja
	CE-märgis



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Saksamaa  
Tel. +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com