


**Manipulator maternice Cohen**

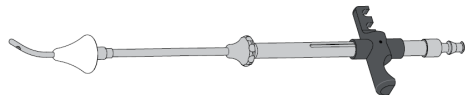

**Brojevi artikala**

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

**Sigurnost i odgovornost**

Prije uporabe instrumenta

- ▶ Pročitajte i slijedite upute za uporabu.
- ▶ Čuvajte ove upute na mjestu gdje su lako dostupne za kasniju upotrebu.

RUDOLF Medical ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili neispravnom pripremom i održavanjem.

U takvim slučajevima jamstvo gubi na snazi.

**Indikacija**

Ovaj instrument je namijenjen ginekološkim primjenama i uvodi se vaginalno. Koristi se za uvođenje kontrastnih medija i za pozicioniranje maternice u pripremi za naknadnu intervenciju.

**Kontraindikacija**

Ovaj instrument nije namijenjen za upotrebu na središnjem živčanom i krvotoknom sustavu.

**Rizik od infekcije**

- ▶ Pripremite prije upotrebe.
- ▶ Pripremite instrument prije povrata proizvođaču.

**Rizik od ozljede**

- ▶ Koristite samo originalne dodatke
- ▶ Ne koristite oštećene instrumente i ne popravljajte ih


**Opseg isporuke**

- ▶ Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove na eventualna oštećenja nastala tijekom transporta.
  - ▶ U slučaju reklamacija obratite se proizvođaču.
- Adresu proizvođača pogledajte na posljednjoj stranici.

➤ Ako je set naručen, isporučuju se dva adaptera. Adapteri su dviju različitih veličina.

**Opis proizvoda**

Maternica se pomoću adaptera može pozicionirati u pripremi za intervenciju. Osim toga, perforacija na konusnoj cijevi adaptera olakšava instilaciju kontrastnih medija u dijagnostičke svrhe. Konus zaptiva vrat maternice.

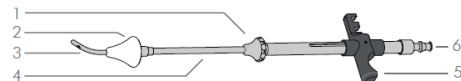

- 1 Matica s rebrastom glavom
- 2 Adapter
- 3 Cijev adaptera s perforacijom
- 4 Unutarnja navlaka
- 5 Drška
- 6 LL priključak

**Tehnički podaci**

Uvjeti skladištenja i transporta

- ▶ Instrument transportirajte i pohranjujte samo uz odgovarajuću zaštitu

**Vijek trajanja proizvoda**


≤1000 ciklusa i ≤2 godine

**Sklopanje i rastavljanje instrumenta**


**Sklopanje instrumenta**

➤ Veličina adaptera odabire se neposredno prije operacije, prema veličini vrata maternice.

- ▶ Postavite oprugu na unutarnju navlaku.

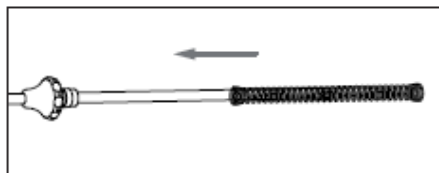


- ▶ Postavite vanjsku navlaku i zavijte je na nazubljenu maticu.

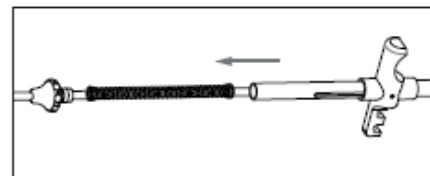


**Rastavljanje instrumenta**

- ▶ Lagano zavrnite adapter i izvadite ga.

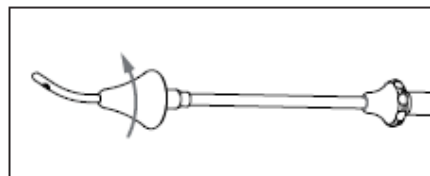

- ▶ Odvijte nazubljenu maticu i izvadite vanjsku osovinu s oprugom.

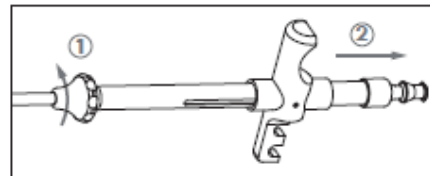


**Primjena**

**UPOZORENJE**


Rizik od infekcije zbog nesternih instrumenata.

- ▶ Pripremite instrument prije upotrebe
- ▶ Odaberite adapter prema veličini vrata maternice.
- ▶ Postavite adapter i zategnite ga.

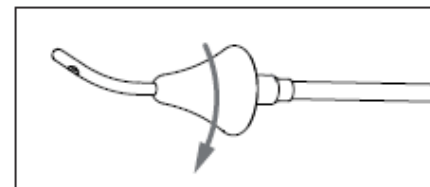


- ▶ Lagano odvrnite nazubljenu maticu i pomaknite unutarnju navlaku u ispravan položaj tako da bude poravnata s vrhom adaptera.

**Manipulator maternice Cohen**

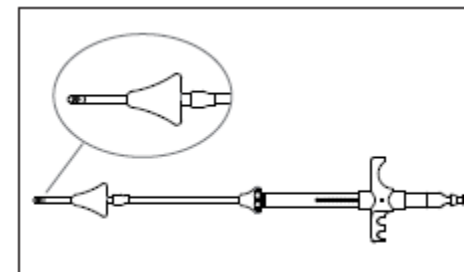

- ▶ Povežite špricu s kontrastnim medijem na LL priključak.
- ▶ Umetnite instrument u cervikalni otvor.
- ▶ Postavite adapter prema potrebi i pozicionirajte maternicu
- ▶ Umetnite tenaculum i pažljivo zgrabite maternicu.

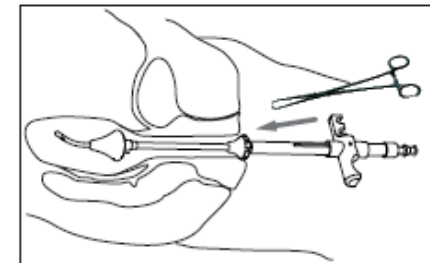

- ▶ Postavite otvor za prst tenakula u klizač.
- ↳ Instrument je sigurno pozicioniran.
- ▶ Uvedite kontrastno sredstvo putem šprice.
- ▶ Pripremite instrument.

**Priprema**



Instrument se mora rastaviti prije pripreme.  
➤ Pogledajte odjeljak "Rastavljanje instrumenta".  
➤ Detaljne informacije o pripremi i održavanju mogu se pronaći u zasebnim Smjernicama za njegu, održavanje i čišćenje DOK#301

**Skladištenje**

➤ Detaljne informacije o skladištenju i održavanju možete pronaći u zasebnim Smjernicama za njegu, održavanje i čišćenje DOK#301

**Odlaganje**

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje omogućuje recikliranje vrijednih sirovina.



Odložite uređaj na ekološki prihvatljiv način u skladu s važećim bolničkim smjernicama.

**Sigurnosne informacije i objašnjenje simbola**

	Slijedite upute za uporabu
<b>REF</b>	Broj narudžbe
	Nesterilan
	Proizvođač
	CE oznaka



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Njemačka  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com