


Cohen méhmanipulátor

**Cohen méhmanipulátor**

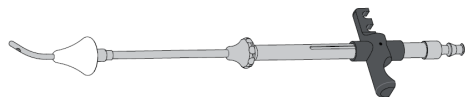

**Cikkszámok**

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

**Biztonság és felelősség**

A készülék használata előtt

- ▶ Olvassa el és kövesse a használati utasítást.
- ▶ Tartsa ezeket az utasításokat olyan helyen, ahol később könnyen megtalálja őket.

A RUDOLF Medical nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, illetve a helytelen előkészítésből és ápolásból eredő károkért.

Ilyen esetekben a jótállás érvényét veszti.

**Javallat**

Ez a műszer nőgyógyászati alkalmazásokra készült, és hüvelybe helyezik. Kontrasztanyagok bejuttatására és a méh pozicionálására szolgál a későbbi beavatkozás előkészítéseként.

**Ellenjavallat**

Ez a műszer nem alkalmas a központi idegrendszer és a keringési rendszer kezelésére.

**Fertőzésveszély**

- ▶ Használat előtt készítse elő.
- ▶ A műszert a gyártónak történő visszaküldés előtt készítse elő.

**Sérülésveszély**

- ▶ Kizárólag eredeti tartozékokat használjon
- ▶ Ne használjon sérült műszereket, és ne javítsa meg azokat

**A szállítási csomag tartalma**


- ▶ A kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nem sérült-e meg a szállítás során.
- ▶ Reklamáció esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

↗ A gyártó címét lásd az utolsó oldalon.

**i** A készlet megrendelése esetén két adaptert szállítunk. Az adapterek két különböző méretűek.

**Termékleírás**

Az adapter segítségével a méh beállítható a beavatkozás előkészítése során. Ezenkívül az adapter kúpos csövén található perforáció megkönnyíti a kontrasztanyag beadását diagnosztikai célokra. A kúp lezárja a méhnyakot.

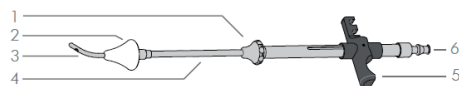

- 1 recézett anyá
- 2 Adapter
- 3 Perforált adaptercső
- 4 Belső hüvely
- 5 Fogantyú
- 6 LL csatlakozás

**Műszaki adatok**

Tárolási és szállítási feltételek

- ▶ A műszert kizárólag megfelelő védelemmel szállítsa és tárolja

**Termék élettartama**


≤1000 ciklus és ≤2 év

**A műszer összeszerelése és szétszerelése**


**A műszer összeszerelése**

**i** Az adapter méretét közvetlenül a műtét előtt kell kiválasztani, a méhnyak méretének megfelelően.

- ▶ Helyezze a rugót a belső hüvelyre.

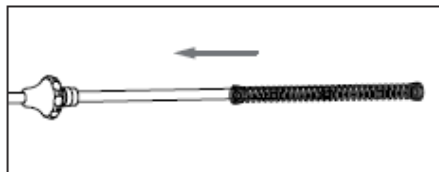


- ▶ Helyezze fel a külső hüvelyt, és csavarozza rá a recézett anyára.

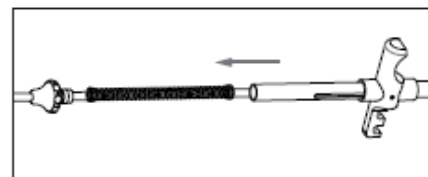


**A műszer szétszerelése**

- ▶ Forgassa el kissé az adaptert, és vegye le.

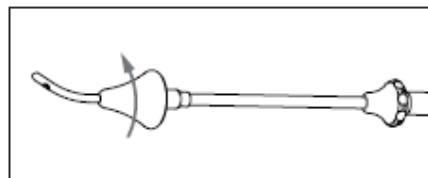

- ▶ Csavarja ki a recézett anyát, és vegye ki a külső tengelyt a rugóval együtt.

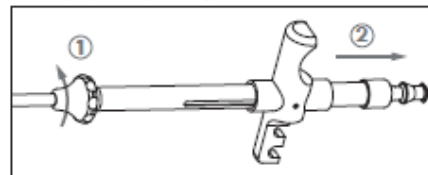


**Alkalmazás**


**FIGYELMEZTETÉS**

A nem steril műszerek használata fertőzésveszélyt jelent.


- ▶ Készítse elő a műszert a használat előtt
- ▶ Válassza ki a méhnyak méretének megfelelő adaptert.
- ▶ Helyezze fel az adaptert, és szorítsa meg.

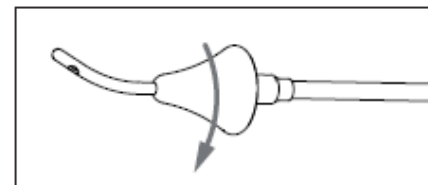

- ▶ Csavarja ki kissé a recézett anyát, és forgassa a belső hüvelyt a megfelelő helyzetbe úgy, hogy az egy vonalba kerüljön az adapter hegyével.

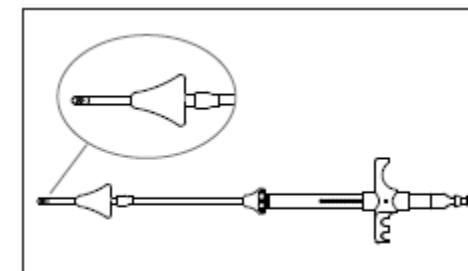

- ▶ Csatlakoztassa a kontrasztanyagot tartalmazó fecskendő az LL csatlakozóhoz.
- ▶ Helyezze be a műszert a méhnyaknyílásba.
- ▶ Helyezze el az adaptert a kívánt módon, és pozicionálja a méht
- ▶ Helyezze be a tenaculumot, és óvatosan fogja meg a méht.

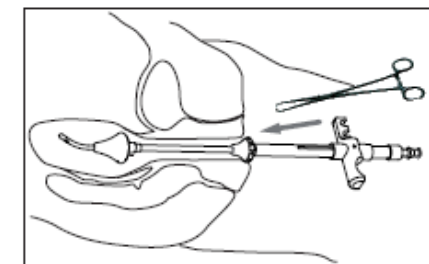

- ▶ Helyezze a tenaculum ujjlyukát a csúszkába.
- ↳ A műszer stabilan van rögzítve.
- ▶ A kontrasztanyagot fecskendővel juttassa be.
- ▶ Készítse elő a műszert.

**Előkészítés**

**i**

A műszert az előkészítés előtt szét kell szerelni.  
↗ Lásd a „A műszer szétszerelése” című részt.  
↗ Az előkészítéssel és ápolással kapcsolatos részletes információkat a különálló Ápolási, karbantartási és tisztítási útmutatóban (DOK#301) találja.

**Tárolás**

↗ A tárolással és ápolással kapcsolatos részletes információk a különálló Ápolási, karbantartási és tisztítási útmutatóban (DOK#301) található.

**Hulladékkezelés**

A környezetbarát ártalmatlanítás lehetővé teszi az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.



A készüléket a hatályos kórházi irányelveknek megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

**Biztonsági információk és a szimbólumok magyarázata**

	Kövesse a használati utasítást
<b>REF</b>	Rendelési szám
	Nem steril
	Gyártó
	CE jelölés



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Németország  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com