


Legstýring eftir Cohen

Legstýring eftir Cohen

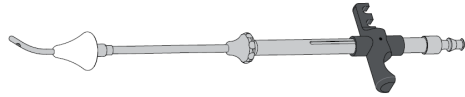

Vörunúmer

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Öryggi og ábyrgð

Áður en tækið er notað

- ▶ Lesið og fylgið leiðbeiningunum um notkun.
- ▶ Geymið þessar leiðbeiningar á stað þar sem auðvelt er að sjá þær til að vísa í þær síðar.

RUDOLF Medical ber enga ábyrgð á tjóni sem stafar af óviðeigandi notkun eða röngri undirbúningi og umhirðu. Í slíkum tilvikum fellur ábyrgðin niður.

Viðeigandi notkun

Þetta tæki er hannað fyrir kvennsjúkdóma og er sett inn í leggöng. Það er notað til að setja inn kontrastmiðil og til að staðsetja legið í undirbúningi fyrir næstu íhlutun.

Mótaðgerð

Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar á miðtaugakerfi né blóðrásarkerfi.

Sýkingarhætta

- ▶ Undirbúa áður en notað er.
- ▶ Undirbúa tækið áður en það er sent til framleiðanda.

Áhætta á meiðslum

- ▶ Notaðu eingöngu upprunalega aukahluti
- ▶ Ekki nota skemmd tæki og ekki gera við

Afhendingarsvið


- ▶ Eftir opnun, athugaðu alla hluti vegna skemmda sem kunna að hafa orðið við flutning.
- ▶ Ef kvartanir koma upp, hafið samband við framleiðandann.

↗ Fyrir heimilisfang framleiðanda, sjá síðustu síðu.

ⓘ Ef settið er pantað fylgja tveir millistykki. Millistykkin eru í tveimur mismunandi stærðum.

Vörulýsing

Legkúpuna er hægt að staðsetja til undirbúnings inngrips með aðlaga. Auk þess auðveldar gegnumgatan á keilulaga slöngunni við aðlaga innsprautu mótstöðuefnis í greiningarskyni. Keilan þéttir háls legkúpnar.

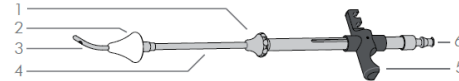

- 1 Knöggóttur mutter
- 2 Aðlögunarstykki
- 3 Aðlögunarrör með götum
- 4 Innri hulstur
- 5 Handfang
- 6 LL tenging

Tæknilegir gögn

Geymslu- og flutningsskilyrði

- ▶ Flytjið og geymið tækið eingöngu með viðeigandi vernd

Lífsferill vörunnar


≤1000 hringrásir og ≤2 ár

Samsetning og sundurliðun tækisins


Samsetning tækisins

ⓘ Stærð millistykkis er valin beint fyrir aðgerðina, í samræmi við stærð leghálsins.

- ▶ Settu gorminn í innri slíðuna.

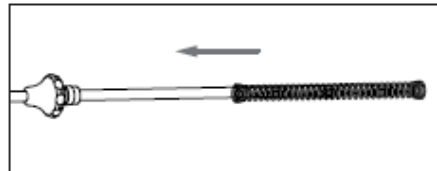


- ▶ Settu á ytri hulstur og skrúfaðu það á kornmótaða mött.

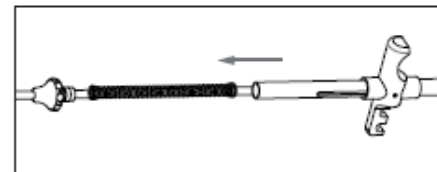


Rifun tækisins

- ▶ Snúðu aðlagaðan festingu örlítið og fjarlægðu hana.

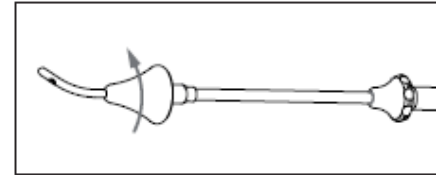


- ▶ Losaðu rillta möttinn og taktu út ytri skaftið með gormi.

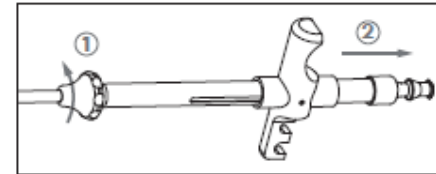


**Samsetning
VIÐVÖRUN**

Hætta á sýkingu vegna ósteríflra tækja.


- ▶ Undirbúa tækið áður en notkun hefst
- ▶ Veldu millistykki í samræmi við stærð hálsins.
- ▶ Settu festarann á og þrýstðu honum fast.

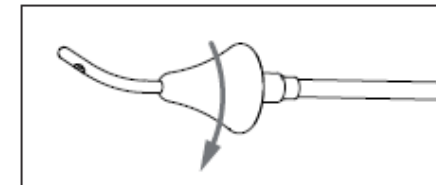

- ▶ Ljúktu af rilluðu mötlinum örlítið og snúðu innri hulstrinu í rétta stöðu þannig að það sé í línu við oddinn á millistykkinu.

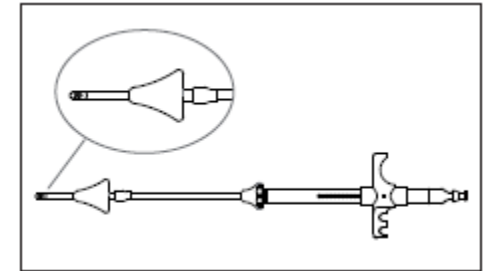

- ▶ Tengdu sprautu sem inniheldur kontrastmiðil við LL-tengið.
- ▶ Settu tækið inn í leghálsopið.
- ▶ Stilla aðlaga eftir þörfum og staðsetja legið
- ▶ Settu tenaculum og gripið varlega um legið.

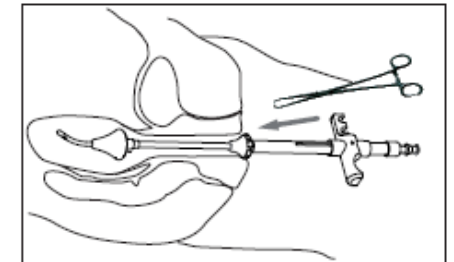

- ▶ Settu fingurgatið á tenakulumíð í rennarann.
- ↳ Tækið er örugglega staðsett.
- ▶ Sprautið kontrastmiðli í gegnum sprautuna.
- ▶ Undirbúa tækið.

Undirbúningur

ⓘ

Tækið skal sundurgreina áður en undirbúningur hefst.

↗ Sjá kafla "Rifun tækisins".

↗ Nánari upplýsingar um undirbúning og umönnun má finna í sérstökum leiðbeiningum um umönnun, viðhald og hreinsun DOK#301

Geymsla

↗ Nánari upplýsingar um geymslu og umönnun má finna í sérstökum leiðbeiningum um umönnun, viðhald og hreinsun DOK#301





Farga

Umhverfisvænt förgun gerir kleift að endurvinna verðmæt hráefni.



Fargaðu tækinu á umhverfisvænan hátt í samræmi við gildandi leiðbeiningar sjúkrahússins.

Öryggisupplýsingar og skýring á táknum

	Fylgja notkunarleiðbeiningum
REF	Pöntunarnúmer
	Ósýklalyf
	Framleiðandi
	CE-merki

