


Manipolatore uterino di Cohen

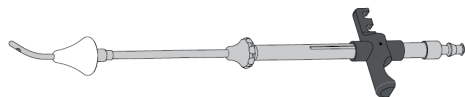

Codici articolo

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Sicurezza e responsabilità

Prima di utilizzare lo strumento

- ▶ Leggere e seguire le istruzioni per l'uso.
- ▶ Conservare queste istruzioni in un luogo ben visibile per poterle consultare in un secondo momento.

RUDOLF Medical non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o da una preparazione e cura errate.

In tali casi la garanzia decade.

Indicazioni

Questo strumento è progettato per applicazioni ginecologiche e viene inserito per via vaginale. Viene utilizzato per introdurre mezzi di contrasto e per posizionare l'utero in preparazione all'intervento successivo.

Controindicazioni

Questo strumento non è progettato per l'uso sul sistema nervoso centrale e circolatorio.

Rischio di infezione

- ▶ Preparare prima dell'uso.
- ▶ Preparare lo strumento prima di restituirlo al produttore.

Rischio di lesioni

- ▶ Utilizzare solo accessori originali
- ▶ Non utilizzare strumenti danneggiati e non ripararli

Contenuto della confezione


- ▶ Dopo aver disimballato il prodotto, controllare che nessuna parte abbia subito danni durante il trasporto.
- ▶ In caso di reclami, contattare il produttore.

↗ Per l'indirizzo del produttore, consultare l'ultima pagina.

i Se si ordina il set, vengono forniti due adattatori. Gli adattatori sono di due diverse dimensioni.

Descrizione del prodotto

L'utero può essere posizionato in preparazione all'intervento utilizzando l'adattatore. Inoltre, la perforazione sul tubo conico dell'adattatore facilita l'instillazione di mezzi di contrasto a fini diagnostici. Il cono sigilla la cervice.

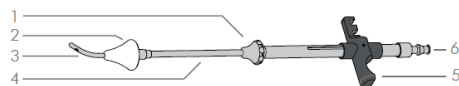

- 1 Dado zigrinato
- 2 Adattatore
- 3 Tubo dell'adattatore con foro
- 4 Guaina interna
- 5 Impugnatura
- 6 Attacco LL

Dati tecnici

Condizioni di stoccaggio e trasporto

- ▶ Trasportare e conservare lo strumento solo con un'adeguata protezione

Durata di vita del prodotto


≤1000 cicli e ≤2 anni

Montaggio e smontaggio dello strumento


Montaggio dello strumento

i La misura dell'adattatore va scelta immediatamente prima dell'intervento, in base alle dimensioni della cervice.

- ▶ Inserire la molla nella guaina interna.

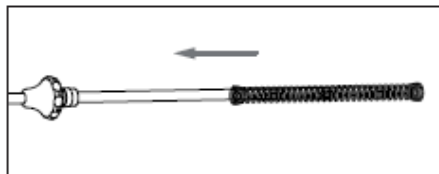


- ▶ Montare la guaina esterna e avvitarela al dado zigrinato.

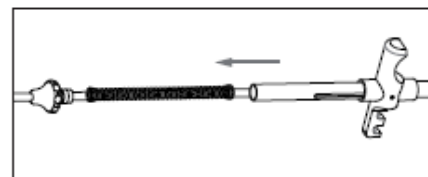


Smontaggio dello strumento

- ▶ Ruotare leggermente l'adattatore e rimuoverlo.

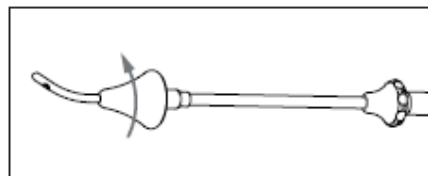

- ▶ Svitare il dado zigrinato ed estrarre l'asta esterna con la molla.

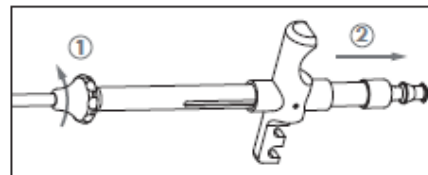


Applicazione

AVVERTENZA


Rischio di infezione da strumenti non sterili.

- ▶ Preparare lo strumento prima dell'uso
- ▶ Scegliere l'adattatore in base alle dimensioni della cervice.
- ▶ Montare l'adattatore e serrarlo.

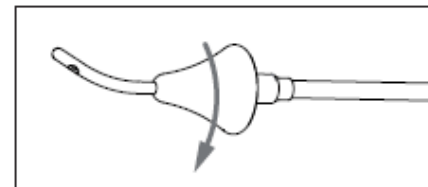


- ▶ Svitare leggermente il dado zigrinato e ruotare la guaina interna nella posizione corretta in modo che sia allineata con la punta dell'adattatore.

Manipolatore uterino di Cohen

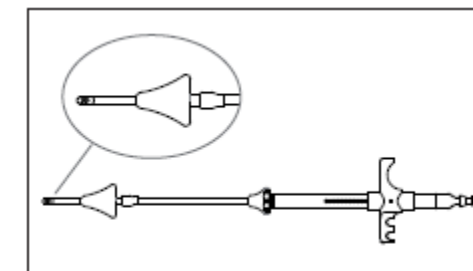

- ▶ Collegare la siringa contenente il mezzo di contrasto al raccordo LL.
- ▶ Inserire lo strumento nell'orifizio cervicale.
- ▶ Posizionare l'adattatore come richiesto e posizionare l'utero
- ▶ Inserire il tenaculum e afferrare con cura l'utero.

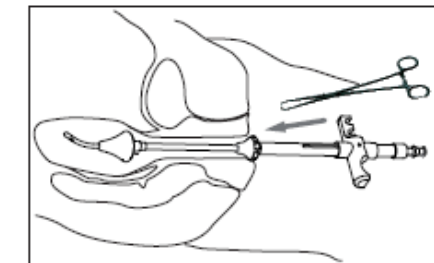

- ▶ Inserire il foro per il dito del tenaculum nel cursore.
- ↳ Lo strumento è posizionato in modo sicuro.
- ▶ Iniettare il mezzo di contrasto tramite la siringa.
- ▶ Preparare lo strumento.

Preparazione

i

Lo strumento deve essere smontato prima della preparazione.

↗ Vedere la sezione „Smontaggio dello strumento“.
↗ Informazioni dettagliate sulla preparazione e la cura sono disponibili nelle Linee guida separate per la cura, la manutenzione e la pulizia DOK#301

Conservazione

↗ Informazioni dettagliate sulla conservazione e la cura sono disponibili nelle Linee guida separate per la cura, la manutenzione e la pulizia DOK#301

Smaltimento

Uno smaltimento ecocompatibile consente il riciclaggio di materie prime preziose.



Smaltire il dispositivo in modo ecocompatibile, in conformità con le linee guida ospedaliere vigenti.

Informazioni sulla sicurezza e spiegazione dei simboli

	Seguire le istruzioni per l'uso
REF	Codice d'ordine
	Non sterile
	Produttore
	Marchio CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germania
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com