


Cohen dzemdes manipulators

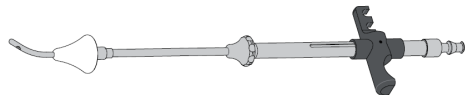

Preču numuri

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Drošība un atbildība

Pirms ierīces lietošanas

- ▶ Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas.
- ▶ Saglabājiet šīs instrukcijas vietā, kur tās ir viegli redzamas, lai vēlāk varētu ar tām iepazīties.

RUDOLF Medical neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai nepareizas sagatavošanas un kopšanas dēļ. Šādos gadījumos garantija zaudē spēku.

Indikācijas

Šis instruments ir paredzēts ginekoloģiskai lietošanai un tiek ievadīts makstī. To izmanto, lai ievadītu kontrastvielu un novietotu dzemdi, gatavojoties turpmākai iejaukšanai.

Kontrindikācijas

Šis instruments nav paredzēts lietošanai centrālajā nervu un asinsrites sistēmā.

Infekcijas risks

- ▶ Sagatavojiet pirms lietošanas.
- ▶ Sagatavojiet instrumentu pirms tā nosūtīšanas atpakaļ ražotājam.

Traumas risks

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus
- ▶ Nelietojiet bojātus instrumentus un neveiciet to remontu


Komplektācijā

- ▶ Pēc izpakošanas pārbaudiet visas detaļas, lai pārliecinātos, vai tās nav bojātas transportēšanas laikā.
 - ▶ Ja ir sūdzības, sazinieties ar ražotāju.
- ⌚ Ražotāja adrese ir norādīta pēdējā lapā.

i Ja pasūtīts komplekts, tiek piegādāti divi adapteri. Adapteri ir divu dažādu izmēru.

Produkta apraksts

Izmantojot adapteri, dzemde var tikt novietota pareizā pozīcijā, gatavojoties iejaukšanai. Turklāt perforācija uz adaptera konusa caurules atvieglo kontrastvielas ievadīšanu diagnostikas nolūkos. Konuss noslēdz dzemdes kaklu.

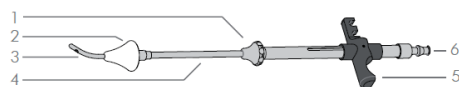

- 1 Rievota uzgriežņa
- 2 Adapters
- 3 Adaptera caurule ar perforāciju
- 4 Iekšējais apvalks
- 5 Rokturis
- 6 LL savienojums

Tehniskie dati

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

- ▶ Instrumentu transportējiet uzglabājiet tikai ar atbilstošu aizsardzību

Produkta kalpošanas ilgums


≤1000 cikli un ≤2 gadi

Instrumenta montāža un demontāža


Instrumenta montāža

i Adaptera izmēru izvēlas tieši pirms operācijas, ņemot vērā dzemdes kakla izmēru.

- ▶ Uzstādiat atsperi uz iekšējā apvalka.

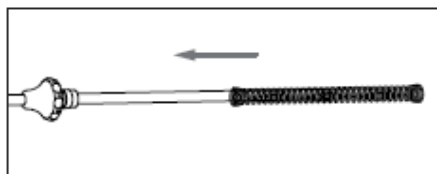


- ▶ Uzlieciet ārējo apvalku un pieskrūvējiet to rievotajai uzgriežņai.

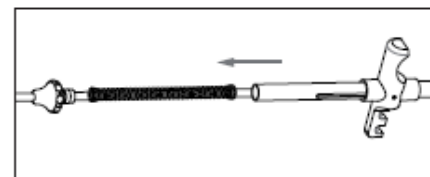


Instrumenta izjaukšana

- ▶ Viegli pagrieziet adapteri un noņemiet to.

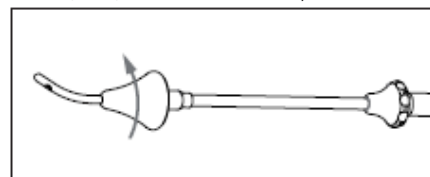

- ▶ Atskrūvējiet rievoto uzgali un izņemiet ārējo vārpstu ar atsperi.

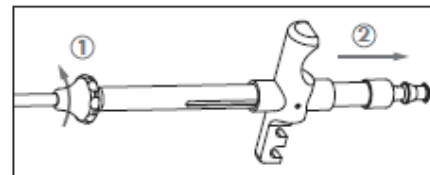


Lietošana

BRĪDINĀJUMS


Infekcijas risks no nesteriliem instrumentiem.

- ▶ Sagatavojiet instrumentu pirms lietošanas
- ▶ Izvēlieties adapteri atbilstoši dzemdes kakla izmēram.
- ▶ Uzstādiat adapteri un pievelciet to.

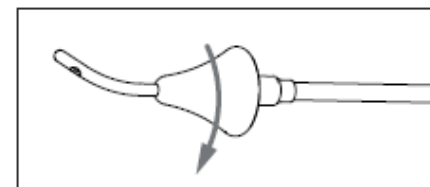


- ▶ Nedaudz atskrūvējiet rievoto uzgali un pagrieziet iekšējo apvalku pareizajā stāvoklī, lai tas būtu vienā līnijā ar adaptera galu.

Cohen dzemdes manipulators

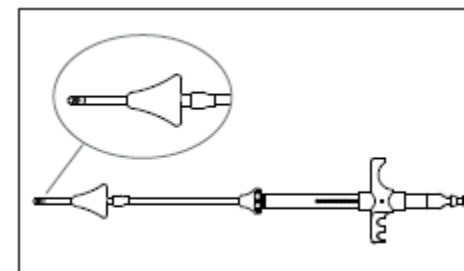

- ▶ Pievienojiet šļirci ar kontrastvielu pie LL savienojuma.
- ▶ Ievietojiet instrumentu dzemdes kakla atverē.
- ▶ Novietojiet adapteri atbilstoši vajadzībai un novietojiet dzemdi
- ▶ Ievietojiet tenakulu un uzmanīgi satveriet dzemdi.

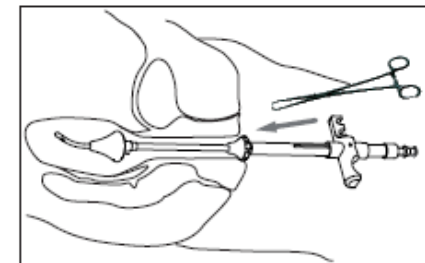

- ▶ Ievietojiet tenakula pirksta caurumu slīdē.
- ↳ Instruments ir droši nostiprināts.
- ▶ Ievadiet kontrastvielu ar šļirci.
- ▶ Sagatavojiet instrumentu.

Sagatavošana

i

Pirms sagatavošanas instruments ir jāizjauc.

- ⌚ Skatīt sadaļu „Instrumenta izjaukšana”.
- ⌚ Sīkāka informācija par sagatavošanu un kopšanu atrodama atsevišķajās Kopšanas, uzturēšanas un tīrīšanas vadlīnijās DOK#301

Uzglabāšana

- ⌚ Sīkāka informācija par uzglabāšanu un kopšanu atrodama atsevišķajās Kopšanas, apkopes un tīrīšanas vadlīnijās DOK#301

Utilizācija

Videi draudzīga iznīcināšana ļauj pārstrādāt vērtīgas izejvielas.



Izklaidējiet ierīci videi draudzīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajām slimnīcas vadlīnijām.

Drošības informācija un simbolu skaidrojums

	ievērojiet lietošanas instrukcijas
REF	Pasūtījuma numurs
	Nesterils
	Ražotājs
	CE marķējums



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Vācija
Tālrunis: +49 7463 9956-0
Fakss: +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com