


Baarmoedermanipulator van Cohen

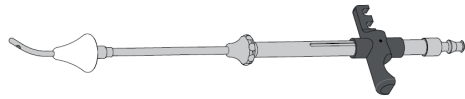

Artikelnummers

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Veiligheid en verantwoordelijkheid

Voor gebruik

- ▶ Lees en volg de gebruiksaanwijzing.
- ▶ Bewaar deze instructies op een goed zichtbare plaats, zodat u ze later kunt raadplegen.

RUDOLF Medical aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of onjuiste voorbereiding en onderhoud. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Indicatie

Dit instrument is ontworpen voor gynaecologische toepassingen en wordt vaginaal ingebracht. Het wordt gebruikt om contrastmiddelen in te brengen en de baarmoeder te positioneren ter voorbereiding op de daaropvolgende ingreep.

Contra-indicatie

Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik op het centrale zenuwstelsel en de bloedsomloop.

Risico op infectie

- ▶ Bereid het instrument voor op gebruik.
- ▶ Maak het instrument schoon voordat u het terugstuurt naar de fabrikant.

Risico op letsel

- ▶ Gebruik uitsluitend originele accessoires
- ▶ Gebruik geen beschadigde instrumenten en repareer deze niet

Leveringsomvang


- ▶ Controleer na het uitpakken alle onderdelen op eventuele transportschade.
- ▶ Neem bij klachten contact op met de fabrikant.

↗ Zie de laatste pagina voor het adres van de fabrikant.

i Als de set wordt besteld, worden twee adapters meegeleverd. De adapters hebben twee verschillende maten.

Productbeschrijving

De baarmoeder kan met behulp van de adapter in de juiste positie worden gebracht ter voorbereiding op de ingreep. Bovendien vergemakkelijkt de perforatie in de conische buis van de adapter het inbrengen van contrastmiddelen voor diagnostische doeleinden. De conus sluit de baarmoederhals af.

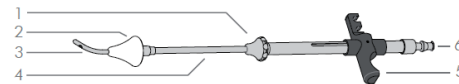

- 1 kartelmoer
- 2 Adapter
- 3 Adapterbuis met perforatie
- 4 Binnenste huls
- 5 Handgreep
- 6 LL-aansluiting

Technische gegevens

Opslag- en transportvoorwaarden

- ▶ Het instrument mag alleen met de juiste bescherming worden vervoerd en opgeslagen

Levensduur


≤1000 cycli en ≤2 jaar

Montage en demontage van het instrument


Montage van het instrument

i De maat van de adapter wordt vlak voor de operatie gekozen, afhankelijk van de grootte van de baarmoederhals.

- ▶ Bevestig de veer aan de binnenste huls.

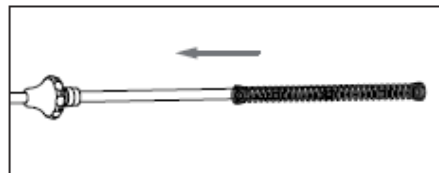


- ▶ Plaats de buitenste huls en schroef deze vast op de kartelmoer.

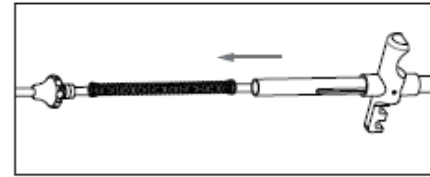


Demontage van het instrument

- ▶ Draai de adapter lichtjes en verwijder deze.

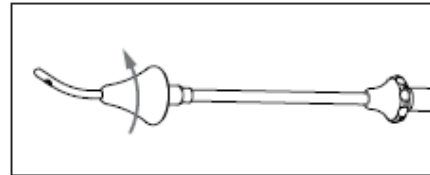

- ▶ Draai de kartelmoer los en haal de buitenste schacht met veer eruit.

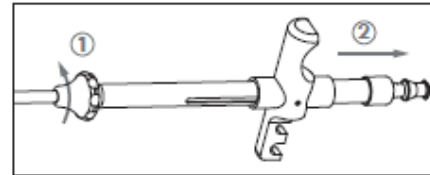


Toepassing


WAARSCHUWING

Risico op infectie door niet-steriele instrumenten.


- ▲ Bereid het instrument voor op het gebruik
- ▶ Kies de adapter op basis van de grootte van de baarmoederhals.
- ▶ Plaats de adapter en draai deze vast.

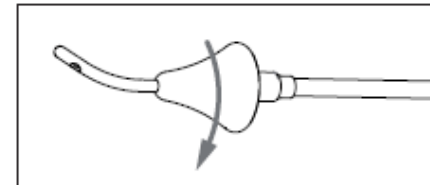

- ▶ Draai de kartelmoer iets los en draai de binnenste huls in de juiste positie, zodat deze is uitgelijnd met de punt van de adapter.

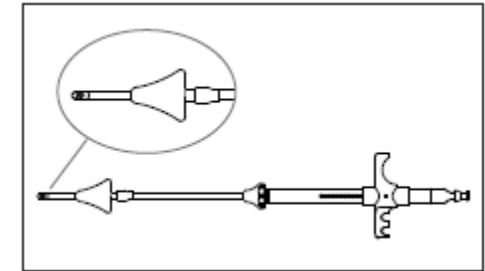

- ▶ Sluit de spuit met contrastmiddel aan op de LL-aansluiting.
- ▶ Breng het instrument in de baarmoederhalsopening.
- ▶ Plaats de adapter zoals vereist en positioneer de baarmoeder
- ▶ Breng de tenaculum in en pak de baarmoeder voorzichtig vast.

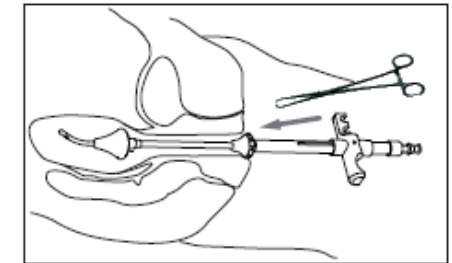

- ▶ Plaats het vingergat van de tenaculum in de schuif.
- ↳ Het instrument is stevig op zijn plaats gezet.
- ▶ Breng contrastmiddel in via de spuit.
- ▶ Bereid het instrument voor.

Vorbereiding

i Het instrument moet vóór de voorbereiding worden gedemonteerd.
↗ Zie het hoofdstuk „Demontage van het instrument“.
↗ Gedetailleerde informatie over voorbereiding en onderhoud vindt u in de aparte Richtlijnen voor onderhoud, verzorging en reiniging DOK#301

Opslag

↗ Gedetailleerde informatie over opslag en onderhoud is te vinden in de aparte Richtlijnen voor Onderhoud, Verzorging en Reiniging DOK#301

Afvalverwerking

Milieuvriendelijke afvalverwerking maakt recycling van waardevolle grondstoffen mogelijk.



Voer het apparaat op milieuvriendelijke wijze af volgens de geldende ziekenhuisrichtlijnen.

Veiligheidsinformatie en uitleg van symbolen

	Volg de gebruiksaanwijzing
REF	Bestelnummer
	Niet-steriel
	Fabrikant
	CE-markering



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Duitsland
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com