


D0436 / Rev.D / DCR001770

Livmormanipulator av Cohen

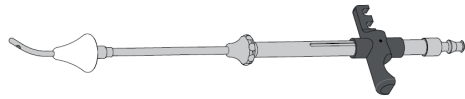

Varenummer

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Sikkerhet og ansvar

Før du bruker instrumentet

- ▶ Les og følg bruksanvisningen.
 - ▶ Oppbevar disse instruksjonene på et sted hvor de er lett synlige, slik at du kan slå opp i dem senere.
- RUDOLF Medical påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av feil bruk eller feil klargjøring og vedlikehold. I slike tilfeller bortfaller garantien.

Indikasjon

Dette instrumentet er beregnet på gynekologiske anvendelser og føres inn vaginalt. Det brukes til å innføre kontrastmiddel og til å posisjonere livmoren som forberedelse til det påfølgende inngrepet.

Kontraindikasjon

Dette instrumentet er ikke beregnet for bruk på sentralnervesystemet og sirkulasjonssystemet.

Risiko for infeksjon

- ▶ Forbered før bruk.
- ▶ Klargjør instrumentet før det returneres til produsenten.

Risiko for skade

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør
- ▶ Ikke bruk skadede instrumenter, og ikke reparer dem


Leveringsomfang

- ▶ Etter utpakking må du kontrollere alle delene for eventuelle transportskader.
 - ▶ Ved reklamasjoner, kontakt produsenten.
- ↗ Se siste side for produsentens adresse.

i Hvis settet bestilles, følger det med to adaptere. Adapterne har to forskjellige størrelser.

Produktbeskrivelse

Livmoren kan posisjoneres i forberedelse til inngrepet ved hjelp av adapteren. I tillegg letter perforeringen på adapterens koniske rør innføring av kontrastmiddel til diagnostiske formål. Konen forsegler livmorhalsen.

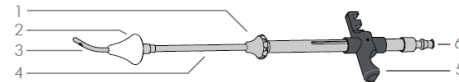

- 1 Rillet mutter
- 2 Adapter
- 3 Adaptorrør med perforering
- 4 Innvendig hylse
- 5 Håndtak
- 6 LL-tilkobling

Tekniske data

Oppbevarings- og transportbetingelser

- ▶ Instrumentet må kun transporteres og oppbevares med passende beskyttelse

Produktets levetid


≤1000 sykluser og ≤2 år

Montering og demontering av instrumentet


Montering av instrumentet

i Størrelsen på adapteren velges umiddelbart før operasjonen, i henhold til størrelsen på livmorhalsen.

- ▶ Sett fjæren på den indre hylsen.

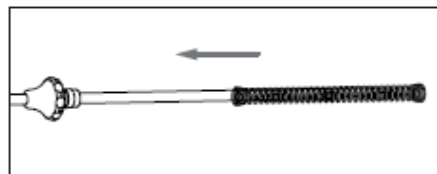


- ▶ Sett på ytre hylse og skru den fast til riflet mutter.

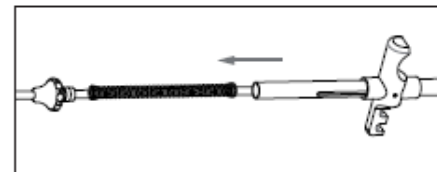


Demontering av instrumentet

- ▶ Vri adapteren litt og fjern den.

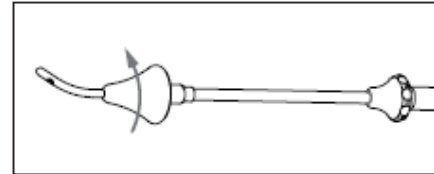


- ▶ Skru av den riflede mutteren og ta ut den ytre skafet med fjæren.

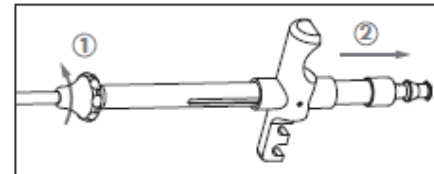

Bruk
ADVARSEL


Fare for infeksjon fra ikke-sterile instrumenter.

- ▶ Klargjør instrumentet før bruk
- ▶ Velg adapter i henhold til størrelsen på livmorhalsen.
- ▶ Sett på adapteren og stram den.

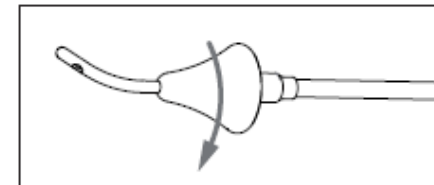


- ▶ Skru den riflede mutteren litt løs og vri den indre hylsen til riktig posisjon, slik at den er på linje med spissen av adapteren.

Livmormanipulator av Cohen

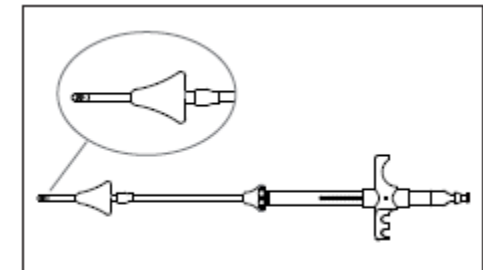

- ▶ Koble sprøyten som inneholder kontrastmiddel til LL-tilkoblingen.
- ▶ Før instrumentet inn i livmorhalsåpningen.
- ▶ Plasser adapteren som ønsket og plasser livmoren.
- ▶ Sett inn tenakulomet og ta forsiktig tak i livmoren.

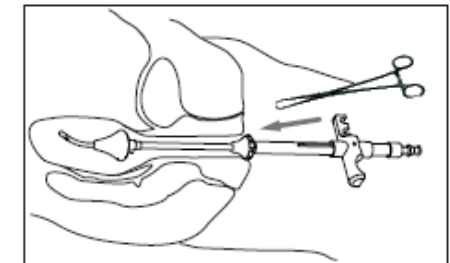

- ▶ Sett fingerhullet på tenakulomet inn i glidebryteren.
- ↳ Instrumentet er plassert sikkert.
- ▶ Injiser kontrastmiddel via sprøyten.
- ▶ Klargjør instrumentet.

Klargjøring

i Instrumentet må demonteres før klargjøring.
↗ Se avsnittet «Demontering av instrumentet».
↗ Detaljert informasjon om klargjøring og vedlikehold finnes i de separate retningslinjene for vedlikehold, pleie og rengjøring DOK#301

Oppbevaring

↗ Detaljert informasjon om oppbevaring og vedlikehold finnes i de separate retningslinjene for vedlikehold, pleie og rengjøring DOK#301

D0436 / Rev.D / DCR001770

Livmormanipulator av Cohen

Avhending

Miljøvennlig avhending gjør det mulig å resirkulere verdifulle råvarer.



Kast enheten på en miljøvennlig måte i henhold til gjeldende retningslinjer for sykehus.

Sikkerhetsinformasjon og forklaring av symboler

	Følg bruksanvisningen
REF	Bestillingsnummer
	Ikke-sterilt
	Produsent
	CE-merke



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com