


Manipulator za maternico po Cohenu

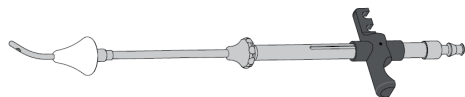

Številke artiklov

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Varnost in odgovornost

Pred uporabo instrumenta

- ▶ Preberite in upoštevajte navodila za uporabo.
- ▶ Navodila shranite na vidnem mestu, da jih boste lahko kasneje uporabili.

RUDOLF Medical ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe ali nepravilne priprave in vzdrževanja.

V takih primerih garancija preneha veljati.

Indikacija

Ta instrument je namenjen ginekološkim posegom in se vstavi v vagino. Uporablja se za vnos kontrastnih sredstev in za namestitve maternice v pripravah na nadaljnji poseg.

Kontraindikacije

Ta instrument ni namenjen uporabi na centralnem živčnem in krvnem sistemu.

Tveganje okužbe

- ▶ Pripravite pred uporabo.
- ▶ Instrument pripravite, preden ga vrnete proizvajalcu.

Nevarnost poškodb

- ▶ Uporabljajte samo originalno opremo
- ▶ Ne uporabljajte poškodovanih instrumentov in jih ne popravljajte


Vsebina dobave

- ▶ Po razpakiranju preverite vse dele, ali so med prevozom utrpeli poškodbe.
 - ▶ V primeru reklamacij se obrnite na proizvajalca.
- Naslov proizvajalca najdete na zadnji strani.

➤ Če je naročen komplet, sta priložena dva adapterja. Adapterja sta dveh različnih velikosti.

Opis izdelka

Maternico je mogoče pripraviti na poseg s pomočjo adapterja. Poleg tega perforacija na stožčasti cevi adapterja olajša vbrizgavanje kontrastnega sredstva za diagnostične namene. Stožec zapre maternični vrat.

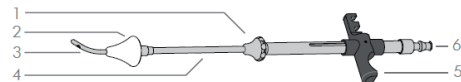

- 1 matirana matica
- 2 Adapter
- 3 Cev adapterja z odprtino
- 4 Notranji plašč
- 5 Ročaj
- 6 LL priključek

Tehnični podatki

Pogoji za shranjevanje in prevoz

- ▶ Instrument prevažajte in shranjujte le z ustrezno zaščito

Življenjska doba izdelka


≤1000 ciklov in ≤2 leti

Sestavljanje in razstavljanje instrumenta


Sestavljanje instrumenta

➤ Velikost adapterja se izbere tik pred operacijo, glede na velikost materničnega vratu.

- ▶ Na notranji plašč namestite vzmet.

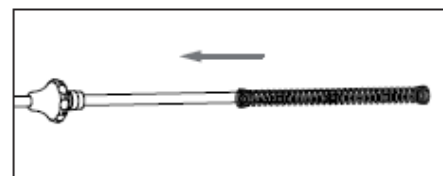


- ▶ Namestite zunanji plašč in ga privijte na narebričeno matico.

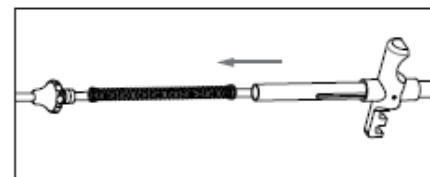


Razstavljanje instrumenta

- ▶ Adapter rahlo zavrtite in ga odstranite.

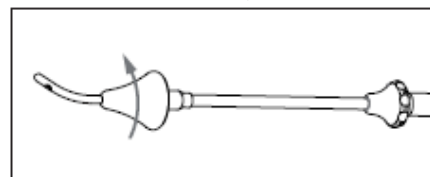

- ▶ Odvijte narebričeno matico in izvlecite zunanji drog z vzmetjo.

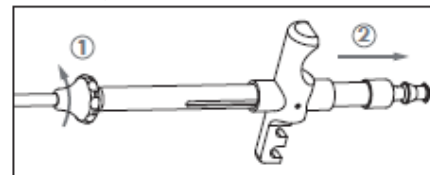


Uporaba


OPOZORILO

Nevarnost okužbe zaradi nesterilnih instrumentov.


- ▶ Instrument pripravite pred uporabo
- ▶ Izberite adapter glede na velikost materničnega vratu.
- ▶ Namestite adapter in ga privijte.

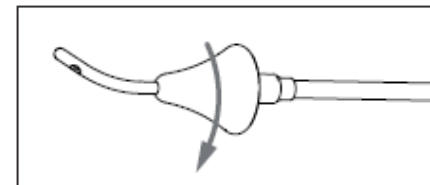

- ▶ Rahlo odvijte nazobčano matico in zavrtite notranji plašč v pravilni položaj, tako da je poravnan z vrhom adapterja.

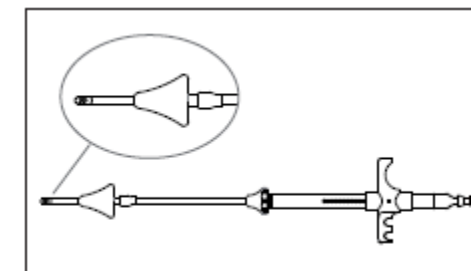

- ▶ Brizgo s kontrastnim sredstvom priključite na priključek LL.
- ▶ Instrument vstavite v maternični vrat.
- ▶ Namestite adapter po potrebi in namestite maternico
- ▶ Vstavite tenakulum in previdno primite maternico.

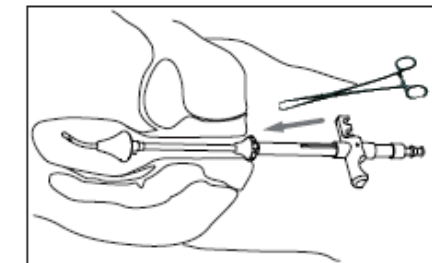

- ▶ Vstavite luknjo za prst tenakula v drsnik.
- ↳ Instrument je trdno nameščen.
- ▶ Vbrizgajte kontrastno sredstvo s pomočjo brizge.
- ▶ Pripravite instrument.

Priprava



Instrument je treba pred pripravo razstaviti.
➤ Glejte poglavje „Razstavljanje instrumenta“.
➤ Podrobne informacije o pripravi in vzdrževanju najdete v ločenih Smernicah za nego, vzdrževanje in čiščenje DOK#301

Shranjevanje

➤ Podrobne informacije o shranjevanju in negi najdete v ločenih Smernicah za nego, vzdrževanje in čiščenje DOK#301

Odlaganje

Okolju prijazno odstranjevanje omogoča recikliranje dragocenih surovin.



Napravo odstranite na okolju prijazen način v skladu z veljavnimi bolnišničnimi smernicami.

Varnostne informacije in razlaga simbolov

	Upoštevajte navodila za uporabo
REF	Številka naročila
	Nesterilno
	Proizvajalec
	Oznaka CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Nemčija
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com