


D0436 / Rev.D / DCR01770

**Livmodermanipulator av Cohen**

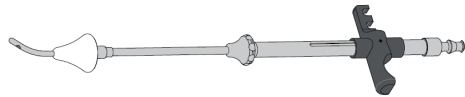

**Artikelnummer**

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

**Säkerhet och ansvar**

Innan instrumentet används

- ▶ Läs och följ bruksanvisningen.
- ▶ Förvara dessa instruktioner på en plats där de är lättillgängliga för framtida bruk.

RUDOLF Medical tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller felaktig förberedelse och skötsel.

I sådana fall upphör garantin att gälla.

**Indikation**

Detta instrument är avsett för gynekologiska tillämpningar och förs in vaginalt. Det används för att införa kontrastmedel och för att positionera livmodern inför det efterföljande ingreppet.

**Kontraindikation**

Detta instrument är inte avsett för användning på centrala nervsystemet och cirkulationssystemet.

**Infektionsrisk**

- ▶ Förbered före användning.
- ▶ Förbered instrumentet innan det returneras till tillverkaren.

**Risk för skada**

- ▶ Använd endast originaltillbehör
- ▶ Använd inte skadade instrument och försök inte reparera dem


**Leveransomfattning**

- ▶ Kontrollera alla delar efter uppackningen för eventuella transportskador.
  - ▶ Vid reklamationer, kontakta tillverkaren.
- ↗ Tillverkarens adress finns på sista sidan.

**i** Om satsen beställs medföljer två adaptrar. Adaptrarna har två olika storlekar.

**Produktbeskrivning**

Uterus kan positioneras inför ingreppet med hjälp av adaptern. Dessutom underlättar perforeringen på adapterkonröret inställning av kontrastmedel för diagnostiska ändamål. Konen tätar livmoderhalsen.

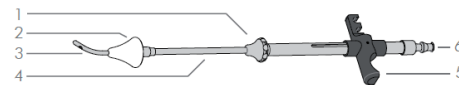

- 1 Räfflad mutter
- 2 Adapter
- 3 Adapterrör med perforering
- 4 Inre hylsa
- 5 Handtag
- 6 LL-anslutning

**Tekniska data**

Förvarings- och transportförhållanden

- ▶ Instrumentet får endast transporteras och förvaras med lämpligt skydd

**Produktens livslängd**


≤1000 cykler och ≤2 år

**Montering och demontering av instrumentet**


**Montering av instrumentet**

**i** Adapterns storlek väljs omedelbart före operationen, beroende på livmoderhalsens storlek.

- ▶ Sätt fast fjädern på den inre hylsan.

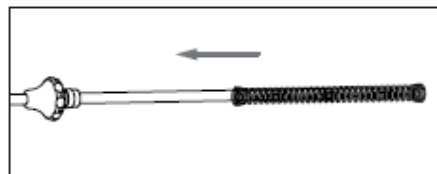


- ▶ Sätt på ytterhylsan och skruva fast den på den räfflade muttern.

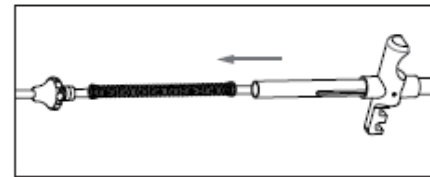


**Demontering av instrumentet**

- ▶ Vrid adaptern något och ta bort den.

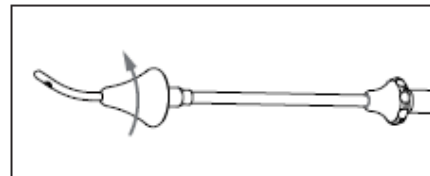

- ▶ Skruva loss den räfflade muttern och ta ut den yttre axeln med fjädern.

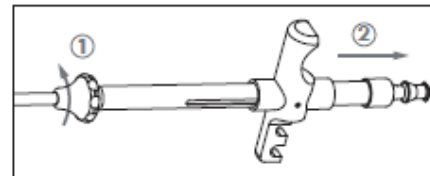


**Användning**

**VARNING**


Risk för infektion från icke-sterila instrument.

- ▲ Förbered instrumentet före användning
- ▶ Välj adapter efter livmoderhalsens storlek.
- ▶ Sätt på adaptern och dra åt den.

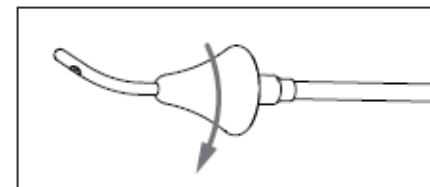


- ▶ Skruva loss den räfflade muttern något och vrid den inre hylsan till rätt läge så att den ligger i linje med adapterns spets.

**Livmodermanipulator av Cohen**

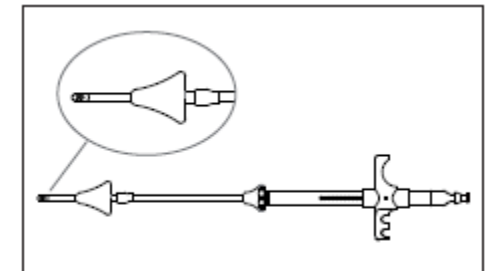

- ▶ Anslut sprutan med kontrastmedel till LL-anslutningen.
- ▶ För in instrumentet i livmoderhalsöppningen.
- ▶ Placera adaptern efter behov och placera livmodern
- ▶ För in tenakulomet och greppa livmodern försiktigt.

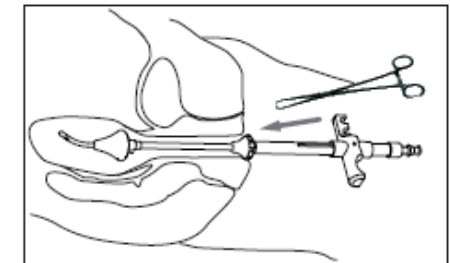

- ▶ Sätt fast tenakulomet's fingerhåll i skjutreglaget.
- ↳ Instrumentet är ordentligt på plats.
- ▶ Injicera kontrastmedel med sprutan.
- ▶ Förbered instrumentet.

**Förberedelse**

**i**

Instrumentet måste demonteras före förberedelsen.  
↗ Se avsnittet "Demontering av instrumentet".  
↗ Detaljerad information om förberedelse och skötsel finns i de separata riktlinjerna för skötsel, underhåll och rengöring DOK#301

**Förvaring**

↗ Detaljerad information om förvaring och skötsel finns i de separata riktlinjerna för skötsel, underhåll och rengöring DOK#301

**Avfallshantering**

Miljövänlig avfallshantering gör det möjligt att återvinna värdefulla råvaror.



Kassera enheten på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande sjukhusriktlinjer.

**Säkerhetsinformation och förklaring av symboler**

	Följ bruksanvisningen
<b>REF</b>	Beställningsnummer
	Icke-sterilt
	Tillverkare
	CE-märkning



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Tyskland  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com