

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (LT)
STEMINIAI



RUDOLF Medical GmbH + Co KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Vokietija
Tel. +49 7463 9956-0
Faksas +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0560 / Rev C / ACR00397 / 2026-04-02

PRAŠOME PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ IR LAIKYTI SAUGIOJE VIETOJE



RUDOLF Medical kamertonai tiekiami nesterilūs, todėl prieš pirmąjį naudojimą ir iškart po kiekvieno naudojimo juos būtina nuvalyti ir dezinfekuoti.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Kamertonai skirti naudoti kaip akustiniai rezonatoriai, siekiant diagnozuoti paciento klausos gebėjimus per oro ir kaulų garsą bei patikrinti vibracijos pojūčių jautrumą.

⚠️ ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Netinkamas naudojimas ir perkrovimas sukant ar sveriant gali sukelti lūžius ir negrįžtamą deformaciją.
- Nenaudokite metalinių šepetėlių ar abrazyvinių valiklių, nes paviršiaus pažeidimas gali sukelti koroziją.

PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ: VIZUALINIS IR FUNKCINIS PATIKRINIMAS

Patikrinkite, ar nėra:

- Išorinius pažeidimus (pvz., įlenkimus, atplaišas, įtrūkimus ar aštirus kraštus)

NAUDOJIMAS

Trumpai sudavus kamertonui, pvz., nykščio pagalvėle arba medžio ar plastiko gabalėliu, jis pradeda vibruoti ir tada naudojamas diagnostikai.



Kamertoną jokia būdu negalima mušti į metalinį ar panašų daiktą, nes kyla pavojus jį sugadinti.

Modeliai (versijos):



(1) = **Kamertonas be kojelės**

(2) = **Kamertonas su plastikiniais kojėlėmis**

Kamertonai su kojele leidžia švelniau juos pritaikyti prie paciento. Plastikinė kojelė yra tvirtai pritvirtinta prie kamertono ir jos negalima nuimti.

(3) = **Kamertonas su fiksuotais slopintuvais (svoriais)**

Dempferių negalima atlaisvinti ar nuimti nuo kamertonų, nes tai sutrikdys kamertonų veikimą arba juos padarys netinkamus naudoti.

(4) + (5) = **Kamertonai su reguliuojamais slopintuvais (svoriais) ir plastikinėmis kojėlėmis**


Stemerių su reguliuojamais slopintuvais pagalba galima keisti dažnius. Priklausomai nuo modelio, slopintuvus galima nuimti nuo stemerio šakelių.

(4) = Modelis su slankiojančiais, užsifiksuojančiais slopintuvais

Prieš naudojimą slankiuosius slopintuvus su fiksavimo funkcija reikia užfiksuoti atitinkamoje dažnio žymėje.

(5) = Kamertoninis kamštelis su papildomais trikampaiais žymėjimais

Reguliuojami slopintuvai yra atlaisvinami ir fiksuojami su raižytomis fiksavimo varžtais (A). Prieš naudojimą slopintuvų raižytus fiksavimo varžtus reikia priveržti rankomis.

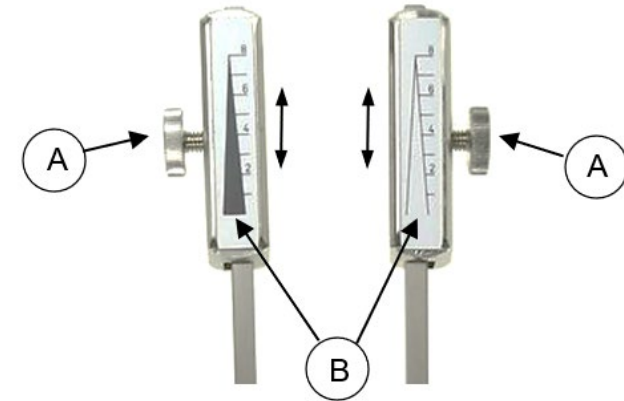

- Trikampės žymės (B) ant slopintuvų (svarelių) naudojamos vibracijos pojūčiui įvertinti iš viso aštuoniais lygiais.
- Priklausomai nuo smūgio stiprumo arba kamertono vibracijos intensyvumo, trikampės žymės iš pradžių atrodo neryškios.
- Vibracijai silpnėjant, trikampės žymės tampa vizualiai atpažįstamos, rodyklės lėtai pradeda didėti ir tada nurodo atitinkamą žymėjimo liniją arba atitinkamą slopintuvų vibracijos lygį.



- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad reguliuojami slopintuvai yra teisingai sumontuoti ir sureguliuoti.
- Dempferiai turi būti tvirtai pritvirtinti, kad naudojimo metu jie neatsipalaiduotų ar nesislinktų.
- Abu slopintuvai turi būti nustatyti į tą patį aukštį. Tik taip galima teisingai nustatyti atitinkamą dažnį.
- Pagrindas yra tvirtai pritvirtintas prie kamertono ir jo negalima nuimti.

Valymas ir dezinfekavimas rankiniu būdu

1. Kamertonui valyti ir dezinfekuoti naudokite vienkartinę servetėlę, sudrėkintą dezinfekavimo priemone, arba paruoštą naudoti dezinfekuojančią servetėlę.
2. Perteklinę drėgmę nuvalykite sausa, nepaliekanti pūkelių servetėle.

PRIEŽIŪRA, KONTROLĖ IR PATIKRINIMAS

- Po valymo ir dezinfekcijos kamertonai turi būti patikrinti vizualiai ir funkcionaliai.
- Defektuotus gaminius taip pat reikia išvalyti ir dezinfekuoti prieš grąžinant remontui ar pateikiant pretenziją.

LAIKYMAS

- Išvalytus ir dezinfekuotus kamertonus laikykite mažai bakterijų turinčioje, sausoje, švarioje ir be dulkių aplinkoje 5–40 °C temperatūroje.

ŠALINIMAS

- Gaminys galima tinkamai šalinti tik po sėkmingo valymo ir dezinfekcijos.
- Šalinant ar perdirbant kamertonus, būtina laikytis nacionalinių teisės aktų ir ligoninių gairių.

REMONTAS IR GRĄŽINIMAS

- Niekada neatlikite remonto patys. Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti asmenys. Jei turite klausimų šiuo klausimu, kreipkitės į „RUDOLF Medical“ arba savo medicinos technologijų skyrių.
- Defektuoti produktai turi būti visiškai apdoroti prieš grąžinant juos remontui ar pateikiant pretenziją.











PROBLEMAS / ĮVYKIAI

- Vartotojas turėtų pranešti apie visas problemas, susijusias su „RUDOLF Medical“ produktais, atitinkamam specializuotam platintojui.
- Jei įvyksta rimtų incidentų, susijusių su produktais, vartotojas privalo apie juos pranešti gamintojui „RUDOLF Medical“ ir kompetentingai institucijai toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs vartotojas.

GARANTIJA

- Prietaisai pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų ir prieš pristatymą yra griežtai tikrinami. Jei pastebite neatitiktumus, prašome susisiekti su „RUDOLF Medical“.

SIMBOLIAI

	Žiūrėkite naudojimo instrukcijas
	Partijos numeris
	Prekės numeris
	Vienetų skaičius pakuotėje
	Nesterilus
	Įspėjimas
	Gamintojas
	Gamybos data
	CE ženklas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/745 dėl medicinos prietaisų (MDR)
	Medicinos prietaisas