

NÁVOD NA POUŽITIE (SK)
LADÍCIE VIDLIČKY




RUDOLF Medical GmbH + Co KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Nemecko
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0560 / Rev C / ACR00397 / 2026-04-02

PROSÍM PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM A ULOŽTE NA BEZPEČNOM MIESTE

 Ladacie vidličky RUDOLF Medical sa dodávajú v nesterilnom stave a pred prvým použitím a bezprostredne po každom použití je potrebné ich vyčistiť a dezinfikovať.

ÚČEL POUŽITIA

Ladiace vidličky sú určené na použitie ako akustické rezonátory na diagnostiku sluchových schopností pacienta prostredníctvom vzdušného a kostného zvuku a na testovanie citlivosti na vibračné vnímanie.

 **VAROVANIA A OPATRENIA**

- Nesprávne používanie a preťaženie v dôsledku krútenia/páčenia môže viesť k zlomeninám a trvalej deformácii.
- Nepoužívajte kovové kefy ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože poškodenie povrchu môže spôsobiť koróziu.


PRED KAŽDÝM POUŽITÍM: VIZUÁLNA A FUNKČNÁ KONTROLA

Skontrolujte nasledujúce:

- Vonkajšie poškodenia (napr. preliačiny, otrepy, praskliny alebo ostré hrany)

POUŽITIE

Krátkym úderom do ladičky, napr. palcom alebo kúskom dreva či plastu, sa ladička rozvibruje a následne sa použije na diagnostiku.

 Ladičku nikdy neudierajte o kovový predmet alebo podobný materiál, pretože hrozí jej poškodenie.

Modely (verzie):



(1) = **Ladička bez pätky**

(2) = **Ladička s plastovou pätkou**

Ladiace vidličky s pätkou umožňujú jemnejšie umiestnenie na pacienta. Plastová pätká je pevne pripevnená k ladiacej vidličke a nesmie sa oddeľovať.

(3) = **Ladička s pevnými tlmičmi (závažiami)**

Tlmiče sa nesmú uvoľňovať ani odstraňovať z ladičky, pretože by to narušilo funkciu ladičky alebo by ju znefunkčnilo.

(4) + (5) = **Ladiace vidličky s nastaviteľnými tlmičmi (závažiami) a plastovými nožičkami**


Ladiace vidličky s nastaviteľnými tlmičmi umožňujú variabilné nastavenie rôznych frekvencií. V závislosti od modelu je možné tlmiče odstrániť z hrotov ladiacej vidličky.

(4) = Model s posuvnými tlmičmi so západkou

Posuvné tlmiče s aretačnou funkciou je potrebné pred použitím zasunúť do príslušného označenia frekvencie.

(5) = Ladička s dodatočnými trojuholníkovými značkami

Nastaviteľné tlmiče sa uvoľnia a zaistia pomocou vroubkovaných poistných skrutiek (A). Vroubkované poistné skrutky tlmičov je potrebné pred použitím dotiahnuť rukou.

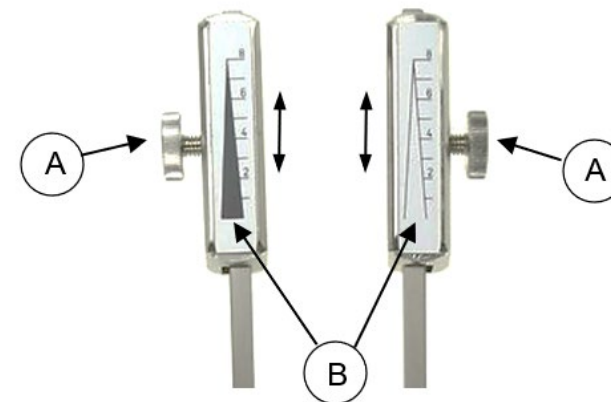

- Trojuholníkové značky (B) na tlmičoch (závažiaci) slúžia na posúdenie vibrácií v celkovo ôsmich úrovniach.
- V závislosti od sily úderu alebo intenzity vibrácií ladiacej vidličky vyzerajú trojuholníkové značky spočiatku rozmazané.
- Ako vibrácie slabnú, trojuholníkové značky sa stávajú vizuálne rozoznateľnými, šípky sa pomaly začínajú zväčšovať a potom ukazujú na príslušnú značku alebo príslušnú úroveň vibrácií tlmičov.



- Pred použitím sa uistite, že nastaviteľné tlmiče sú správne namontované a nastavené.
- Tlmiče musia byť pevne pripevnené, aby sa počas používania nemohli uvoľniť alebo posunúť.
- Oba tlmiče musia byť nastavené na rovnakú výšku. Iba tak je možné správne nastaviť príslušnú frekvenciu.
- Základňa je pevne pripevnená k ladiacej vidličke a nesmie sa odpojiť.

Ručné čistenie a dezinfekcia

1. Na čistenie a dezinfekciu ladiacej vidličky použite jednorazovú utierku navlhčenú dezinfekčným prostriedkom alebo pripravenú dezinfekčnú utierku.
2. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

ÚDRŽBA, KONTROLA A PREHLIADKA

- Po vyčistení a dezinfekcii musia byť ladiace vidličky podrobené vizuálnej a funkčnej kontrole.
- Vadné výrobky sa musia tiež vyčistiť a dezinfikovať pred vrátením na opravu alebo reklamáciu.

SKLADOVANIE

- Vyčistené a dezinfikované ladiace vidličky skladujte v prostredí s nízkym obsahom baktérií, suchom, čistom a bezprašnom pri teplote 5 – 40 °C.

LIKVIDÁCIA

- Výrobky sa smú riadne likvidovať až po úspešnom vyčistení a dezinfekcii.
- Pri likvidácii alebo recyklácii ladiacich vidličiek je potrebné dodržiavať národné predpisy a nemocničné smernice.

OPRAVY A VRÁTENIE TOVARU

- Nikdy nevykonávajte opravy sami. Servis a opravy smú vykonávať iba vyškolené a kvalifikované osoby. Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky, kontaktujte spoločnosť RUDOLF Medical alebo vaše oddelenie zdravotníckej techniky.
- Vadné výrobky musia prejsť celým procesom opätovnej úpravy, než budú vrátené na opravu alebo reklamáciu.











PROBLÉMY / UDALOSTI

- Používateľ by mal nahlásiť všetky problémy súvisiace s výrobkami spoločnosti RUDOLF Medical príslušnému špecializovanému predajcovi.
- V prípade závažných incidentov s výrobkami je používateľ povinný nahlásiť ich spoločnosti RUDOLF Medical ako výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ sídlo.

ZÁRUKA

- Nástroje sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a pred dodaním prechádzajú prísnou kontrolou kvality. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte spoločnosť RUDOLF Medical.

SYMBOLY

	Pozrite si návod na použitie
	Číslo šarže
	Číslo výrobku
	Počet v balení
	Nesterilné
	Upozornenie
	Výrobca
	Dátum výroby
	Značka CE podľa nariadenia (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR)
	Zdravotnícky prostriedok