

NAVODILA ZA UPORABO (SL)  
**GLASBENE VILICE**



RUDOLF Medical GmbH + Co KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Nemčija  
Telefon +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0560 / Rev C / ACR00397 / 2026-04-02

**PREBERITE PRED UPORABO IN HRANITE NA VARNEM MESTU**



Ladilne vilice RUDOLF Medical se dobavljajo nesterilne, zato jih je treba pred prvo uporabo in takoj po vsaki uporabi očistiti in razkužiti.

**NAMEN**

Ladijke so namenjene uporabi kot akustični resonatorji za diagnosticiranje sluha pacienta prek zračnega in kostnega zvoka ter za preizkušanje občutljivosti za vibracije.

 **OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI**

- Nepravilna uporaba in preobremenitev zaradi upogibanja/izvijanja lahko povzročita zlome in trajne deformacije.
- Ne uporabljajte kovinskih krtač ali abrazivnih čistil, saj lahko pride do korozije, če je površina poškodovana.

**PREDEN UPORABITE: VIZUALNI IN FUNKCIJSKI PREGLED**

Preverite naslednje:

- Zunanje poškodbe (npr. vdolbine, ostri robovi, razpoke ali ostre robove)

**UPORABA**

Z rahlim udarcem po glasbeni vilici, npr. s konico palca ali s kosom lesa ali plastike, se ta sprosti v vibracijo in se nato uporabi za diagnostiko.



Klavirja nikoli ne udarjajte ob kovinski predmet ali podobno, saj obstaja nevarnost poškodbe klavirja.

## Modeli (različice):



(1) = **Glasbena vilica brez podstavka**

(2) = **Glasbena vilica s plastičnim podstavkom**

Klavirji s podstavkom omogočajo nežnejše namestitve na pacienta. Plastični podstavek je trdno pritrjen na klavir in ga ni dovoljeno odstraniti.

(3) = **Glasbena vilica s fiksnimi dušilci (utežmi)**

Dušilcev ne smete popustiti ali odstraniti z glasbenega vilice, saj bi to oviralo delovanje glasbenega vilice ali ga naredilo neuporabnega.

(4) + (5) = **Glasbene vilice z nastavljivimi dušilci (utežmi) in plastičnimi nogicami**


Klavirji z nastavljivimi dušilci omogočajo spremenljivo nastavitve različnih frekvenc. Glede na model je mogoče dušilce odstraniti z rogljev klavirja.

(4) = Model z drsnimi, zaskočnimi dušilci

Drsne dušilke s funkcijo zaskočitve je treba pred uporabo zaskočiti v ustrezno oznako frekvence.

(5) = Glasbena vilica z dodatnimi trikotnimi oznakami

Nastavljive blažilce se sprostijo in pritrdijo z navojnimi pritrdilnimi vijaki (A). Navojne pritrdilne vijake blažilcev je treba pred uporabo zategniti z roko.

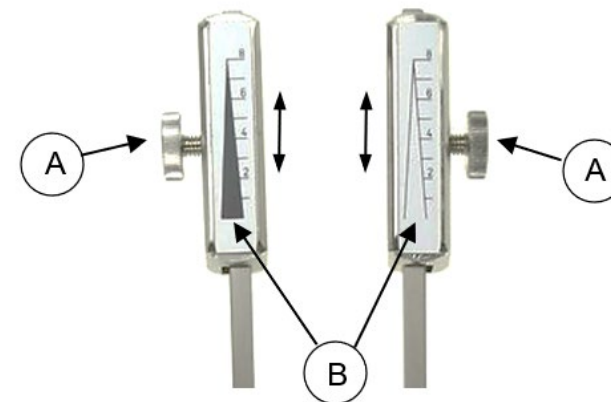

- Trikotne oznake (B) na blažilnikih (utežih) se uporabljajo za oceno občutka vibracij v skupno osmih stopnjah.
- Odvisno od moči udarca ali intenzivnosti vibracij glasbene vilice so trikotne oznake sprva zamegljene.
- Ko vibracije oslabijo, postanejo trikotne oznake vidno prepoznavne, puščice se počasi začnejo povečevati in nato kažejo na ustrezno označevalno črto oziroma ustrezno stopnjo vibracij blažilnikov.



- Pred uporabo se prepričajte, da so nastavljivi dušilci pravilno nameščeni in nastavljeni.
- Dušilci morajo biti trdno pritrjeni, da se med uporabo ne morejo zrahljati ali premakniti.
- Oba dušilca morata biti nastavljena na enako višino. Le tako je mogoče pravilno nastaviti ustrezno frekvenco.
- Podstavek je trdno pritrjen na glasbeno vilico in ga ne smete odstraniti.

## **Ročno čiščenje in razkuževanje**

1. Za čiščenje in razkuževanje glasbene vilice uporabite enkratno krpo, navlaženo z razkužilom, ali pa pripravljeno razkuževalno krpico.
2. Odvečno vlago odstranite s suho krpo brez vlaken.

## **VZDRŽEVANJE, NADZOR IN PREGLED**

- Po čiščenju in razkuževanju je treba glasbene vilice pregledati vizualno in funkcionalno.
- Pomanjkljive izdelke je treba prav tako očistiti in razkužiti, preden se jih vrne v popravilo ali reklamacijo.

## **SKLADIŠČENJE**

- Očiščene in razkužene glasbene vilice shranjujte v okolju z malo bakterij, suhem, čistem in brez prahu pri temperaturi od 5 do 40 °C.

## **ODLAGANJE**

- Izdelke je mogoče ustrezno odstraniti šele po uspešnem čiščenju in razkuževanju.
- Pri odstranjevanju ali recikliranju glasbenih vilic je treba upoštevati nacionalne predpise in bolnišnične smernice.

## **POPRAVILA IN VRAČILA**

- Nikoli ne izvajajte popravil sami. Servisiranje in popravila smejo izvajati le usposobljene in kvalificirane osebe. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem, se obrnite na podjetje RUDOLF Medical ali na vaš oddelek za medicinsko tehnologijo.
- Pomanjkljivi izdelki morajo pred vrnitvijo v popravilo ali reklamacijo opraviti celoten postopek ponovne obdelave.











## **TEŽAVE / DOGODKI**

- Uporabnik mora vse težave v zvezi z izdelki RUDOLF Medical prijaviti ustreznemu specializiranemu prodajalcu.
- V primeru resnih incidentov z izdelki mora uporabnik o tem obvestiti podjetje RUDOLF Medical kot proizvajalca ter pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik sedež.

## **GARANCIJA**

- Instrumenti so izdelani iz visokokakovostnih materialov in pred dobavo prestanejo strogo kontrolo kakovosti. V primeru kakršnih koli neskladij se obrnite na podjetje RUDOLF Medical.

## **SIMBOLI**

	Preberite navodila za uporabo
	Številka serije
	Številka izdelka
	Število v paketu
	Nesterilno
	Previdnost
	Proizvajalec
	Datum izdelave
	Oznaka CE v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR)
	Zdravstvena pripomočka