

Пинцети за поставяне на скоби 10 mm

Пинцети за поставяне на скоби 10 mm



Артикулни номера

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Предназначение

- Решението дали този медицински продукт е подходящ или не, се взема от потребителя. Ние не носим отговорност за последствията от неправилна употреба и подготовка.

Тест за функционалност

- След доставката и преди всяка употреба новите инструменти трябва да бъдат подложени на задълбочен визуален преглед и да бъдат тествани за функционалност. Ако инструментите имат външни дефекти (драскотини, счупвания, пукнатини, вдлъбнатини, повредена изолация, изкривени части или скованост) или ако не функционират по описания начин, моля, уведомете незабавно нас като производител или нашите търговски партньори.

Предупреждения и предпазни мерки

- Не използвайте повредени инструменти.
- Моля, прочетете внимателно и изцяло тази информация. Неправилната употреба и грижа, както и неправилното боравене, могат да доведат до по-ранно износване на хирургическите инструменти. Лицата, които използват този

инструмент, трябва да имат познания за употребата и боравенето с хирургически инструменти, аксесоари и свързани с тях устройства.

Първа употреба на нови инструменти

- Напълно новият инструмент трябва да се извади от полиетиленовата си торбичка, за да се избегне кондензацията, и трябва да се съхранява чист, сух (макс. атмосферна влажност 75% RH) и проветрен в защитен контейнер при стайна температура до първата подготовка.
- Пинцетите за поставяне на скоби се доставят нестерилни. Инструментите трябва да бъдат добре почистени и стерилизирани преди първата употреба и преди всяка следваща употреба.
- Пинцетите за поставяне на клипсове са разработени за стерилизация в автоклав, като този вид стерилизация има доказана история. Можете да използвате и процедури при ниска температура, например STERRAD.


Съвети за безопасност при поддръжка

- Всички хирургически инструменти трябва да се боравят с най-голямо внимание по време на транспортиране, почистване, грижа, стерилизация и съхранение. Особено това важи за остриетата и фините челюсти, които са много деликатни части.


Сглобяване/разглобяване




Откачете дръжката и дръжката

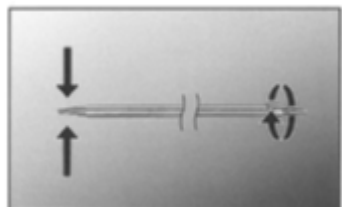

Развийте вложката

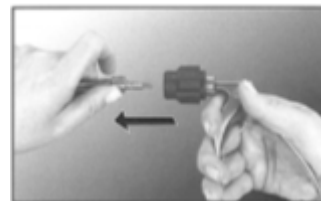


Издърпайте вала от съединението

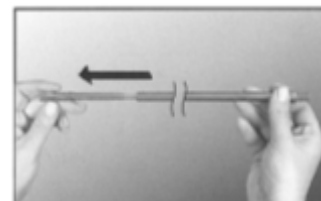


Извадете вложката от вала

Детайлен изглед на челюстта

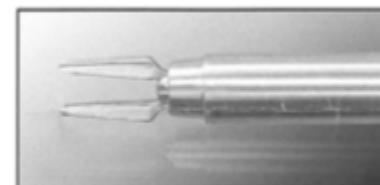

Отворени челюсти

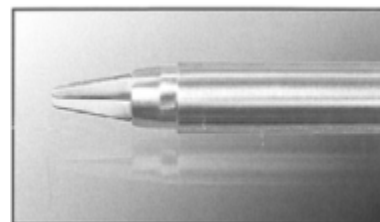

Зъбци затворени



Забележка:

- Моля, спазвайте нашите инструкции за подготовка № 462 за многократно използвани ендоскопски инструменти (устойчиви на висока температура). Ако не разполагате с тях, моля, попитайте за тях.

Подготовка

- Всички хирургичен инструмент трябва да бъде дезинфекциран и специално почистен след всяка употреба. Почистете, проверете и тествайте внимателно всеки инструмент. Стерилизирайте всички инструменти преди употреба. Подходяща процедура за почистване и поддръжка ще удължи живота на инструментите. Обърнете специално внимание на прорезите, заключващите механизми, затварящите елементи, тръбите и други части, до които е трудно да се достигне. Пинцетите за поставяне на ендоскопски клипсове трябва да се почистват в разглобено състояние (вижте Сглобяване / Разглобяване). Пинцетите за поставяне на клипс за отворена хирургия трябва да бъдат отворени напълно (отключете пружината/пълно отваряне на пръстените).

Внимание

- Не използвайте корозивни или абразивни почистващи средства (само меки четки). Най-подходящи са почистващите средства с неутрално pH (7,0).
- Инструментът е подходящ за ултразвуково почистване.
- Изплакнете внимателно с дестилирана вода
- Съхранявайте и стерилизирайте по подходящ начин
- След почистване и изплакване инструментите трябва да се изсушат внимателно. Тръбите трябва да се издухат.
- Стандартни техники за стерилизация
- Препоръчва се инструментите да се стерилизират в автоклав.
- Не стерилизирайте с горещ въздух.
- Стандартни цикли в автоклав:
Стерилизация с пара при 134 °C/243 °F за 15 минути.
- Можете да използвате и други времена и температури, но първо трябва да ги проверите. (Забележка: производителят на вашия автоклав трябва да потвърди температурите и времената за стерилизация.) Температурите в автоклава не трябва да надвишават 137 °C/280 °F.

Акcesoари и резервни части

LP371-200	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби, неръждаема стомана; цветови код: синьо; размер на скобата: малък; опаковка: 36-местен пълнител с 6 скоби.
LP371-201	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби, неръждаема стомана; цветови код: бял; размер на скобата: среден; опаковка: 36-местен пълнител с 6 скоби
LP371-202	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби, неръждаема стомана; цв. код: зелен; размер на скобата: среден-голям; опаковка: 18 касети с по 6 скоби
LP371-203	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби от неръждаема стомана; цветови код: жълт; размер на скобата: голям; опаковка: 18 касети с по 6 скоби.
LP371-210	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби от титан; цветови код: син; размер на скобата: малък; опаковка: 36 касети с по 6 скоби
LP371-211	Ethic. Лигатурна скоба за пинцети за поставяне на скоби от титан; цветови код: син; размер на скобата: малък; опаковка: 15 касети с по 20 скоби
LP371-212	Ethic. Лигатурна скоба за поставяне на скоба. Титанови пинцети; цветови код: бял; размер на скобата: среден; опаковка: 36 броя с 6 скоби
LP371-213	Ethic. Лигатурна скоба за поставяне на скоби с титанови пинцети; цвят: бял; размер на скобата: среден; опаковка: 15 касети с 20 скоби
LP371-214	Ethic. Лигатурна щипка за поставяне на клипс; цвят: зелен; размер на клипса: среден-голям; опаковка: 18 касети с по 6 клипса

LP371-215	Ethic. Лигатурни клипсове за пинцети за поставяне на клипсове от титан; цвят: жълт; размер на клипса: голям; опаковка: 18 касети с по 6 клипса
-----------	--

Ремонти

- Дори когато се използват по предназначение, хирургичните инструменти подлежат на повече или по-малко силно износване, в зависимост от интензивността на употребата им. Това износване не може да бъде избегнато поради технически причини.
- Моля, не извършвайте никакви ремонти сами. Сервизното обслужване и ремонтите могат да се извършват само от нас – производителя – или от други лица, които сме упълномощили.
- Хирургичните инструменти, които трябва да бъдат изпратени за ремонт, трябва да бъдат почистени, дезинфекцирани и стерилизирани.

Символи и обяснения

	Следвайте инструкциите за употреба
REF	Номер на поръчката
	Нестерилен
	Производител
	Неспазването на предупрежденията и предпазните мерки може да доведе до смърт или сериозни наранявания
LOT	Номер на партидата
CE	Номер на нотифицирания орган за маркировка CE