

Kleště na připevňování sponek 10 mm



Číslo výrobků

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Určené použití

- O vhodnosti použití tohoto zdravotnického prostředku rozhoduje uživatel. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití a přípravy.

Zkouška funkčnosti

- Po dodání a před každým použitím musí být nové nástroje podrobeny důkladné vizuální prohlídce a musí být otestovány z hlediska funkčnosti. Pokud nástroje vykazují jakékoli vnější vady (škrábance, zlomeniny, praskliny, zářezy, poškozenou izolaci, ohnuté části nebo ztuhlost) nebo pokud nefungují popsáním způsobem, informujte prosím neprodleně nás jako výrobce nebo naše obchodní partnery.

Varování a bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Prosím, pečlivě a úplně si přečtěte tyto informace. Nesprávné použití a péče, stejně jako nesprávná manipulace, mohou způsobit předčasné opotřebení chirurgických nástrojů. Osoby, které tento nástroj používají, by měly mít znalosti o používání a manipulaci s chirurgickými nástroji, příslušenstvím a souvisejícími zařízeními.

První použití nových nástrojů

- Zcela nový nástroj musí být vyjmutý z polyetylenového sáčku, aby se zabránilo kondenzaci, a musí být až do první přípravy skladován v čistém, suchém (max. relativní vlhkost vzduchu 75 %) a provzdušněném ochranném obalu při pokojové teplotě.
- Kleště na aplikaci svorek jsou dodávány nesterilní. Nástroje musí být před prvním použitím a před každým dalším použitím důkladně vyčištěny a sterilizovány.
- Kleště pro aplikaci svorek byly vyvinuty pro sterilizaci v autoklávu, tento způsob sterilizace má osvědčenou historii. Můžete použít i nízkoteplotní postupy, např. STERRAD.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu

- Se všemi chirurgickými nástroji je třeba zacházet s nejvyšší opatrností během přepravy, čištění, údržby, sterilizace a skladování. To platí zejména pro čepele a jemné čelisti, které jsou velmi křehké.


Sestavení / Rozebrání




Odpojte rukojeť a dřík



Odšroubujte vložku

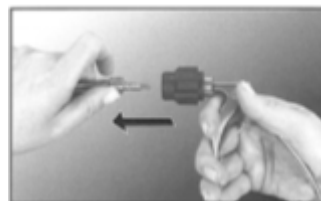


Vytáhněte hřídel ze spojky

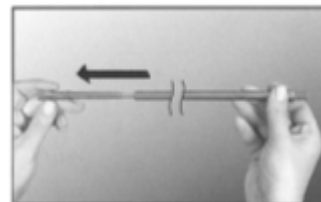


Vytáhněte vložku z hřídele

Detailní pohled na čelist

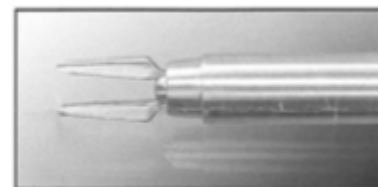

Otevřené čelisti

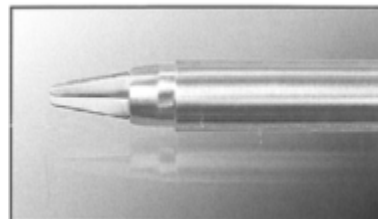

Čelisti zavřené

Příprava

- Každý chirurgický nástroj musí být po každém použití dezinfikován a důkladně vyčištěn. Každý nástroj pečlivě vyčistíte, zkontrolujete a otestujete. Před použitím všechny nástroje sterilizujete. Vhodný postup čištění a údržby prodlouží životnost nástrojů. Zvláštní pozornost věnujte drážkám, zámkům, uzávěrům, trubičkám a dalším těžko přístupným částem. Endoskopické kleště na aplikaci svorek by měly být čištěny v rozebrném stavu (viz Montáž / Demontáž). Kleště na aplikaci svorek pro otevřenou chirurgii by měly být zcela otevřeny (odblokuje pružinu/plně otevřete kroužky).

Upozornění

- Nepoužívejte žádné korozivní nebo škrábající čisticí prostředky (pouze měkký kartáč). Nejvhodnější jsou čisticí prostředky s neutrálním pH (7,0).
- Nástroj je vhodný pro ultrazvukové čištění.
- Pečlivě opláchněte destilovanou vodou
- Skládajte a sterilizujte odpovídajícím způsobem
- Po vyčištění a opláchnutí musí být nástroje pečlivě osušeny. Trubice musí být vyfouknuty.

- Standardní sterilizační techniky
- Doporučuje se sterilizovat nástroje v autoklávu.
- Nesterilizujte horkým vzduchem.
- Standardní cykly v autoklávu:
Sterilizace párou při teplotě 134 °C/243 °F po dobu 15 minut.
Můžete použít i jiné časy a teploty, ale nejprve je ověřte. (Poznámka: výrobce vašeho autoklávu musí potvrdit teploty a doby sterilizace.) Teploty v autoklávu by neměly překročit 137 °C/280 °F.



Poznámka:

- Dodržujte prosím naše pokyny pro přípravu č. 462 pro opakovaně použitelné endoskopické nástroje (tepelně odolné). Pokud je nemáte, požádejte o ně.

Příslušenství a náhradní díly

LP371-200	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorek, nerezová ocel; barevný kód: modrý; velikost svorky: malá; balení: zásobník na 36 kusů s 6 svorkami.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorek, nerezová ocel; barevný kód: bílá; velikost svorky: střední; balení: zásobník na 36 svorek
LP371-202	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorky, nerezová ocel; barevný kód: zelený; velikost svorky: středně velká; balení: zásobník na 18 kusů s 6 svorkami
LP371-203	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorek z nerezové oceli; barevný kód: žlutý; velikost svorky: velká; balení: zásobník na 18 kusů s 6 svorkami.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorky, titan; barevný kód: modrý; velikost svorky: malá; balení: zásobník 36 ks s 6 svorkami
LP371-211	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorky z titanu; barevný kód: modrý; velikost svorky: malá; balení: zásobník na 15 kusů s 20 svorkami
LP371-212	Ethic. Ligaturclip pro aplikaci svorky. Kleště titanové; barevný kód: bílá; velikost svorky: střední; balení: zásobník na 36 kusů s 6 svorkami
LP371-213	Ethic. Ligaturclip pro pinzetu k aplikaci svorky titanová; barevný kód: bílá; velikost svorky: střední; balení: zásobník na 15 kusů S 20 svorkami
LP371-214	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorky; barevný kód: zelený; velikost svorky: střední-velká; balení: zásobník 18 ks s 6 svorkami
LP371-215	Ethic. Ligaturclip pro kleště na aplikaci svorky, titan; barevný kód: žlutý; velikost svorky: velká; balení: zásobník na 18 kusů. S 6 svorkami

Opravy

- I při správném používání podléhají chirurgické nástroje více či méně silnému opotřebení, v závislosti na intenzitě jejich používání. Tomuto opotřebení nelze z technických důvodů zabránit.
- Prosím, neprovádějte žádné opravy sami. Servis a opravy smí provádět pouze my – výrobce – nebo jiné osoby, které jsme k tomu oprávnili.
- Chirurgické nástroje, které mají být zaslány k opravě, musí být vyčištěny, dezinfikovány a sterilizovány.

Symbody a vysvětlivky

	Dodržujte návod k použití
REF	Objednací číslo
	Nesterilní
	Výrobce
	Nedodržení varování a bezpečnostních opatření může vést ke smrti nebo vážnému zranění
	Číslo šarže
	Číslo notifikované osoby pro označení CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Německo
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com