

Klemme til fastgørelse, 10 mm



Varenumre

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Tilsigtet anvendelse

- Det er brugerens beslutning, om dette medicinske produkt er egnet eller ej. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenser af forkert brug og klargøring.

Funktionsprøve

- Efter levering og før hver brug skal nye instrumenter gennemgå en grundig visuel undersøgelse og testes for funktionalitet. Hvis instrumenterne udviser ydre fejl (ridser, brud, revner, hak, beskadiget isolering, bøjede dele eller stivhed), eller hvis de ikke fungerer som beskrevet, bedes du straks informere os som producent eller vores salgspartnere.

Advarsler og forholdsregler

- Brug ikke beskadigede instrumenter.
- Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt og i deres helhed. Forkert brug og pleje samt ukorrekt håndtering kan medføre for tidlig slitage af kirurgiske instrumenter. Personer, der bruger dette instrument, bør have kendskab til brug og håndtering af kirurgiske instrumenter, tilbehør og tilhørende udstyr.

Første brug af nye instrumenter

- Det helt nye instrument skal tages ud af sin polyethylenpose for at undgå kondens og skal opbevares rent, tørt (maks. luftfugtighed på 75 % RH) og lufttørret i en beholder ved stuetemperatur indtil første klargøring.
- Klemmen leveres ikke-steril. Instrumenterne skal rengøres grundigt og steriliseres før første brug og før hver genbrug.
- Klemme-pincetterne er udviklet til sterilisering i autoklave, og denne form for sterilisering har en dokumenteret historie. Du kan også anvende lavtemperaturprocedurer, f.eks. STERRAD.


Sikkerhedsråd vedrørende vedligeholdelse

- Alle kirurgiske instrumenter skal håndteres med største omhu under transport, rengøring, pleje, sterilisering og opbevaring. Dette gælder især for klinger og fine kæber, som er meget sarte dele.


Montering/demontering




Frakobl håndtag og skaft

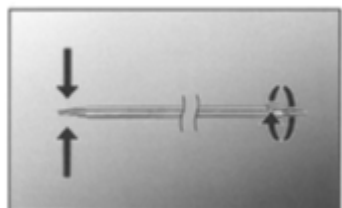

Skru indsatsen af

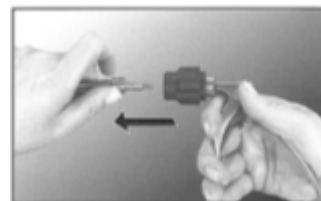


Træk skaftet ud af koblingen

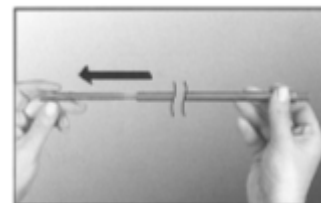


Træk indsatsen ud af akslen

Detaljevisning af kæbe

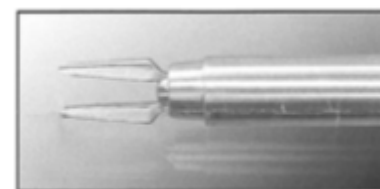

Åbne kæber

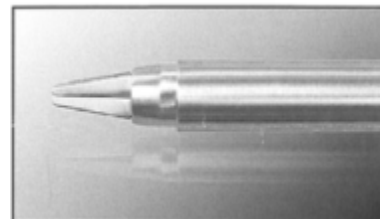

Kæber lukket

Klemme til påføring af kraft 10 mm

Forberedelse

- Alle kirurgiske instrumenter skal desinficeres og rengøres grundigt efter hver brug. Rengør, kontroller og test hvert instrument omhyggeligt. Steriliser alle instrumenter før brug. En passende rengørings- og vedligeholdelsesprocedure vil forlænge instrumenternes levetid. Vær særlig opmærksom på slidser, låse, lukninger, rør og andre dele, der er svære at nå. Endoskopiske klip-pincetter skal rengøres adskilt (se Samling/adskillelse). Klemme til åben kirurgi skal åbnes helt (lås fjederen op/ringene skal åbnes helt).

OBS

- Brug ikke ætsende eller ridsende rengøringsmidler (kun bløde børster). Rengøringsmidler med neutralt pH-niveau (7,0) er mest egnede.
- Instrumentet er egnet til ultralydsrensning.
- Skyl omhyggeligt med destilleret vand
- Opbevar og steriliser korrekt
- Efter rengøring og skylning skal instrumenterne tørres omhyggeligt. Rør skal blæses igennem.
- Standardsteriliseringsteknikker
- Det anbefales at sterilisere instrumenterne i autoklave.
- Steriliser ikke med varm luft.
- Autoklav Standardcyklusser:
Dampsterilisering 134 °C/243 °F i 15 min.
Du kan også bruge andre tider og temperaturer, men du bør først validere dem. (Bemærk: Producenten af din autoklave skal bekræfte temperaturer og steriliseringstider.) Temperaturerne i autoklaven bør ikke overstige 137 °C/280 °F.



Bemærk:

- Følg venligst vores forberedelsesinstruktioner nr. 462 for genanvendelige endoskopiinstrumenter (varmebestandige). Hvis du ikke har dem, bedes du anmode om dem.

Tilbehør og reservedele

LP371-200	Ethic. Ligaturclip til tang til påsætning af clips, rustfrit stål; farvekode: blå; clipstørrelse: lille; emballage: magasin med 36 stk. med 6 clips.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator, rustfrit stål; farvekode: hvid; klipsstørrelse: medium; emballage: magasin med 36 klips
LP371-202	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator, rustfrit stål; farvekode: grøn; klipsstørrelse: mellemstor; emballage: magasin med 18 klips
LP371-203	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator i rustfrit stål; farvekode: gul; klipsstørrelse: stor; emballage: magasin med 18 stk. med 6 klips.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator af titanium; farvekode: blå; klipsstørrelse: lille; emballage: magasin med 36 stk. Med 6 klips
LP371-211	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator af titanium; farvekode: blå; klipsstørrelse: lille; emballage: magasin med 15 stk. med 20 klips
LP371-212	Ethic. Ligaturclip til påsætning af klemme. Pincet i titanium; farvekode: hvid; klemstørrelse: medium; emballage: magasin med 36 stk. med 6 klemmer
LP371-213	Ethic. Ligaturclip til påsætning af klemmer, titanium; farvekode: hvid; klipsstørrelse: medium; emballage: magasin med 15 stk. Med 20 klip
LP371-214	Ethic. Ligaturclip til påsætning af klemme, titanium; farvekode: grøn; klipsstørrelse: mellem-stor; emballage: magasin med 18 stk. Med 6 klips
LP371-215	Ethic. Ligaturclip til klipsapplikator af titanium; farvekode: gul; klipsstørrelse: stor; emballage: magasin med 18 stk. Med 6 klips

Reparationer

- Selv når de anvendes efter hensigten, udsættes kirurgiske instrumenter for mere eller mindre kraftig slitage, afhængigt af hvor intensivt de bruges. Denne slitage kan ikke undgås af tekniske årsager.
- Udfør venligst ikke selv reparationer. Service og reparationer må kun udføres af os selv – producenten – eller af andre personer, som vi har autoriseret.
- Kirurgiske instrumenter, der skal returneres til reparation, skal være rengjort, desinficeret og steriliseret.

Symboler og forklaringer

	Følg brugsanvisningen
REF	Bestillingsnummer
	Ikke-sterilt
	Producent
	Manglende overholdelse af advarsler og forholdsregler kan medføre død eller alvorlig personskade
LOT	Partinummer
CE	CE-mærkning, bemyndiget organ