

Λαβίδα σύσφιξης 10 mm



Κωδικοί προϊόντων

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Προβλεπόμενη χρήση

- Η απόφαση για το αν αυτό το ιατρικό προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι εναπόκειται στον χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες της λανθασμένης χρήσης και προετοιμασίας.

Δοκιμή λειτουργίας

- Μετά την παράδοση και πριν από κάθε χρήση, τα καινούργια εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή οπτική εξέταση και να ελέγχονται ως προς τη λειτουργικότητά τους. Εάν τα εργαλεία παρουσιάζουν εξωτερικά ελαττώματα (γρατσουινιές, σπασίματα, ρωγμές, εγχοπές, φθορά στη μόνωση, λυγισμένα μέρη ή δυσκαμψία) ή εάν δεν λειτουργούν όπως περιγράφεται, παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως εμάς ως κατασκευαστή ή τους συνεργάτες πωλησών μας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα εργαλεία.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και εξ ολοκλήρου τις παρούσες πληροφορίες. Η κακή χρήση και η λανθασμένη φροντίδα, καθώς και ο ακατάλληλος χειρισμός, μπορούν να προκαλέσουν πρόωγη φθορά των χειρουργικών εργαλείων. Τα άτομα που

χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο πρέπει να διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τη χρήση και το χειρισμό χειρουργικών εργαλείων, εξαρτημάτων και συναφών συσκευών.

Πρώτη χρήση νέων εργαλείων

- Το καινούργιο εργαλείο πρέπει να αφαιρείται από τη σακούλα πολυαιθυλενίου για να αποφεύγεται η συμπίκνωση υδρατμών και πρέπει να φυλάσσεται καθαρό, στεγνό (μέγιστη ατμοσφαιρική υγρασία 75% RH) και αεριζόμενο σε προστατευτικό δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την πρώτη προετοιμασία.
- Οι λαβίδες εφαρμογής κλιπ παραδίδονται μη αποστειρωμένες. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται σχολαστικά πριν από την πρώτη χρήση και πριν από κάθε επαναχρησιμοποίηση.
- Οι λαβίδες εφαρμογής κλιπ έχουν σχεδιαστεί για αποστείρωση σε αυτόκλειστο, μια μέθοδος αποστείρωσης με αποδεδειγμένη ιστορία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μεθόδους χαμηλής θερμοκρασίας, π.χ. STERRAD.

Συμβουλές ασφάλειας συντήρησης

- Όλα τα χειρουργικά εργαλεία πρέπει να χειρίζονται με τη μέγιστη προσοχή κατά τη μεταφορά, τον καθαρισμό, τη φροντίδα, την αποστείρωση και την αποθήκευση. Ιδιαίτερα για τις λεπτές και τις λεπτές σιαγόνες, που είναι πολύ ευαίσθητα μέρη.


Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση




Αποσυνδέστε τη λαβή και τον άξονα



Ξεβιδώστε το ένθετο

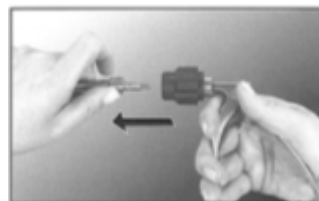


Τραβήξτε τον άξονα έξω από τον σύνδεσμο

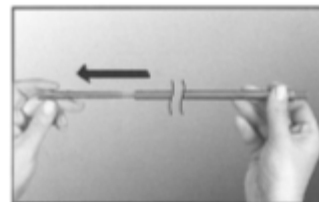


Αφαιρέστε το ένθετο από τον άξονα

Λεπτομερής άποψη σιαγόνας

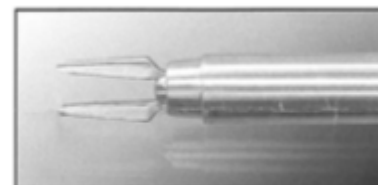

Ανοιχτές σιαγόνες

Λαβίδα εφαρμογής κλιπ 10 mm

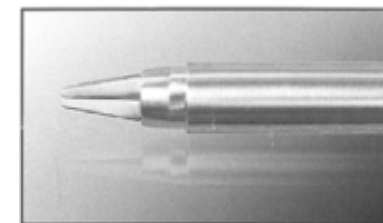

Κλειστές σιαγόνες



Σημείωση:

- Παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες προετοιμασίας #462 για επαναχρησιμοποιούμενα ενδοσκοπικά εργαλεία (θερμoανθεκτικά). Σε περίπτωση που δεν τις έχετε, παρακαλούμε να τις ζητήσετε.

Προετοιμασία

- Κάθε χειρουργικό εργαλείο πρέπει να απολυμαίνεται και να καθαρίζεται ιδιαίτερα μετά από κάθε χρήση. Καθαρίστε, ελέγξτε και δοκιμάστε κάθε εργαλείο προσεκτικά. Αποστειρώστε όλα τα εργαλεία πριν από τη χρήση. Μια κατάλληλη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις εγχοπές, τις ασφάλειες, τα κλεισίματα, τους σωλήνες και άλλα μέρη που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Οι λαβίδες εφαρμογής ενδοσκοπικών κλιπ πρέπει να καθαρίζονται αποσυναρμολογημένες (βλ. Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση). Οι λαβίδες εφαρμογής κλιπ για ανοιχτή χειρουργική επέμβαση πρέπει να ανοίγονται πλήρως (ξεκλειδωμά του ελατηρίου/πλήρης άνοιγμα των δακτύλων).

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή γρατσουνιστικά καθαριστικά (μόνο μαλακή βούρτσα). Τα καθαριστικά με ουδέτερο pH (7,0) είναι τα πιο κατάλληλα.
- Το εργαλείο είναι κατάλληλο για καθαρισμό με υπερήχους.
- Ξεπλύνετε προσεκτικά με αποσταγμένο νερό
- Αποθηκεύστε και αποστειρώστε κατάλληλα
- Μετά τον καθαρισμό και το ξεπλύμα, τα όργανα πρέπει να στεγνώνονται προσεκτικά. Οι σωλήνες πρέπει να ξεφυσούνται.
- Τυπικές τεχνικές αποστείρωσης

- Συνιστάται η αποστείρωση των εργαλείων σε αυτόκλειστο.
- Μην αποστειρώνετε με ζεστό αέρα.
- Τυπικοί κύκλοι αυτόκλειστου:
Αποστείρωση με ατμό στους 134 °C/243 °F για 15 λεπτά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλους χρόνους και θερμοκρασίες, αλλά θα πρέπει πρώτα να τους επικυρώσετε. (Σημείωση: ο κατασκευαστής του αυτόκλειστου σας πρέπει να επιβεβαιώσει τις θερμοκρασίες και τους χρόνους αποστείρωσης.) Οι θερμοκρασίες στο αυτόκλειστο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 137°C/ 280°F.

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά

LP371-200	Ethic. Κλιπ σύνδεσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ, από ανοξείδωτο χάλυβα· κωδικός χρώματος: μπλε· μέγεθος κλιπ: μικρό· συσκευασία: θήκη 36 τεμαχίων με 6 κλιπ.
LP371-201	Ethic. Κλιπ απολύμανσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από ανοξείδωτο χάλυβα. κωδικός χρώματος: λευκό. μέγεθος κλιπ: μεσαίο. συσκευασία: θήκη 36 τεμαχίων με 6 κλιπ
LP371-202	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα τοποθέτησης κλιπ από ανοξείδωτο χάλυβα; κωδικός χρώματος: πράσινο; μέγεθος κλιπ: μεσαίο-μεγάλο; συσκευασία: 18 ταινίες με 6 κλιπ
LP371-203	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από ανοξείδωτο χάλυβα. κωδικός χρώματος: κίτρινο. μέγεθος κλιπ: μεγάλο. συσκευασία: 18 τεμάχια με 6 κλιπ.
LP371-210	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από τιτάνιο; κωδικός χρώματος: μπλε; μέγεθος κλιπ: μικρό; συσκευασία: 36 τεμάχια με 6 κλιπ
LP371-211	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από τιτάνιο; κωδικός χρώματος: μπλε; μέγεθος κλιπ: μικρό; συσκευασία: 15 τεμάχια με 20 κλιπ
LP371-212	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για την εφαρμογή κλιπ. Λαβίδα τιτανίου;

	κωδικός χρώματος: λευκό; μέγεθος κλιπ: μεσαίο; συσκευασία: θήκη 36 τεμαχίων με 6 κλιπ
LP371-213	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από τιτάνιο; κωδικός χρώματος: λευκό; μέγεθος κλιπ: μεσαίο; συσκευασία: 15 τεμάχια με 20 κλιπ
LP371-214	Ethic. Κλιπ απολίνωσης για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από τιτάνιο; κωδικός χρώματος: πράσινο; μέγεθος κλιπ: μεσαίο-μεγάλο; συσκευασία: 18 τεμάχια με 6 κλιπ
LP371-215	Ethic. Κλιπ Ligaturclip για λαβίδα εφαρμογής κλιπ από τιτάνιο; κωδικός χρώματος: κίτρινο; μέγεθος κλιπ: μεγάλο; συσκευασία: 18 τεμάχια. Με 6 κλιπ

Επισκευές

- Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, τα χειρουργικά εργαλεία υπόκεινται σε περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή φθορά, ανάλογα με την ένταση της χρήσης τους. Αυτή η φθορά δεν μπορεί να αποφευχθεί για τεχνικούς λόγους.
- Παρακαλούμε μην πραγματοποιείτε επισκευές μόνοι σας. Η συντήρηση και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εμάς - τον κατασκευαστή - ή από άλλα άτομα που έχουμε εξουσιοδοτήσει.
- Τα χειρουργικά εργαλεία που πρέπει να επιστραφούν για επισκευή πρέπει να είναι καθαρά, απολυμασμένα και αποστειρωμένα.

Σύμβολα και επεξηγήσεις

	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
REF	Αριθμός παραγγελίας
	Μη αποστειρωμένο
	Κατασκευαστής
	Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό
LOT	Αριθμός παρτίδας
CE	Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού σήμανσης CE