

Pinza para aplicar clips de 10 mm

Pinzas para colocar clips de 10 mm



Números de artículo

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Uso previsto

- Es responsabilidad del usuario decidir si este producto sanitario es adecuado o no. No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso o una preparación incorrectos.

Prueba de funcionamiento

- Tras la entrega y antes de cada uso, los instrumentos nuevos deben someterse a un examen visual exhaustivo y a una prueba de funcionamiento. Si los instrumentos presentan defectos externos (arañazos, roturas, grietas, muescas, aislamiento dañado, piezas dobladas o rigidez) o si no funcionan de la manera descrita, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a nosotros, como fabricante, o a nuestros socios comerciales.

Advertencias y precauciones

- No utilice instrumentos dañados.
- Lea esta información detenidamente y en su totalidad. El uso indebido y el cuidado incorrecto, así como la manipulación inadecuada, pueden provocar un deterioro prematuro de los instrumentos quirúrgicos. Las personas que utilicen este instrumento deben tener conocimientos sobre el uso y la manipulación de

instrumentos quirúrgicos, accesorios y dispositivos asociados.

Primer uso de instrumentos nuevos

- El instrumento nuevo debe sacarse de su bolsa de polietileno para evitar la condensación y debe almacenarse limpio, seco (humedad atmosférica máxima del 75 % HR) y ventilado en un recipiente a temperatura ambiente hasta su primera preparación.
- Las pinzas de aplicación de clips se suministran sin esterilizar. Los instrumentos deben limpiarse a fondo y esterilizarse antes del primer uso y antes de cada reutilización.
- Las pinzas aplicadoras de clips se han desarrollado para su esterilización en autoclave, un método de esterilización de eficacia probada. También se pueden utilizar procedimientos a baja temperatura, como STERRAD.


Consejos de seguridad para el mantenimiento

- Todos los instrumentos quirúrgicos deben manipularse con el máximo cuidado durante el transporte, la limpieza, el mantenimiento, la esterilización y el almacenamiento. Especialmente en el caso de las cuchillas y las mordazas finas, que son piezas muy delicadas.


Montaje/desmontaje




Desconecte el mango y el vástago

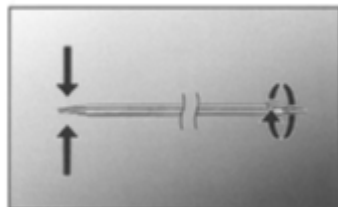

Desenrosque el inserto

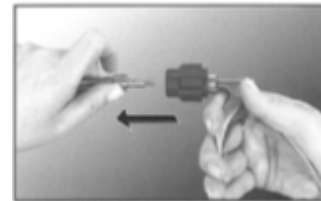


Extraiga el vástago del acoplamiento

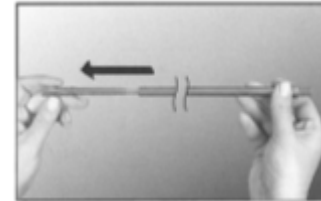


Extraiga el inserto del eje

Vista detallada de la mordaza

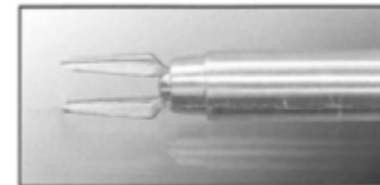

Mordazas abiertas

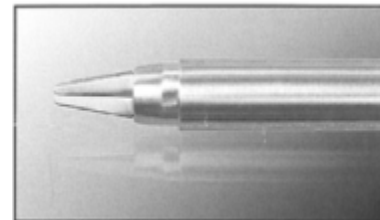

Mordazas cerradas

Preparación

- Todos los instrumentos quirúrgicos deben desinfectarse y limpiarse a fondo después de cada uso. Limpie, revise y compruebe cada instrumento con cuidado. Esterilice todos los instrumentos antes de su uso. Un procedimiento adecuado de limpieza y mantenimiento aumentará la vida útil de los instrumentos. Preste especial atención a las ranuras, los cierres, los tubos y otras partes de difícil acceso. Las pinzas endoscópicas para la aplicación de clips deben limpiarse desmontadas (véase Montaje/Desmontaje). Las pinzas aplicadoras de clips para cirugía abierta deben abrirse completamente (desbloquear el resorte/apertura total de los anillos).

Atención

- No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos (solo cepillos suaves). Los productos de limpieza con pH neutro (7,0) son los más adecuados.
- El instrumento es apto para la limpieza por ultrasonidos.
- Aclarar cuidadosamente con agua destilada
- Almacenar y esterilizar adecuadamente
- Tras la limpieza y el enjuague, los instrumentos deben secarse con cuidado. Los tubos deben soplar.
- Técnicas de esterilización estándar
- Se recomienda esterilizar los instrumentos en autoclave.
- No esterilizar con aire caliente.
- Ciclos estándar de autoclave:
Esterilización con vapor a 134 °C/243 °F durante 15 min.
También puede utilizar otros tiempos y temperaturas, pero debe validarlos primero. (Nota: el fabricante de su autoclave debe confirmar las temperaturas y los tiempos de esterilización). Las temperaturas en el autoclave no deben superar los 137 °C/280 °F.

Nota:	- Siga nuestras instrucciones de preparación n.º 462 para instrumentos endoscópicos reutilizables (resistentes al calor). Si no las tiene, solicítelas.
---------------------	--

Accesorios y piezas de repuesto

LP371-200	Ethic. Clip de ligadura para pinzas de aplicación de clips, acero inoxidable; código de color: azul; tamaño del clip: pequeño; embalaje: cargador de 36 con 6 clips.
LP371-201	Ethic. Clip de ligadura para pinzas de aplicación de clips, acero inoxidable; código de color: blanco; tamaño del clip: mediano; envase: cartucho de 36 con 6 clips
LP371-202	Ethic. Clip de ligadura para pinzas aplicadoras de clips, acero inoxidable; código de color: verde; tamaño del clip: mediano-grande; envase: cartucho de 18 con 6 clips
LP371-203	Ethic. Clip de ligadura para pinza de aplicación de clips de acero inoxidable; código de color: amarillo; tamaño del clip: grande; envase: cartucho de 18 con 6 clips.
LP371-210	Ethic. Clip de ligadura para pinza de titanio; código de color: azul; tamaño del clip: pequeño; envase: cartucho de 36 con 6 clips
LP371-211	Ethic. Clip de ligadura para pinza de titanio; código de color: azul; tamaño del clip: pequeño; envase: cartucho de 15 con 20 clips
LP371-212	Ethic. Clip de ligadura para la aplicación de clips. Pinzas de titanio; código de color: blanco; tamaño del clip: mediano; envase: cartucho de 36 unidades con 6 clips
LP371-213	Ethic. Clip de ligadura para pinzas de titanio; código de color: blanco; tamaño del clip: mediano; envase: cartucho de 15 unidades con 20 clips
LP371-214	Ethic. Clip de ligadura para pinza de aplicación de clips de titanio; código de color: verde; tamaño del clip: mediano-grande; envase: cartucho de 18 con 6 clips

LP371-215	Ethic. Clip de ligadura para pinza de titanio; código de color: amarillo; tamaño del clip: grande; envase: cartucho de 18. Con 6 clips
-----------	--

Reparaciones

- Incluso cuando se utilizan según lo previsto, los instrumentos quirúrgicos están sujetos a un desgaste más o menos severo, dependiendo de la intensidad con la que se utilicen. Este desgaste no se puede evitar por razones técnicas.
- Por favor, no realice ninguna reparación por su cuenta. El mantenimiento y las reparaciones solo pueden ser realizados por nosotros —el fabricante— o por otras personas autorizadas por nosotros.
- Los instrumentos quirúrgicos que se devuelvan para su reparación deben estar limpios, desinfectados y esterilizados.

Simbolos y explicaciones

	Siga las instrucciones de uso
REF	Número de pedido
	No estéril
	Fabricante
	El incumplimiento de las advertencias y precauciones puede provocar la muerte o lesiones graves
LOT	Número de lote
CE	Número de organismo notificado del marcado CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Alemania
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com