

D0624 / Rev. B / DCR01771

Klammerduspintsett 10 mm



Artiklinumbrid

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Kasutamise eesmärk

- Kasutaja otsustab, kas see meditsiinitoode on sobiv või mitte. Me ei võta vastutust valesti kasutamise ja ettevalmistamise tagajärgede eest.

Töökindluse kontroll

- Pärast tarnimist ja enne iga kasutamist tuleb uued instrumendid põhjalikult visuaalselt üle vaadata ja nende funktsionaalsust kontrollida. Kui instrumentidel esineb väliseid defekte (kriimustused, murdumised, praod, sisselõiked, kahjustatud isolatsioon, painutatud osad või jäikus) või kui need ei tööta kirjeldatud viisil, palun teavitage sellest viivitamatult meid kui tootjat või meie müügipartnereid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage kahjustatud instrumente.
- Palun lugege käesolev teave hoolikalt ja tervikuna läbi. Ebaõige kasutamine ja hooldus ning vale käitlemine võivad põhjustada kirurgiliste instrumentide enneaegset kulumist. Seda instrumenti kasutavad isikud peavad omama teadmisi kirurgiliste instrumentide, tarvikute ja nendega seotud seadmete kasutamise ja käitlemise kohta.

Uute instrumentide esmakordne kasutamine

- Uus instrument tuleb kondensatsioonivältimiseks polüetüleenist kotist välja võtta ja hoida puhtana, kuivana (maksimaalne õhuniiskus 75% RH) ning õhutatud kaitsekarbis toatemperatuuril kuni esimese ettevalmistamiseni.
- Klambri paigaldamise tangid tarnitakse mittesteriilsetena. Enne esimest kasutamist ja enne iga järgmist kasutamist tuleb instrumendid põhjalikult puhastada ja steriliseerida.
- Klambri paigaldamise tangid on välja töötatud autoklaavis steriliseerimiseks, sellisel steriliseerimisel on pikaajaline ja tõestatud ajalugu. Võite kasutada ka madalatemperatuurilisi protseduure, nt STERRAD.

Hoolduse ohutusnõuanded

- Kõiki kirurgilisi instrumente tuleb transportimisel, puhastamisel, hooldamisel, steriliseerimisel ja ladustamisel käsitseda äärmiselt ettevaatlikult. Eriti kehtib see terade ja peenete lõugade puhul, mis on väga õrnad osad.


Kokku- ja lahtimonteerimine




Käepideme ja varre lahtivõtmine



Keerake sisend lahti

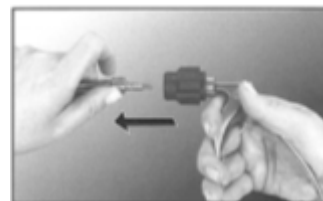


Tõmmake vars ühendusest välja

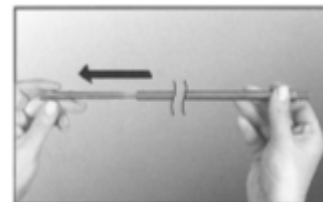


Tõmmake sisetapp võlliilt välja

Lõuade detailvaade

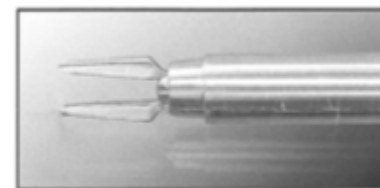

Avatud lõuad

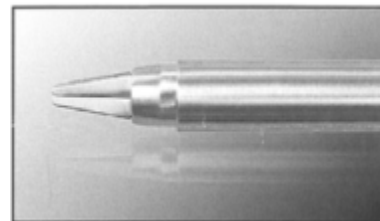

Lõuad suletud

Klambri paigalduspintsett 10 mm

Ettevalmistus

- Iga kirurgiline instrument tuleb pärast iga kasutamist desinfitseerida ja eriti hoolikalt puhastada. Puhastage, kontrollige ja testige iga instrumenti hoolikalt. Steriliseerige kõik instrumendid enne kasutamist. Sobiv puhastus- ja hooldusprotseduur pikendab instrumentide eluiga. Pöörake erilist tähelepanu piludele, lukkudele, sulguritele, torudele ja muudele raskesti ligipääsetavatele osadele. Endoskoopilised klambri paigalduspintsettid tuleb puhastada lahti monteerituna (vt kokkupanek / lahtimonteerimine). Avakirurgia klambri paigalduspintsette tuleb täielikult avada (vabastage vedru / avage rõngad täielikult).

Tähelepanu

- Ärge kasutage söövitavaid ega kriimustavaid puhastusvahendeid (ainult pehme harjaga). Kõige sobivamad on neutraalse pH-tasemega (7,0) puhastusvahendid.
- Instrument sobib ultrahelipuhastuseks.
- Loputage hoolikalt destilleeritud veega
- hoidke ja steriliseerige nõuetekohaselt
- Pärast puhastamist ja loputamist tuleb instrumendid hoolikalt kuivatada. Torud tuleb läbi puhuda.
- Standardseid steriliseerimismeetodeid
- Soovitav on instrumente steriliseerida autoklaavis.
- Ärge steriliseerige kuuma õhuga.
- Autoklaavi standardtsükliid:
Aurusteriliseerimine 134 °C/243 °F 15 minutit.
Võite kasutada ka teisi aegu ja temperatuure, kuid need tuleb esmalt valideerida. (Märkus: autoklaavi tootja peab kinnitama temperatuurid ja steriliseerimisajad.) Autoklaavi temperatuur ei tohi ületada 137 °C/280 °F.

Märkus:	Järgige meie ettevalmistusjuhiseid nr 462 korduvkasutatavate endoskoopiainstrumentide (kuumuskindlate) kohta. Kui teil neid pole, palun küsige neid.
-----------------------	---

Tarvikud ja varuosad

LP371-200	Ethic. Ligatuuriklipsi kinnitamise tangid, roostevaba teras; värvikood: sinine; klipsi suurus: väike; pakend: 36-kohaline kassett 6 klipsiga.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip klambri paigaldamise tangidele, roostevaba teras; värvikood: valge; klambri suurus: keskmine; pakend: 36-kohaline kassett 6 klambriga
LP371-202	Ethic. Ligatuurklambri kinnitamiseks mõeldud tangid roostevabast terasest; värvikood: roheline; klambri suurus: keskmine-suur; pakend: 18-kohaline kassett 6 klambriga
LP371-203	Ethic. Ligatuurklambri paigalduspintsett roostevabast terasest; värvikood: kollane; klambri suurus: suur; pakend: 18-kohaline kassett 6 klambriga.
LP371-210	Ethic. Ligatuurklambri paigalduspintsett titaanist; värvikood: sinine; klambri suurus: väike; pakend: 36-kohaline kassett 6 klambriga
LP371-211	Ethic. Ligatuurklambri paigalduspintsett titaanist; värvikood: sinine; klambri suurus: väike; pakend: 15-klambriline kassett 20 klambriga
LP371-212	Ethic. Ligatuurklambri paigaldamiseks mõeldud klambrihoidja. Titaanist tangid; värvikood: valge; klambri suurus: keskmine; pakend: 36-kohaline kassett 6 klambriga
LP371-213	Ethic. Ligatuurklambri paigaldamise tangid titaanist; värvikood: valge; klambri suurus: keskmine; pakend: 15-kohaline kassett 20 klambriga
LP371-214	Ethic. Ligatuurklambri paigaldamise tangid ti; värvikood: roheline; klambri suurus: keskmine-suur; pakend: 18-kohaline kassett 6 klambriga

LP371-215	Ethic. Ligatuurklambri paigalduspintsett titaanist; värvikood: kollane; klambri suurus: suur; pakend: 18-klambriline kassett. 6 klambriga
-----------	---

Remont

- Isegi ettenähtud otstarbel kasutamisel kuluvad kirurgilised instrumendid sõltuvalt kasutamise intensiivsusest rohkem või vähem. Seda kulumist ei ole tehnilistel põhjustel võimalik vältida.
- Palun ärge tehke ise remonti. Hooldust ja remonti tohib teha ainult meie – tootja – või meie poolt volitatud isikud.
- Remontiks tagasi saadetavad kirurgilised instrumendid peavad olema puhastatud, desinfitseeritud ja steriliseeritud.

Sümbolid ja selgitused

	Järgige kasutusjuhendit
REF	Tellimisnumber
	Mitte-steriilne
	Tootja
	Hoiatuste ja ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi
LOT	Partii number
CE	CE-märgise teavitatud asutuse number



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Saksamaa
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com