

Kiinnityspihdit 10 mm

Kiinnityspihdit 10 mm



Tuotenumerot

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Käyttötarkoitus

- Käyttäjä päättää, onko tämä lääketieteellinen tuote sopiva vai ei. Emme ota vastuuta virheellisen käytön ja valmistelun seurauksista.

Toimintatesti

- Toimituksen jälkeen ja ennen jokaista käyttökertaa uudet instrumentit on tarkastettava silmämääräisesti ja niiden toimivuus on testattava. Jos instrumenteissa on ulkoisia vikoja (naarmuja, murtumia, halkeamia, lovia, vaurioitunutta eristystä, taipuneita osia tai jäykkyyttä) tai jos ne eivät toimi kuvatulla tavalla, ilmoittakaa asiasta välittömästi valmistajalle tai myyntikumppaneillemme.

Varoitukset ja varotoimet

- Älä käytä vaurioituneita instrumentteja.
- Lue nämä tiedot huolellisesti ja kokonaan. Väärinkäyttö ja väärä hoito sekä virheellinen käsittely voivat aiheuttaa kirurgisten instrumenttien ennenaikaista kulumista. Tämän instrumentin käyttäjillä tulee olla tietoa kirurgisten instrumenttien, lisävarusteiden ja niihin liittyvien laitteiden käytöstä ja käsittelystä.

Uusien instrumenttien ensimmäinen käyttö

- Uusi instrumentti on otettava pois polyeteenipussista kondenssin välttämiseksi ja säilytettävä puhtaana, kuivana (ilman kosteus enintään 75 % RH) ja tuuletetussa suojakotelossa huoneenlämmössä ensimmäiseen käyttöönottoon asti.
- Klipsin kiinnityspihdit toimitetaan ei-steriileinä. Instrumentit on puhdistettava ja steriloitava perusteellisesti ennen ensimmäistä käyttöä ja ennen jokaista uudelleenkäyttöä.
- Klipsin kiinnityspihdit on kehitetty autoklaavisterilointia varten, ja tällä steriloitimenetelmällä on pitkä ja hyvä maine. Voit käyttää myös matalalämpötilamenetelmiä, kuten STERRAD-menetelmää.

Turvallisuusohjeet

- Kaikkia kirurgisia instrumentteja on käsiteltävä erittäin huolellisesti kuljetuksen, puhdistuksen, hoidon, steriloitimen ja varastoinnin aikana. Tämä koskee erityisesti teriä ja hienoja leukoja, jotka ovat erittäin herkkiä osia.


Kokoaminen / purkaminen




Irrota kahva ja varsi



Kierrä insertti irti

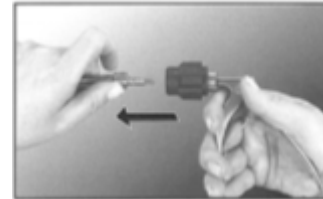


Vedä varsi ulos liitoksesta

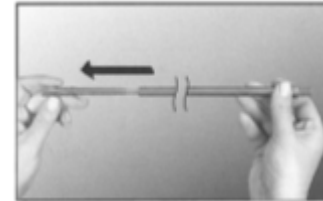


Vedä insertti ulos akselista

Yksityiskohdanäkymä Leuka

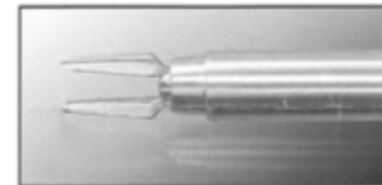

Avoimet leuat

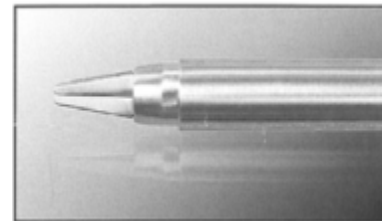

Leuat kiinni

Valmistelu

- Jokainen kirurginen instrumentti on desinfiointava ja puhdistettava erityisen huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista, tarkista ja testaa jokainen instrumentti huolellisesti. Steriloi kaikki instrumentit ennen käyttöä. Sopiva puhdistus- ja huoltomenettely pidentää instrumenttien käyttöikää. Kiinnitä erityistä huomiota uriin, lukkoihin, sulkimiin, putkiin ja muihin vaikeasti tavoitettaviin osiin. Endoskooppiset klipsin kiinnityspihdit on puhdistettava osina (katso Kokoaminen / Purkaminen). Avoimessa leikkauksessa käytettävät klipsin kiinnityspihdit on avattava kokonaan (vapautta jousi/avaa renkaat kokonaan).

Huomio

- Älä käytä syövyttäviä tai naarmuttavia puhdistusaineita (vain pehmeä harja). Neutraalin pH-arvon (7,0) puhdistusaineet ovat sopivimpia.
- Instrumentti soveltuu ultraäänipesuun.
- Huuhte huolellisesti tislattulla vedellä
- Säilytä ja steriloi asianmukaisesti
- Puhdistuksen ja huuhtelun jälkeen instrumentit on kuivattava huolellisesti. Putket on puhallettava tyhjiiksi.
- Vakiintuneet steriloitimenetelmät
- Instrumentit on suositeltavaa steriloida autoklaavissa.
- Älä steriloi kuumailmalla.
- Autoklaavi Vakiomenetelmät:
Höyrysterilointi 134 °C/243 °F 15 minuuttia.
Voit käyttää myös muita aikoja ja lämpötiloja, mutta ne on ensin vahvistettava. (Huomautus: autoklaavin valmistajan on vahvistettava lämpötilat ja steriloitimet.) Autoklaavin lämpötila ei saa ylittää 137 °C/280 °F.

Huomautus:	- Noudata ohjeitamme #462 uudelleenkäytettävien endoskopiavälineiden (lämmönkestävät) valmistelusta. Jos sinulla ei ole niitä, pyydä niitä.
--------------------------	--

Lisävarusteet ja varaosat

LP371-200	Ethic. Ligaturclip-klipsin kiinnityspihdit, ruostumaton teräs; värikoodi: sininen; klipsin koko: pieni; pakkaus: 36 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip klipsin kiinnityspihdeille, ruostumaton teräs; värikoodi: valkoinen; klipsin koko: keskikokoinen; pakkaus: 36 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä
LP371-202	Ethic. Ligaturclip-klipsipihdit, ruostumaton teräs; värikoodi: vihreä; klipsikoko: keskikokoinen; pakkaus: 18 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä
LP371-203	Ethic. Ligaturclip-klipsipihdit, ruostumaton teräs; värikoodi: keltainen; klipsikoko: suuri; pakkaus: 18 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip-klipsipihdit, titaani; värikoodi: sininen; klipsikoko: pieni; pakkaus: 36 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä
LP371-211	Ethic. Ligaturclip-klipsin kiinnityspihdit, titaania; värikoodi: sininen; klipsin koko: pieni; pakkaus: 15 kasettia, joissa 20 klipsiä
LP371-212	Ethic. Ligaturclip klipsin kiinnittämiseen. Pihdit titaania; värikoodi: valkoinen; klipsin koko: keskikokoinen; pakkaus: 36 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä
LP371-213	Ethic. Ligaturclip klipsin kiinnittämiseen, titaanipihdit; värikoodi: valkoinen; klipsin koko: keskikokoinen; pakkaus: 15 kpl:n kasetti, jossa 20 klipsiä
LP371-214	Ethic. Ligaturclip-klipsin kiinnityspihdit, titaani; värikoodi: vihreä; klipsin koko: keskikokoinen-suuri; pakkaus: 18 kpl:n kasetti, jossa 6 klipsiä
LP371-215	Ethic. Ligaturclip-klipsin kiinnityspihdit, titaani; värikoodi: keltainen; klipsin koko: suuri; pakkaus: 18 kpl. Sisältää 6 klipsiä

Korjaukset

- Vaikka kirurgisia instrumentteja käytettäisiin tarkoitettulla tavalla, ne kuluvat enemmän tai vähemmän riippuen siitä, kuinka intensiivisesti niitä käytetään. Tätä kulumista ei voida välttää teknisistä syistä.
- Älkää suorittako korjauksia itse. Huolto ja korjaukset saa suorittaa vain me – valmistaja – tai muut valtuuttamamme henkilöt.
- Korjausta varten palautettavat kirurgiset instrumentit on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava.

Symbolit ja selitykset

	Noudata käyttöohjeita
REF	Tilausnumero
	Ei-steriili
	Valmistaja
	Varoitusten ja varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin
	Eränumero
	CE-merkinnän ilmoitetun laitoksen numero



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Saksa
Puh. +49 7463 9956-0
Faksi +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com