

D0624 / Rev. B / DCR01771

Klemne pincete za primjenu sile 10 mm

Kliipsne pinceta za primjenu 10 mm



Brojevi artikala

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Namjena

- Korisnik samostalno odlučuje je li ovaj medicinski proizvod prikladan ili ne. Ne preuzimamo odgovornost za posljedice nepravilne uporabe i pripreme.

Provjera funkcionalnosti

- Nakon isporuke i prije svake upotrebe novi instrumenti moraju proći temeljiti vizualni pregled i test funkcionalnosti. Ako instrumenti pokazuju bilo kakve vanjske nedostatke (ogrebotine, lomove, pukotine, udubljenja, oštećenu izolaciju, savijene dijelove ili krutost) ili ako ne funkcioniraju na opisani način, molimo vas da odmah obavijestite proizvođača ili naše prodajne partnere.

Upozorenja i mjere opreza

- Ne koristite oštećene instrumente.
- Molimo pročitajte ove informacije pažljivo i u cijelosti. Nepravilna uporaba i pogrešno održavanje, kao i nepravilno rukovanje, mogu uzrokovati raniju degradaciju kirurških instrumenata. Osobe koje koriste ovaj instrument trebale bi imati znanje o uporabi i rukovanju kirurškim instrumentima, dodacima i pripadajućim uređajima.

Prvo korištenje novih instrumenata

- Potpuno novi instrument treba izvaditi iz polietilenske vrećice kako bi se izbjegla kondenzacija te ga čuvati čistim, suhim (maks. 75 % relativne vlažnosti zraka) i prozračnim u spremniku na sobnoj temperaturi do prve pripreme.
- Škare za nanošenje klipa isporučuju se nesterilne. Instrumenti se moraju temeljito očistiti i sterilizirati prije prve uporabe i prije svake ponovne uporabe.
- Škare za postavljanje klipa razvijene su za sterilizaciju u autoklavu, a takva sterilizacija ima dokazanu povijest. Možete koristiti i postupke na niskoj temperaturi, npr. STERRAD.

Sigurnosni savjeti za održavanje

- Svi kirurški instrumenti moraju se rukovati s najvećom pažnjom tijekom prijevoza, čišćenja, održavanja, sterilizacije i skladištenja. Posebno oprezno s oštricama i finim čeljustima, koje su vrlo osjetljivi dijelovi.


Sklapanje / Rastavljanje




Odspojite ručku i osovinu



Odvijte umetak

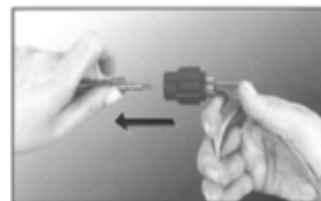


Izvadite vratilo iz spojke

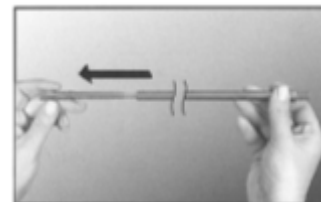


Izvcite umetak iz osovine

Detaljni prikaz čeljusti

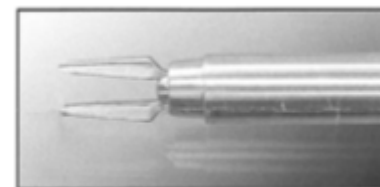

Otvorene čeljusti

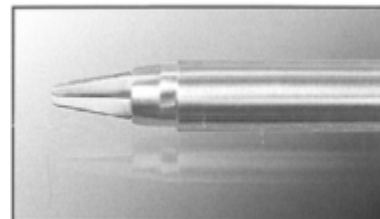

Čeljusti zatvorene

Priprema

- Svaki kirurški instrument mora se dezinficirati i posebno očistiti nakon svake upotrebe. Pažljivo očistite, provjerite i testirajte svaki instrument. Sterilizirajte sve instrumente prije upotrebe. Prikladan postupak čišćenja i održavanja produžit će vijek trajanja instrumenata. Posebnu pažnju obratite na utoke, brave, zatvarače, cijevi i druge dijelove teško dostupne za čišćenje. Endoskopske kliješta za postavljanje spojnice treba čistiti rastavljene (vidi Sklapanje / Rastavljanje). Pinceta za postavljanje klipa za otvorenu kirurgiju treba biti potpuno otvorena (otključajte oprugu/potpuno otvorite prstenove).

Pažnja

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja su korozivna ili mogu ogrebat (samo meku četkicu). Sredstva za čišćenje s neutralnom pH vrijednošću (7,0) najprikladnija su.
- Instrument je pogodan za ultrazvučno čišćenje.
- Pažljivo isperite destiliranom vodom
- pravilno skladištiti i sterilizirati
- Nakon čišćenja i ispiranja, instrumente treba pažljivo osušiti. Cijevi treba ispuhati.
- Standardne tehnike sterilizacije
- Preporučuje se sterilizirati instrumente u autoklavu.
- Ne sterilizirati u vrućem zraku.
- Autoklavni standardni ciklusi:
Parna sterilizacija 134 °C / 243 °F 15 minuta.
Možete koristiti i druga vremena i temperature, ali ih prvo morate validirati. (Napomena: proizvođač vašeg autoklava mora potvrditi temperature i vrijeme sterilizacije.) Temperature u autoklavu ne bi smjele prelaziti 137 °C / 280 °F.



Napomena:

- Molimo vas da se pridržavate naših uputa za pripremu br. 462 za višekratno upotrebljive endoskopske instrumente (toplinski otporne). Ako ih nemate, molimo vas da ih zatražite.

Dodaci i rezervni dijelovi

LP371-200	Ethic. Ligaturni kliips za pincetu za postavljanje klipova, nehrđajući čelik; kod boje: plava; veličina kliipa: mala; pakiranje: spremnik od 36 komada s 6 klipova.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje spojnice, nehrđajući čelik; kod boje: bijela; veličina spojnice: srednja; pakiranje: 36 spremnika sa 6 spojnice
LP371-202	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje spona, nehrđajući čelik; kod boje: zelen; veličina spona: srednje velika; pakiranje: 18 spremnika sa 6 spona
LP371-203	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje spojnice od nehrđajućeg čelika; kod boje: žuta; veličina spojnice: velika; pakiranje: 18 spremnika sa 6 spojnice.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje titanijskih kopči; kod boje: plava; veličina kopče: mala; pakiranje: 36 spremnika s 6 kopči
LP371-211	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje spojnice titan: kod boje: plava; veličina spojnice: mala; pakiranje: 15 spremnika sa 20 spojnice
LP371-212	Ethic. Ligaturni klip za primjenu spona. Titanski pinceta; boja: bijela; veličina spona: srednja; pakiranje: spremnik od 36 spona s 6 spona
LP371-213	Ethic. Ligaturclip za nanošenje kopče, titanski pinceta; kod boje: bijela; veličina kopče: srednja; pakiranje: 15 spremnika s 20 kopči
LP371-214	Ethic. Ligaturclip za aplikaciju kopče, titanski pinceta; kod boje: zelena; veličina kopče: srednja-velika; pakiranje: 18 spremnika s 6 kopči
LP371-215	Ethic. Ligaturclip za pincetu za postavljanje klipa, titan; kod boje: žuta; veličina klipa: velika; pakiranje: 18 spremnika. Sa 6 klipova

Popravci

- Čak i kada se koriste prema namjeni, kirurški instrumenti podliježu manje ili više ozbiljnom habanju, ovisno o tome koliko se intenzivno koriste. To habanje se iz tehničkih razloga ne može izbjeći.
- Molimo vas da sami ne obavljate nikakve popravke. Servisiranje i popravke smiju obavljati samo mi – proizvođač – ili druge osobe koje smo ovlastili.
- Kirurški instrumenti koji se šalju na popravak moraju biti očišćeni, dezinficirani i sterilizirani.

Simbolovi i objašnjenja

	Slijedite upute za uporabu
REF	Broj narudžbe
	Nesterilan
	Proizvođač
	Nepoštivanje upozorenja i mjera opreza može dovesti do smrti ili teških ozljeda
	Broj serije
	Broj obaviještenog tijela za CE označavanje



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Njemačka
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com