

Rögzítőfogó 10 mm

Rögzítőfogó 10 mm



Cikkszámok

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Rendeltetés

- A felhasználó dönti el, hogy ez az orvosi termék megfelelő-e vagy sem. Nem vállalunk felelősséget a helytelen használat és előkészítés következményeiért.

Működésellenőrzés

- A szállítás után és minden használat előtt az új műszereket alapos szemrevételezésnek kell alávetni, és működésüket ellenőrizni kell. Ha a műszerek külső hibákat mutatnak (karcolások, törések, repedések, bevágások, sérült szigetelés, hajlított alkatrészek vagy merevség), vagy ha nem a leírt módon működnek, kérjük, haladéktalanul értesítse gyártónkat vagy értékesítési partnereinket.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ne használjon sérült műszereket.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen és teljes egészében ezt az információt. A helytelen használat és ápolás, valamint a nem megfelelő kezelés a sebészeti eszközök korai elhasználódásához vezethet. Az eszközt használó személyeknek ismerniük kell a sebészeti eszközök, kiegészítők és kapcsolódó eszközök használatát és kezelését.

Új műszerek első használata

- A vadonatúj műszert ki kell venni a polietilén tasakból a páralecsapódás elkerülése érdekében, és az első előkészítésig tiszta, száraz (max. 75% relatív páratartalom) és szellőző, védőcsomagolásban, szobahőmérsékleten kell tárolni.
- A kapcsos fogó nem steril állapotban kerül forgalomba. A műszereket az első használat előtt és minden újbóli használat előtt alaposan meg kell tisztítani és sterilizálni.
- A kapcsos fogókat autokláv sterilizálásra fejlesztették ki, ez a sterilizálási módszer bevált gyakorlatnak számít. Alacsony hőmérsékletű eljárásokat, pl. STERRAD-ot is alkalmazhat.


Karbantartási és biztonsági tanácsok

- Minden sebészeti műszert a legnagyobb gondossággal kell kezelni szállítás, tisztítás, ápolás, sterilizálás és tárolás során. Különösen ez vonatkozik a pengékre és a finom pófákra, amelyek nagyon kényes alkatrészek.


Összeszerelés / szétszerelés




Válassza le a fogantyút és a szárat

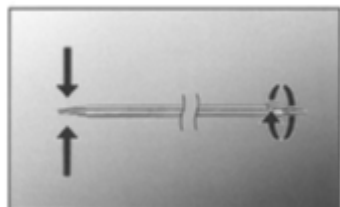

Csavarja ki a betétet

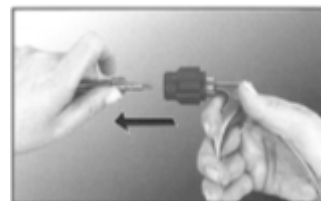


Húzza ki a szárat a csatlakozóból

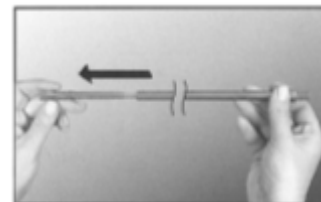


Húzza ki a betétet a tengelyből

Részletnézet: pofa

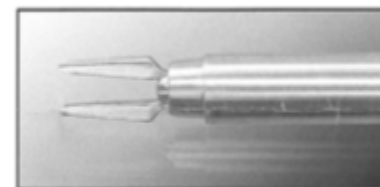

Nyitott pófák

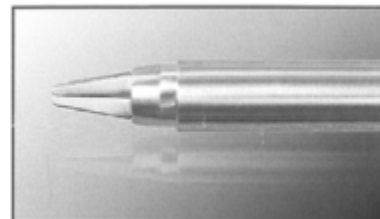

Zárva

Előkészítés

- Minden sebészeti műszert minden használat után fertőtleníteni és alaposan megtisztítani kell. Minden műszert gondosan tisztítson meg, ellenőrizzen és teszteljen. Használat előtt minden műszert sterilizáljon. A megfelelő tisztítási és karbantartási eljárás meghosszabbítja a műszerek élettartamát. Különös figyelmet fordítson a résidőkre, reteszekre, zárókra, csövekre és más, nehezen elérhető alkatrészekre. Az endoszkópos kapcsos fogókat szétszerelve kell megtisztítani (lásd Összeszerelés / Szétszerelés).
- A nyílt műtétekhez használt kapcsos fogót teljesen ki kell nyitni (a rugó reteszelésének feloldása/a gyűrűk teljes kinyitása).

Figyelem

- Ne használjon maró vagy karcoló hatású tisztítószereket (csak puha kefével tisztítsa). A semleges pH-értékű (7,0) tisztítószerek a legalkalmasabbak.
- A műszer ultrahangos tisztításra alkalmas.
- Óvatosan öblítse le desztillált vízzel
- Tárolja és sterilizálja megfelelően
- A tisztítás és öblítés után a műszereket gondosan meg kell szárítani. A csöveket ki kell fűjni.
- Szabványos sterilizálási technikák
- A műszerek autoklávban történő sterilizálása ajánlott.
- Ne sterilizálja forró levegővel.
- Autokláv Szabványos ciklusok: Gőzsterilizálás 134 °C/243 °F hőmérsékleten 15 percig.
- Más időtartamokat és hőmérsékleteket is alkalmazhat, de azokat előbb ellenőriznie kell. (Megjegyzés: az autokláv gyártójának kell megerősítenie a hőmérsékleteket és a sterilizálási időket.) Az autokláv hőmérséklete nem haladhatja meg a 137 °C/280 °F-ot.

Megjegyzés:	- Kérjük, vegye figyelembe a #462 számú, újrafelhasználható endoszkópos eszközök (hőálló) előkészítésére vonatkozó utasításainkat. Amennyiben nem rendelkezik velük, kérje meg őket.
---------------------------	---

Tartozékok és pótalkatrészek

LP371-200	Ethic. Ligaturclip klipszfelfelyező fogóhoz, rozsdamentes acél; színekód: kék; klipsz mérete: kicsi; csomagolás: 36 darabos tár 6 db klipszel.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip klipszfelfelyező fogóhoz, rozsdamentes acél; színekód: fehér; klipsz mérete: közepes; csomagolás: 36 db-os tár 6 db klipszszel
LP371-202	Ethic. Ligaturclip klipszető fogóhoz, rozsdamentes acél; színekód: zöld; klipsz mérete: közepes-nagy; csomagolás: 18 db-os tár 6 db klipszel
LP371-203	Ethic. Ligaturclip klipszető fogóhoz, rozsdamentes acél; színekód: sárga; klipsz mérete: nagy; csomagolás: 18 db-os tár, 6 db klipszszel.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip klipszfelfelyező fogóhoz titán; színekód: kék; klipsz mérete: kicsi; csomagolás: 36 db-os tár 6 db klipszszel
LP371-211	Ethic. Ligaturclip titán kapcsos fogóhoz; színekód: kék; kapcs mérete: kicsi; csomagolás: 15 db-os tár 20 kapcs
LP371-212	Ethic. Ligatúrklip klipek felhelyezéséhez. Titán fogó; színekód: fehér; klip méret: közepes; csomagolás: 36 db-os tár 6 klipet tartalmaz
LP371-213	Ethic. Ligaturclip klip felhelyezéshez titán fogó; színekód: fehér; klip mérete: közepes; csomagolás: 15 db-os tár 20 db klip
LP371-214	Ethic. Ligaturclip klipfelhelyező fogóhoz, titán; színekód: zöld; klip méret: közepes-nagy; csomagolás: 18 db-os tár, 6 db klip
LP371-215	Ethic. Ligaturclip titán kapcsos fogóhoz; színekód: sárga; kapcs mérete: nagy; csomagolás: 18 db-os tár. 6 kapcsot tartalmaz

Javítás

- A sebészeti eszközök a rendeltetésszerű használat mellett is többé-kevésbé erős kopásnak vannak kitéve, attól függően, hogy milyen intenzíven használják őket. Ez a kopás műszaki okokból elkerülhetetlen.
- Kérjük, ne végezzen javításokat saját kezűleg. A szervizelést és a javításokat kizárólag mi – a gyártó – vagy az általunk felhatalmazott személyek végezhetik.
- A javításra visszaküldendő sebészeti eszközöket meg kell tisztítani, fertőtleníteni és sterilizálni.

Szimbólumok és magyarázatok

	Kövesse a használati utasítást
REF	Rendelési szám
	Nem steril
	Gyártó
	A figyelmeztetések és óvintézkedések be nem tartása halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet
	Tételszám
	CE-jelölés, bejelentett szervezet száma