

Klippu-festingartangir 10 mm



Vörunúmer

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Ætlaður notkun

- Notandinn ákveður hvort þetta læknistæki henti eða ekki. Við berum enga ábyrgð á afleiðingum rangrar notkunar og undirbúnings.

Virkniþrófun

- Eftir afhendingu og fyrir hverja notkun skulu ný tæki gangast undir ítarlega sjónræna skoðun og virkni þeirra skulu prófuð. Ef tækin sýna einhverjar ytri galla (rifur, brot, sprungur, skerur, skemmda einangrun, beygð eða stíf hluti) eða ef þau virka ekki eins og lýst er, skal framleiðandann eða söluaðila okkar tilkynna það strax.

Varnir og varúðarráðstafanir

- Ekki nota skemmd tæki.
- Vinsamlegast lestrðu þessar upplýsingar vandlega og í heild. Misnotkun, röng meðferð og óviðeigandi meðhöndlun getur valdið snemmbúinni versnun skurðtækja. Þeir sem nota þetta tæki ættu að hafa þekkingu á notkun og meðhöndlun skurðtækja, aukabúnaðar og tengdra tækja.

Fyrsta notkun nýrra tækja

- Nýja tækið skal tekið úr pólýetýlenpokanum til að koma í veg fyrir þéttingu og skal geymt hreint, þurr (hámarks loftraki 75% RH) og loftbært í ílati við stofuhita þar til það er notað í fyrsta sinn.
- Klippu-festingartangirnar eru afhentar ósterílar. Tækin verða að vera vandlega hreinsuð og sótthreinsuð fyrir fyrstu notkun og fyrir hverja endurnotkun.
- Klippu-festingartangir voru próaðar fyrir örverudrápsmeðferð í þrýstilofts- og gufuofni (autóklaf), og sú aðferð hefur sannaða sögu. Einnig er hægt að nota lágttemperatur-aðferðir, t.d. STERRAD.


Viðhalds- og öryggisráð

- Öll skurðtæki skulu meðhöndluð með mestu varúð við flutning, þríf, umönnun, sótthreinsun og geymslu. Sérstaklega varðandi blaðhluti og fína kjálka, sem eru mjög viðkvæmir.


Samsetning / Sundurliðun




Aftengja handfang og skaft

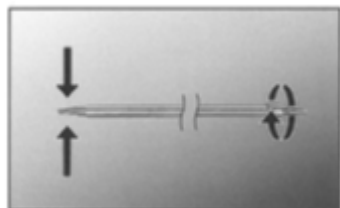

Afturhægt innstungu

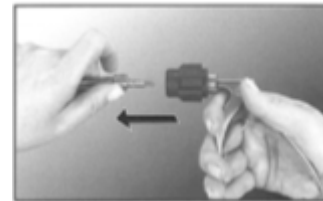


Togið skaftið úr tenginu

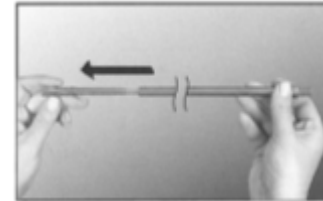


Toga innstungu úr ásnum

Nákvæmnismunnstykki

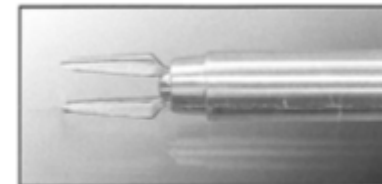

Opnaðar kjálkar

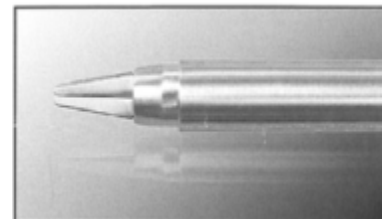

Kjaftar lokaðir

Undirbúningur

- Öll skurðtæki skulu sótthreinsuð og sérstaklega hreinsuð eftir hverja notkun. Hreinsið, athugið og prófið hvert tæki vandlega. Styrliseruð öll tæki fyrir notkun. Hentug hreinsunar- og viðhaldsferli eykur endingartíma tækjanna. Sérstaklega skal huga að rifum, læsingum, lokunum, rörum og öðrum erfiðlega viðkomandi hlutum. Endoskopískar klippu-festargripir skulu hreinsaðir í sundur (sjá Samsetningu / Sundurtekju). Klemmafestitöng fyrir opna skurðaðgerð skal opna alveg (losa gorminn/opna hringina alveg).

Athugið

- Ekki nota nokkur tærandi eða rispandi hreinsiefni (aðeins mjúkan bursta). Hreinsiefni með hlutlausu sýrustigi (7,0) henta best.
- Tækið hentar fyrir ómpvott.
- Skolið varlega með eimuðu vatni
- geyma og sótthreinsa nægilega
- Eftir þríf og skolon skulu tækin þurrkuð vandlega. Pípur skulu blásnar út.
- Staðlaðar sótthreinsunaraðferðir
- Mælt er með að sótthreinsa tækin í örverudrepani gufuofni (autóklaf).
- Ekki sótthreinsa með heitu lofti.
- Ökutóvisan staðalskeiða: Gufuafgerðun 134°C/243°F í 15 mínútur. Einnig er hægt að nota aðra tíma og hitastig, en þau skulu vera staðfest fyrst. (Ath.: framleiðandi sjálfvirka þurrkunnar þíns þarf að staðfesta hitastig og sótthreinsunartíma.) Hitastigið í sjálfvirka þurrkunni má ekki fara yfir 137 °C/280 °F.

	Athugið:
- Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum okkar um undirbúning #462 fyrir endurnýtanleg endoskop-tæki (hitapólin). Ef þið eigið þær ekki, vinsamlegast biðið um þær.	

Aukahlutir og varahlutir

LP371-200	Ethic. Ligaturklippi fyrir klippusetningarspjöld, ryðfrítt stál; litakóði: blár; klippustærð: lítil; umbúðir: 36 einingar með 6 klippum.
LP371-201	Ethic. Ligaturklippa fyrir klippusetjarspónur, ryðfrítt stál; litakóði: hvítur; klippustærð: meðalstór; umbúðir: 36 magasín með 6 klippum
LP371-202	Ethic. Festiklemmur fyrir klemmusetjara úr ryðfríu stáli; litakóði: grænn; klemmustærð: meðalstór; umbúðir: 18 magasín með 6 klemmum
LP371-203	Ethic. Ligaturklipsfesting fyrir klippusetningartöng úr ryðfríu stáli; litakóði: gulur; klipsstærð: stór; umbúðir: 18 magasín með 6 klipsum.
LP371-210	Ethic. Ligaturklippa fyrir klippusetningartöng úr titaní; litakóði: blár; klippustærð: lítil; umbúðir: 36 magasín með 6 klippum
LP371-211	Ethic. Festiklemmur fyrir klemmafestingartöng úr titaní; litakóði: blár; klemmustærð: lítil; umbúðir: 15 magasín með 20 klemmum
LP371-212	Ethic. Ligaturklippa til festingar. Títan-saks; litakóði: hvítur; klippustærð: meðalstór; umbúðir: magasín með 36 klippum og 6 viðbótarklippum
LP371-213	Ethic. Ligaturklips fyrir klippusetningu, títan grippar; litakóði: hvítur; klipsstærð: meðalstór; umbúðir: magasín 15 með 20 klipsum
LP371-214	Ethic. Ligaturklipsfestiforsjár úr titaní; litakóði: grænn; klipsstærð: meðalstór-stór; umbúðir: 18 magasín með 6 klipsum
LP371-215	Ethic. Festiklips fyrir títanfestiklemmtöng; litakóði: gulur; klipsstærð: stór; umbúðir: 18 magasín. Með 6 klipsum

Viðgerðir

- Jafnvel þegar skurðtæki eru notuð eins og til er ætlast verða þau fyrir meiri eða minni slit, allt eftir notkunarálagi. Þennan slit er ekki hægt að forðast af tæknilegum ástæðum.
- Vinsamlegast framkvæmið ekki viðgerðir sjálf. Viðhald og viðgerðir má eingöngu framkvæma hjá okkur – framleiðandanum – eða af öðrum aðilum sem við höfum heimilað.
- Skurðtæki sem send eru til viðgerðar skulu vera hreinsuð, sóttgreinsuð og gerlaeyðandi.

Tákn og skýringar

	Fylgja skal leiðbeiningum um notkun
REF	Pantanúmer
	Ósteril
	Framleiðandi
	Vanræksla á að fylgja viðvörðunum og varúðarráðstöfunum getur leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla
LOT	Lotunúmer
CE	CE-merkingar tilkynnts aðila númer



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Þýskaland
Sími +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com