

Pinza per applicare clip da 10 mm



Codici articolo

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Destinazione d'uso

- Spetta all'utente decidere se questo prodotto medico sia appropriato o meno. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze di un uso e una preparazione non corretti.

Test di funzionamento

- Dopo la consegna e prima di ogni utilizzo, i nuovi strumenti devono essere sottoposti a un accurato controllo visivo e a una verifica del funzionamento. Se gli strumenti presentano difetti esterni (graffi, rotture, crepe, scheggiature, isolamento danneggiato, parti piegate o rigidità) o se non funzionano come descritto, si prega di informare immediatamente noi come produttori o i nostri partner commerciali.

Avvertenze e precauzioni

- Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Si prega di leggere attentamente e integralmente queste informazioni. L'uso improprio, la cura errata e la manipolazione scorretta possono causare un deterioramento precoce degli strumenti chirurgici. Le persone che utilizzano questo strumento devono avere conoscenze relative all'uso e alla manipolazione di strumenti chirurgici, accessori e dispositivi associati.

Primo utilizzo di strumenti nuovi

- Lo strumento nuovo di zecca deve essere estratto dal sacchetto di polietilene per evitare la formazione di condensa e deve essere conservato pulito, asciutto (umidità atmosferica massima del 75% in condizioni di umidità relativa) e protetto in un contenitore aerato a temperatura ambiente fino alla prima preparazione.
- Le pinze per l'applicazione delle clip vengono fornite non sterili. Gli strumenti devono essere accuratamente puliti e sterilizzati prima del primo utilizzo e prima di ogni riutilizzo.
- Le pinze applicatrici di clip sono state sviluppate per la sterilizzazione in autoclave, un tipo di sterilizzazione che ha una storia comprovata. È possibile utilizzare anche procedure a bassa temperatura, ad esempio STERRAD.


Consigli di sicurezza per la manutenzione

- Tutti gli strumenti chirurgici devono essere maneggiati con la massima cura durante il trasporto, la pulizia, la manutenzione, la sterilizzazione e la conservazione. Ciò vale in particolare per le lame e le ganasce sottili, che sono parti molto delicate.


Montaggio / Smontaggio




Scollegare l'impugnatura e l'asta

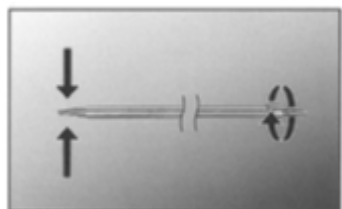

Svitare l'inserto

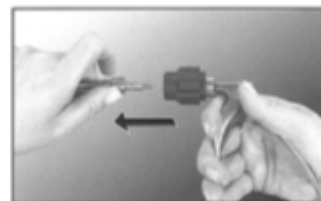


Estrarre l'asta dal giunto

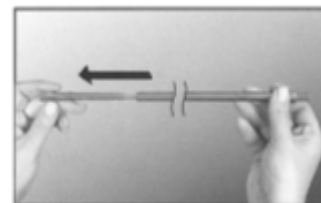


Estrarre l'inserto dall'albero

Vista dettagliata della ganasce

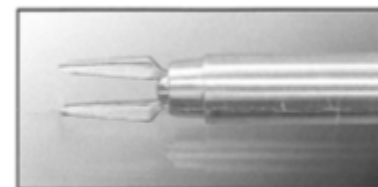

Ganasce aperte

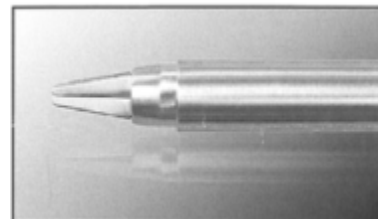

Ganasce chiuse

Preparazione

- Ogni strumento chirurgico deve essere disinfettato e pulito accuratamente dopo ogni utilizzo. Pulire, controllare e testare attentamente ogni strumento. Sterilizzare tutti gli strumenti prima dell'uso. Una procedura di pulizia e manutenzione adeguata aumenterà la durata degli strumenti. Prestare particolare attenzione a fessure, chiusure, tubi e altre parti difficili da raggiungere. Le pinze per l'applicazione di clip endoscopiche devono essere pulite smontate (vedere Montaggio / Smontaggio). Le pinze applicatrici di clip per chirurgia a cielo aperto devono essere aperte completamente (sbloccare la molla/apertura completa degli anelli).

Attenzione

- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi (utilizzare solo spazzole morbide). I detergenti con pH neutro (7,0) sono i più adatti.
- Lo strumento è adatto alla pulizia ad ultrasuoni.
- Risciacquare accuratamente con acqua distillata
- Conservare e sterilizzare in modo adeguato
- Dopo la pulizia e il risciacquo, gli strumenti devono essere asciugati con cura. I tubi devono essere soffiati.
- Tecniche di sterilizzazione standard
- Si raccomanda di sterilizzare gli strumenti in autoclave.
- Non sterilizzare con aria calda.
- Cicli standard in autoclave:
Sterilizzazione a vapore a 134 °C/243 °F per 15 min. È possibile utilizzare anche altri tempi e temperature, ma è necessario verificarne prima l'idoneità. (Nota: il produttore dell'autoclave deve confermare le temperature e i tempi di sterilizzazione.) Le temperature nell'autoclave non devono superare i 137 °C/280 °F.

 Nota:	Si prega di osservare le nostre istruzioni per la preparazione n. 462 relative agli strumenti endoscopici riutilizzabili (termoresistenti). Se non le avete, vi preghiamo di richiederle.

Accessori e pezzi di ricambio

LP371-200	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice, acciaio inossidabile; codice colore: blu; dimensione clip: piccola; confezione: caricatore da 36 con 6 clip.
LP371-201	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice, acciaio inossidabile; codice colore: bianco; misura clip: media; confezione: caricatore da 36 con 6 clip
LP371-202	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice, acciaio inossidabile; codice colore: verde; misura clip: medio-grande; confezione: caricatore da 18 con 6 clip
LP371-203	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice in acciaio inossidabile; codice colore: giallo; misura clip: grande; confezione: caricatore da 18 con 6 clip.
LP371-210	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice in titanio; codice colore: blu; misura clip: piccola; confezione: caricatore da 36 con 6 clip
LP371-211	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice in titanio; codice colore: blu; misura clip: piccola; confezione: caricatore da 15 con 20 clip
LP371-212	Ethic. Clip di legatura per applicazione clip. Pinza in titanio; codice colore: bianco; dimensione clip: media; confezione: caricatore da 36 con 6 clip
LP371-213	Ethic. Clip di legatura per pinza di applicazione clip in titanio; codice colore: bianco; misura clip: media; confezione: caricatore da 15 con 20 clip
LP371-214	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice in titanio; codice colore: verde; misura clip: medio-grande; confezione: caricatore da 18 con 6 clip

LP371-215	Ethic. Clip di legatura per pinza applicatrice in titanio; codice colore: giallo; misura clip: grande; confezione: caricatore da 18. Con 6 clip
-----------	---

Riparazioni

- Anche se utilizzati come previsto, gli strumenti chirurgici sono soggetti a usura più o meno grave, a seconda dell'intensità d'uso. Tale usura non può essere evitata per motivi tecnici.
- Si prega di non effettuare riparazioni autonomamente. La manutenzione e le riparazioni possono essere eseguite solo da noi - il produttore - o da altre persone da noi autorizzate.
- Gli strumenti chirurgici da restituire per la riparazione devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati.

Simboli e spiegazioni

	Seguire le istruzioni per l'uso
REF	Codice d'ordine
	Non sterile
	Produttore
	La mancata osservanza delle avvertenze e delle precauzioni può causare la morte o gravi lesioni
	Numero di lotto
	Marchatura CE - Numero dell'organismo notificato