

Pincetas su spaustuku, 10 mm



Prekės numeriai

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Paskirtis

- Vartotojas pats sprendžia, ar šis medicinos produktas yra tinkamas. Mes neprisiame atsakomybės už netinkamo naudojimo ir paruošimo pasekmes.

Funkcijų patikrinimas

- Po pristatymo ir prieš kiekvieną naudojimą nauji instrumentai turi būti kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, ar veikia. Jei instrumentai turi išorinių defektų (įbrėžimų, lūžių, įtrūkimų, įpjovimų, pažeistos izoliacijos, išlenktų dalių ar yra nelankstūs) arba jei jie neveikia taip, kaip aprašyta, nedelsdami informuokite mus, gamintoją, arba mūsų pardavimo partnerius.

Ispėjimai ir atsargumo priemonės

- Nenaudokite pažeistų instrumentų.
- Prašome atidžiai ir išsamiai perskaityti šią informaciją. Netinkamas naudojimas ir priežiūra, taip pat netinkamas elgesys su instrumentais gali sukelti greitesnę chirurginių instrumentų susidėvėjimą. Asmenys, naudojančys šį instrumentą, turėtų turėti žinių apie chirurginių instrumentų priedų ir susijusių prietaisų naudojimą bei elgesį su jais.

Naujų instrumentų pirmasis naudojimas

- Visiškai naujas instrumentas turi būti išimtas iš polietileno maišelio, kad išvengtumėte kondensato susidarymo, ir iki pirmojo paruošimo turi būti laikomas švarus, sausas (maks. aplinkos drėgnumas 75 % RH) ir vėdinamas apsauginiame inde kambario temperatūroje.
- Pincetas su spaustuku tiekiamas nesterilus. Prieš pirmąjį naudojimą ir prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą instrumentai turi būti kruopščiai išvalyti ir sterilizuoti.
- Klipų tvirtinimo pincetai buvo sukurti sterilizavimui autoklave, šis sterilizavimo būdas yra patikrintas. Taip pat galite naudoti žemos temperatūros procedūras, pvz., STERRAD.


Priežiūros ir saugos patarimai

- Su visais chirurginiais instrumentais reikia elgtis labai atsargiai transportavimo, valymo, priežiūros, sterilizavimo ir laikymo metu. Ypač tai taikoma peiliukams ir ploniems žandams, kurie yra labai trapūs.


Surinkimas / išardymas




Atsukite rankeną ir kotą

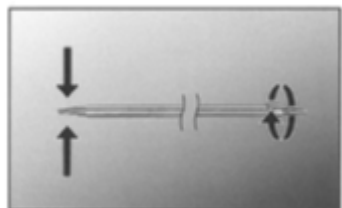

Atsukite įdėklą

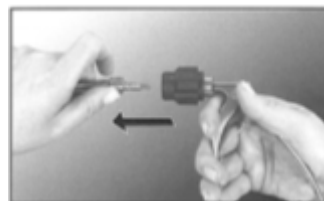


Ištraukite kotą iš jungties

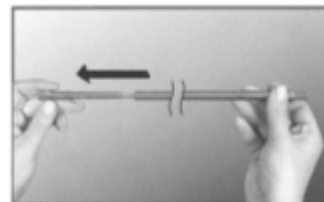


Ištraukite įdėklą iš veleno

Išsamus vaizdas Žandikaulis

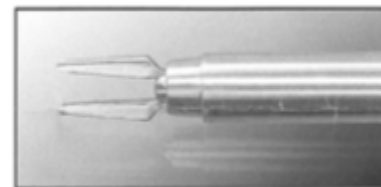

Atidaryti žandai

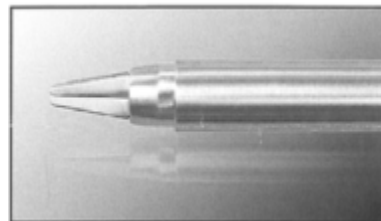

Uždaryti žandai



Pastaba:

- Prašome laikytis mūsų instrukcijų dėl daugkartinio naudojimo endoskopinių instrumentų (atsparių karščiui) paruošimo Nr. 462. Jei jų neturite, prašome jų paprašyti.

Pincetas su spaustuku 10 mm

Paruošimas

- Kiekvienas chirurginis instrumentas turi būti dezinfekuojamas ir ypač kruopščiai valomas po kiekvieno naudojimo. Kiekvieną instrumentą kruopščiai nuvalykite, patikrinkite ir išbandykite. Prieš naudojimą visus instrumentus sterilizuokite. Tinkama valymo ir priežiūros procedūra padidins instrumentų tarnavimo laiką. Ypatingą dėmesį skirkite angoms, fiksatoriams, užraktams, vamzdeliams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms dalims. Endoskopinės klipų tvirtinimo žnyplės turi būti valomos išardytos (žr. Surinkimas / išardymas). Atviros chirurgijos spaustuvai turi būti visiškai atidaryti (atrankinti spyruoklę / visiškai atidaryti žiedus).

Dėmesio

- Nenaudokite jokių šerdinančių ar braižančių valiklių (tik švelniai šveiskite). Labiausiai tinka valikliai su neutraliu pH lygiu (7,0).
- Prietaisą galima valyti ultragarsu.
- Kruopščiai nuplaukite distiliuotu vandeniu
- Laikykite ir sterilizuokite tinkamai

- Po valymo ir skalavimo instrumentus reikia kruopščiai išdžiovinti. Vamzdelius reikia išpūsti.

- Standartiniai sterilizavimo metodai
- Rekomenduojama instrumentus sterilizuoti autoklave.
- Nesterilizuokite karštu oru.
- Autoklavo standartiniai ciklai:
Sterilizavimas garais 134 °C/243 °F 15 min.
Taip pat galite naudoti kitus laikus ir temperatūras, tačiau pirmiausia turėtumėte juos patvirtinti. (Pastaba: jūsų autoklavo gamintojas turi patvirtinti temperatūras ir sterilizavimo trukmę.) Temperatūra autoklave neturėtų viršyti 137 °C/280 °F.

Priedai ir atsarginės dalys

LP371-200	Ethic. Ligaturclip skirta spaustuvams, nerūdijantis plienas; spalvos kodas: mėlyna; spaustuko dydis: mažas; pakuotė: 36 vnt. dėklas su 6 spaustukais.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip skirta spaustukams, nerūdijančio plieno; spalvos kodas: balta; spaustuko dydis: vidutinis; pakuotė: 36 vnt. dėklas su 6 spaustukais
LP371-202	Ethic. Ligaturclip skirta klipų tvirtinimo pincetui, nerūdijančio plieno; spalvos kodas: žalia; klipo dydis: vidutinis-didelis; pakuotė: 18 dėžutė su 6 klipais
LP371-203	Ethic. Ligaturclip klipų uždėjimo pincetui, nerūdijantis plienas; spalvos kodas: geltonas; klipo dydis: didelis; pakuotė: 18 dėtuvių su 6 klipais.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip skirta klipų uždėjimo pincetui iš titano; spalvos kodas: mėlyna; klipo dydis: mažas; pakuotė: 36 vnt. su 6 klipais
LP371-211	Ethic. Ligaturclip titano spaustuvams; spalvos kodas: mėlyna; spaustuko dydis: mažas; pakuotė: 15 dėtuvių su 20 spaustukais
LP371-212	Ethic. Ligatūros spaustukas. Titano pincetas; spalvos kodas: baltas; spaustuko dydis: vidutinis; pakuotė: 36 vnt. su 6 spaustukais
LP371-213	Ethic. Ligaturclip, skirtas klipams uždėti titano pincetas; spalvos kodas: baltas; klipo dydis: vidutinis; pakuotė: 15 dėtuvių su 20 klipais
LP371-214	Ethic. Ligaturclip klipų tvirtinimo titano pincetai; spalvos kodas: žalia; klipo dydis: vidutinis-didelis; pakuotė: 18 dėžutė su 6 klipais
LP371-215	Ethic. Ligaturclip titano spaustuvams; spalvos kodas: geltona; spaustuko dydis: didelis; pakuotė: 18 vnt. su 6 spaustukais

Remontas

- Net ir naudojami pagal paskirtį, chirurginiai instrumentai patiria daugiau ar mažiau intensyvių nusidėvėjimą, priklausomai nuo to, kaip intensyviai jie naudojami. Dėl techninių priežasčių šio nusidėvėjimo išvengti neįmanoma.
- Prašome patys neatlikti jokių remonto darbų. Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik mes – gamintojas – arba kiti mūsų įgalioti asmenys.
- Chirurginiai instrumentai, kurie turi būti grąžinti remontui, turi būti išvalyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

Simboliai ir paaiškinimai

	Laikykites naudojimo instrukcijų
REF	Užsakymo numeris
	Nesterilus
	Gamintojas
	Nesilaikant įspėjimų ir atsargumo priemonių, gali kilti mirties ar sunkių sužalojimų pavojus
LOT	Partijos numeris
CE	CE ženklo notifikuotosios įstaigos numeris