

Piespiešanas knaibles 10 mm



Preces numuri

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Lietošanas mērķis

- Lēmums par to, vai šis medicīnas produkts ir piemērots, ir lietotāja ziņā. Mēs neuzņemamies atbildību par nepareizas lietošanas un sagatavošanas sekām.

Funkcionālā pārbaude

- Pēc piegādes un pirms katras lietošanas jaunajiem instrumentiem jāveic rūpīga vizuāla pārbaude un jāpārbauda to funkcionalitāte. Ja instrumentiem ir kādi ārēji defekti (skrāpējumi, lūzumi, plaisas, iecirtumi, bojāta izolācija, saliekta daļas vai stīvums) vai ja tie nedarbojas aprakstītajā veidā, lūdz, nekavējoties informējiet mūs kā ražotāju vai mūsu tirdzniecības partnerus.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Nelietojiet bojātus instrumentus.
- Lūdz, uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo informāciju. Nepareiza lietošana un nepareiza kopšana, kā arī nepareiza rīcība var izraisīt ķirurģisko instrumentu priekšlaicīgu nolietojanos. Personām, kas lieto šo instrumentu, jābūt zināšanām par ķirurģisko instrumentu, piederumu un saistīto ierīču lietošanu un rīcību ar tiem.

Jaunu instrumentu pirmā lietošana

- Pilnīgi jauno instrumentu jāizņem no polietilēna maisiņa, lai izvairītos no kondensāta veidošanās, un līdz pirmajai sagatavošanai tas jāuzglabā tīrs, sauss (maksimālais gaisa mitrums 75 % RH) un vēdināms aizsargājošā konteinerā istabas temperatūrā.
- Klipu uzlikšanas pincetes tiek piegādātas nesterilas. Instrumenti pirms pirmās lietošanas un pirms katras atkārtotas lietošanas ir rūpīgi jāiztīra un jāsterilizē.
- Klipu uzlikšanas pincetes ir izstrādātas sterilizācijai autoklāvā, un šāda veida sterilizācijai ir pierādīta efektivitāte. Jūs varat izmantot arī zemas temperatūras procedūras, piemēram, STERRAD.

Drošības ieteikumi apkopes laikā

- Ar visiem ķirurģiskajiem instrumentiem jāapietas ar vislielāko rūpību to transportēšanas, tīrīšanas, kopšanas, sterilizācijas un uzglabāšanas laikā. Tas jo īpaši attiecas uz asmeņiem un smalkajām žoklēm, kas ir ļoti trauslas detaļas.


Montāža / demontāža




Atvienojiet rokturi un kātu



Atskrūvējiet ieliktni

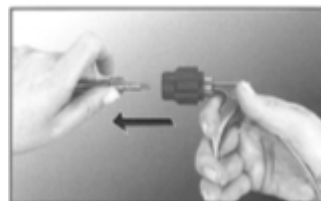


Izvelciet vārpstu no savienojuma

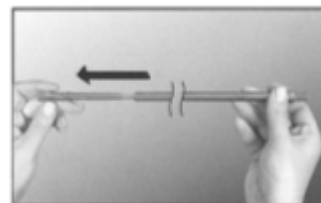


Izvelciet ieliktni no vārpstas

Detalizēts skats uz žokli

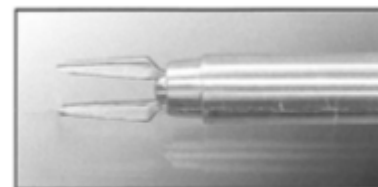

Atvērtas žokļi

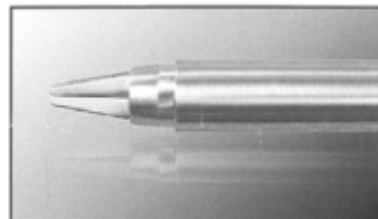

Aizvērtas žokļi



Piezīme:

- Lūdz, ievērojiet mūsu sagatavošanas instrukcijas Nr. 462 par atkārtoti lietojamiem endoskopijas instrumentiem (termiski izturīgiem). Ja tās nav jūsu rīcībā, lūdz, pieprasiet tās.

Piesprādzēšanas pincete 10 mm

Sagatavošana

- Katrs ķirurģiskais instruments ir jādezinficē un īpaši jāiztīra pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgi iztīriet, pārbaudiet un pārbaudiet katru instrumentu. Pirms lietošanas sterilizējiet visus instrumentus. Atbilstoša tīrīšanas un apkopes procedūra palielinās instrumentu kalpošanas laiku. Īpašu uzmanību pievēršiet spraugām, fiksatoriem, aizdariem, caurulītēm un citām grūti sasniedzamām detaļām. Endoskopiskās skavas uzlikšanas pincetes ir jātīra izjauktas (skatīt Sastādīšana / Izjaukšana).
- Klipu uzlikšanas knaibles atklātai operācijai ir jāatver pilnībā (atbloķējiet atspēri/pilnībā atveriet gredzenus).

Uzmanību

- Nelietojiet korozīvus vai skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus (tikai mīkstu suku). Vispiemērotākie ir tīrīšanas līdzekļi ar neitrālu pH līmeni (7,0).
- Instrumenti ir piemēroti ultraskaņas tīrīšanai.
- Rūpīgi noskalojiet ar destilētu ūdeni
- Uzglabājiet un sterilizējiet atbilstoši
- Pēc tīrīšanas un skalošanas instrumenti ir rūpīgi jānosusina. Caurules ir jāizpūš.
- Standarta sterilizācijas metodes
- Ieteicams instrumentus sterilizēt autoklāvā.
- Nesterilizējiet karstā gaisā.
- Autoklāva standarta cikls:
Tvaika sterilizācija 134 °C/243 °F 15 minūtes.
Var izmantot arī citus laikus un temperatūras, bet tās vispirms jāpārbauda. (Piezīme: jūsu autoklāva ražotājam jāpastiprina temperatūras un sterilizācijas laiki.) Temperatūra autoklāvā nedrīkst pārsniegt 137 °C/280 °F.

Piederumi un rezerves daļas

LP371-200	Ethic. Ligaturclip klipu uzlikšanas pincetei, nerūsējošais tērauds; krāsu kods: zils; klipa izmērs: mazs; iepakojums: 36 magazīna ar 6 klipiem.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip klipu uzlikšanas pincetei, nerūsējošais tērauds; krāsu kods: balts; klipa izmērs: vidējs; iepakojums: 36 magazīna ar 6 klipiem
LP371-202	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanas pincetei, nerūsējošais tērauds; krāsu kods: zaļš; skavas izmērs: vidēji liels; iepakojums: 18 kasetne ar 6 skavām
LP371-203	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanas pincetei no nerūsējošā tērauda; krāsu kods: dzeltena; skavas izmērs: liels; iepakojums: 18 kasetnes ar 6 skavām.
LP371-210	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanas pincetei no titāna; krāsu kods: zils; skavas izmērs: mazs; iepakojums: 36 kasetne ar 6 skavām
LP371-211	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanas pincetei, titāna; krāsu kods: zils; skavas izmērs: mazs; iepakojums: 15 kasetne ar 20 skavām
LP371-212	Ethic. Ligatūras skava skavas uzlikšanai. Pincete no titāna; krāsu kods: balta; skavas izmērs: vidējs; iepakojums: 36 gab. kaste ar 6 skavām
LP371-213	Ethic. Ligatūras skava skavas uzlikšanai titāna pincete; krāsu kods: balts; skavas izmērs: vidējs; iepakojums: 15 kasetne ar 20 skavām
LP371-214	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanai ar titāna pinceti; krāsu kods: zaļš; skavas izmērs: vidēji liels; iepakojums: 18 kasetne ar 6 skavām

LP371-215	Ethic. Ligatūras skava skavu uzlikšanas pincetei, titāna; krāsu kods: dzeltena; skavas izmērs: liels; iepakojums: 18 kasetne ar 6 skavām
-----------	--

Remonts

- Pat lietojot atbilstoši paredzētajam mērķim, ķirurģiskie instrumenti pakļauti vairāk vai mazāk izteiktam nodilumam atkarībā no to lietošanas intensitātes. Šo nodilumu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams novērst.
- Lūdzu, neveiciet remontu paši. Apkopi un remontu drīkst veikt tikai mēs – ražotājs – vai citas personas, kuras mēs esam pilnvarējuši.
- Ķirurģiskie instrumenti, kas jānosūta atpakaļ remontam, ir jāiztīra, jādezinficē un jāsterilizē.

Simboli un paskaidrojumi

	Ievērojiet lietošanas instrukcijas
REF	Pasūtījuma numurs
	Nesterils
	Ražotājs
	Brīdinājumu un piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt nāvi vai smagus ievainojumus
LOT	Partijas numurs
CE	CE marķējuma paziņotās iestādes numurs



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Vācija
Tālrunis: +49 7463 9956-0
Fakss: +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com