

Klemtang 10 mm

Klemtang 10 mm



Artikelnummers

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Beoogd gebruik

- Het is aan de gebruiker om te beslissen of dit medische product geschikt is of niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik en onjuiste voorbereiding.

Functietest

- Na levering en vóór elk gebruik moeten nieuwe instrumenten een grondige visuele inspectie ondergaan en op functionaliteit worden getest. Indien de instrumenten uiterlijke gebreken vertonen (krassen, breuken, scheuren, inkepingen, beschadigde isolatie, verbogen onderdelen of stroefheid) of indien ze niet functioneren zoals beschreven, dient u ons als fabrikant of onze verkooppartners onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik geen beschadigde instrumenten.
- Lees deze informatie zorgvuldig en volledig door. Verkeerd gebruik en onjuiste verzorging, evenals onjuiste behandeling, kunnen leiden tot vroegtijdige slijtage van chirurgische instrumenten. Personen die dit instrument gebruiken, dienen kennis te hebben van het gebruik en de behandeling van chirurgische

instrumenten, accessoires en bijbehorende apparatuur.

Eerste gebruik van nieuwe instrumenten

- Het gloednieuwe instrument moet uit de polyethyleen zak worden gehaald om condensatie te voorkomen en moet schoon, droog (max. luchtvochtigheid van 75% RV) en beschermd in een container bij kamertemperatuur worden bewaard tot de eerste voorbereiding.
- De clip-aanbrengpincetten worden niet-steriel geleverd. De instrumenten moeten grondig worden gereinigd en gesteriliseerd vóór het eerste gebruik en vóór elk hergebruik.
- Clip-aanbrengtangen zijn ontwikkeld voor sterilisatie in een autoclaaf; deze sterilisatiemethode heeft een bewezen staat van dienst. U kunt ook lage-temperatuurprocedures gebruiken, zoals STERRAD.


Veiligheidsadviezen voor onderhoud

- Alle chirurgische instrumenten moeten met de grootste zorg worden behandeld tijdens transport, reiniging, onderhoud, sterilisatie en opslag. Dit geldt met name voor mesjes en fijne bekken, die zeer kwetsbare onderdelen zijn.


Monteren / demonteren




Maak het handvat los van de schacht

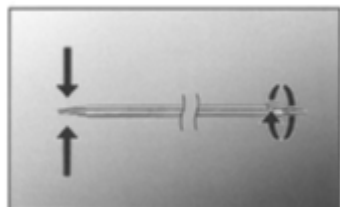

Schroef het inzetstuk los

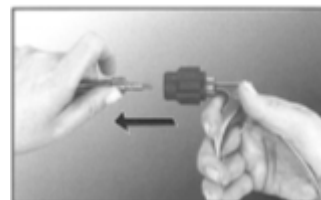


Trek de schacht uit de koppeling

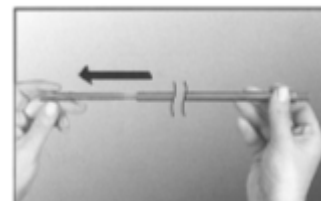


Trek het inzetstuk uit de as

Detailweergave bek

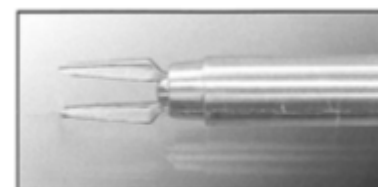

Geopende bekken

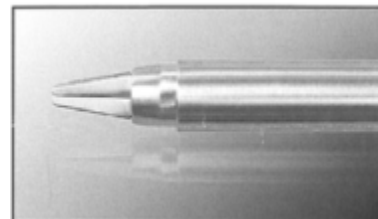

Kaken gesloten

Voorbereiding

- Elk chirurgisch instrument moet na elk gebruik worden gedesinfecteerd en grondig worden gereinigd. Reinig, controleer en test elk instrument zorgvuldig. Steriliseer alle instrumenten voor gebruik. Een geschikte reinigings- en onderhoudsprocedure verlengt de levensduur van de instrumenten. Besteed speciale aandacht aan sleuven, vergrendelingen, sluitingen, buizen en andere moeilijk bereikbare onderdelen. Endoscopische clip-aanbrengtangen moeten gedemonteerd worden gereinigd (zie Montage / Demontage). De clip-aanbrengtang voor open chirurgie moet volledig worden geopend (ontgrendel de veer/open de ringen volledig).

Let op

- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen (alleen zacht borstelen). Reinigingsmiddelen met een neutrale pH-waarde (7,0) zijn het meest geschikt.
- Het instrument is geschikt voor ultrasone reiniging.
- Spoel zorgvuldig af met gedestilleerd water
- Bewaar en steriliseer op de juiste manier
- Na het reinigen en spoelen moeten de instrumenten zorgvuldig worden gedroogd. Buizen moeten worden uitgeblazen.

- Standaard sterilisatietechnieken
- Het wordt aanbevolen om de instrumenten in een autoclaaf te steriliseren.
- Niet steriliseren met hete lucht.
- Standaardcycli in de autoclaaf: Stoomsterilisatie 134 °C/243 °F gedurende 15 min. U kunt ook andere tijden en temperaturen gebruiken, maar deze moet u eerst valideren. (Opmerking: de fabrikant van uw autoclaaf moet de temperaturen en sterilisatietijden bevestigen.) De temperaturen in de autoclaaf mogen niet hoger zijn dan 137 °C/280 °F.



Opmerking:

- Neem onze instructies voor voorbereiding #462 voor herbruikbare endoscopische instrumenten (hittebestendig) in acht. Mocht u deze niet hebben, vraag er dan om.

Accessoires en reserveonderdelen

LP371-200	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengpincet, roestvrij staal; kleurcode: blauw; clipmaat: klein; verpakking: magazijn van 36 stuks met 6 clips.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang, roestvrij staal; kleurcode: wit; clipmaat: medium; verpakking: magazijn met 36 clips
LP371-202	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang, roestvrij staal; kleurcode: groen; clipmaat: middelgroot; verpakking: magazijn van 18 stuks met 6 clips
LP371-203	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang roestvrij staal; kleurcode: geel; clipmaat: groot; verpakking: magazijn van 18 stuks met 6 clips.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang titanium; kleurcode: blauw; clipmaat: klein; verpakking: magazijn van 36 stuks met 6 clips
LP371-211	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang titanium; kleurcode: blauw; clipmaat: klein; verpakking: magazijn van 15 stuks met 20 clips
LP371-212	Ethic. Ligatuurclip voor het aanbrengen van clips. Pincet van titanium; kleurcode: wit; clipmaat: medium; verpakking: magazijn met 36 stuks met 6 clips
LP371-213	Ethic. Ligaturclip voor het aanbrengen van clips; titanium tang; kleurcode: wit; clipmaat: medium; verpakking: magazijn van 15 stuks met 20 clips
LP371-214	Ethic. Ligaturclip voor het aanbrengen van clips met een titanium tang; kleurcode: groen; clipmaat: medium-groot; verpakking: magazijn van 18 stuks met 6 clips
LP371-215	Ethic. Ligaturclip voor clip-aanbrengtang titanium; kleurcode: geel; clipmaat: groot; verpakking: magazijn van 18 stuks. Met 6 clips

Reparaties

- Zelfs bij gebruik volgens de voorschriften zijn chirurgische instrumenten onderhevig aan meer of minder ernstige slijtage, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Deze slijtage is om technische redenen onvermijdelijk.
- Voer alstublieft geen reparaties zelf uit. Onderhoud en reparaties mogen alleen door ons – de fabrikant – of door andere door ons geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
- Chirurgische instrumenten die voor reparatie worden teruggestuurd, moeten gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd zijn.

Symbolen en toelichting

	Volg de gebruiksaanwijzing
REF	Bestelnummer
	Niet-steriel
	Fabrikant
	Het niet opvolgen van de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen kan leiden tot de dood of ernstig letsel
LOT	Lotnummer
CE	CE-markering Nummer van de aangemelde instantie